


ପ୍ରୟୋଗଶାଳା ମୁଦ୍ରେଶିକା

LABORATORY MANUAL

OF

CHEMISTRY

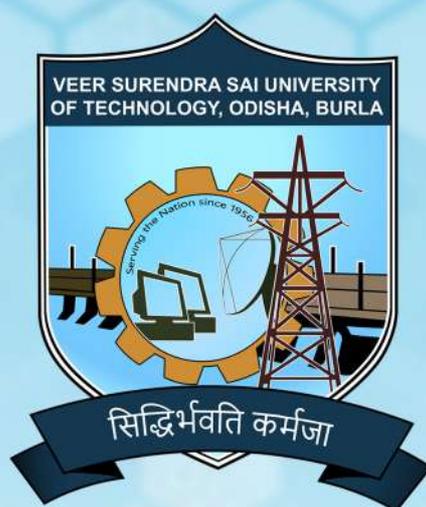

Name:.....

Regd. No..... Sem.....

DEPARTMENT OF CHEMISTRY

VEER SURENDRA SAI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Siddhi Vihar, Burla-768018, Sambalpur, Odisha, India


www.vssut.ac.in

LABORATORY

OBSERVATION BOOK

Name

Regd. No

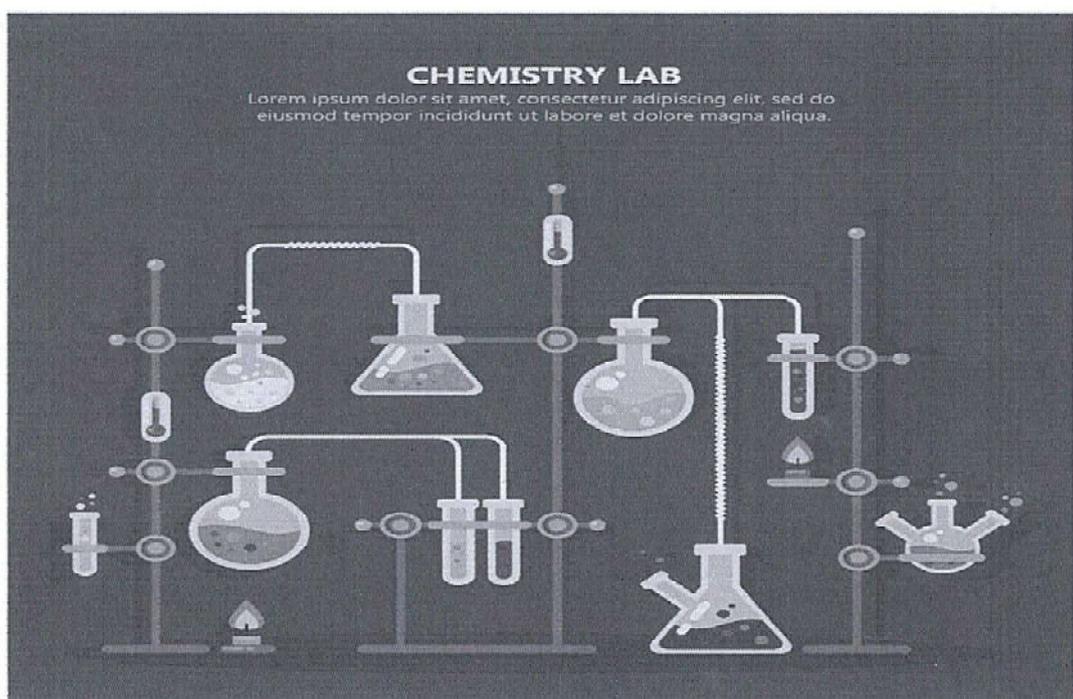

DEPARTMENT OF CHEMISTRY

VEER SURENDRA SAI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, BURLA
ODISHA - 768018

LABORATORY PRACTICAL COPY
LABORATORY OBSERVATION BOOK

Name of the Student :.....

Roll No. :

Semester :

Academic Session :.....



DEPARTMENT OF CHEMISTRY
VEER SURENDRA SAI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, BURLA
SAMBALPUR, ODISHA - 768018

TABLE OF CONTENTS

Sl. No.	Title of Experiment	Page No.
1	Experiment - 1	1
2	Experiment - 2	3
3	Experiment - 3	6
4	Experiment - 4	8
5	Experiment - 5	9
6	Experiment - 6	11
7	Experiment - 7	13
8	Experiment - 8	16
9	Experiment - 9	19
10	Experiment - 10	22

CHEMISTRY LABORATORY
ODD/EVEN SEMESTER 20.....
LOGBOOK MARK SHEET

Name :

Regd. No. :

Branch :

Section :

Semester :

TABLE OF CONTENTS			
Sl. No.	Title of Experiment	Marks obtained	Signature
1	 / 10	
2	 / 10	
3	 / 10	
4	 / 10	
5	 / 10	
6	 / 10	
7	 / 10	
8	 / 10	
9	 / 10	
10	 / 10	
	Total Marks obtained / 100	

Unauthorized absences will be credited with a mark of 0/10. Your completed laboratory logbook (with this sheet firmly stuck in and fully completed) must be submitted to your instructor at the end of all experiments. Your instructor will make an assessment and transmit the mark



Experiment :1

Aim of the Experiment : To determine the total amount of Sodium Carbonate and Sodium Hydroxide present in the supplied sample of Water.

Apparatus Required : Burette, Pipette, Conical Flask, Ice Bath.



Chemicals Required : Standard Acid, Methyl Orange, Phenolphthalein.

Theory : When a mixture of a base and a carbonate is titrated with a standard acid, then the neutralization occurs in two steps.

(i) In the first step, NaOH is completely neutralized and Na_2CO_3 is partially neutralized.

(ii) In the second step, neutralization of Na_2CO_3 is completed.

Chemical Reaction :

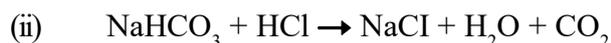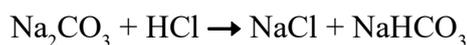

Procedure:

Pipette out 10 ml of supplied water sample into a conical flask. Add two drops of phenolphthalein indicator and cool it in an ice bath till it gets sufficiently cooled. Then titrate against standard acid (HCl) till the pink coloured solution turned into a colourless solution. Note the burette reading. The difference between the final and initial burette reading gives the volume V_1 . To this titrated solution, add 2 drops of methyl orange indicator and continue the titration till the colour changes from yellow to red. Again note down the final reading and the required volume of standard acid, V_2 . Repeat the above process three times to get the concordant readings.

Tabulation :

Number of Observation	Volume of Water Sample in ml	Burette Reading in ml			Difference in ml		Remarks
		I.B.R. (a)	F.B.R. (1 st) (b)	F.B.R. (2 nd) (c)	(b-a) V_1	(c-a) V_2	
1							Rough
2							concordant
3							
4							

I.B.R. Initial Burette Reading



F.B.R. Final Burette Reading



Calculations:






Subtracting equation (I) from equation (II)

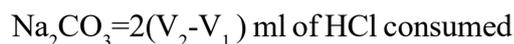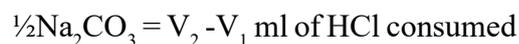

Similarly, the volume of Acid required to neutralize whole of NaOH = $V_2 - 2(V_2 - V_1)$ ml

Amount of Na_2CO_3 :

We know that

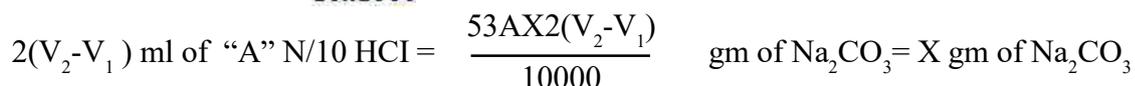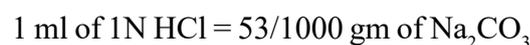
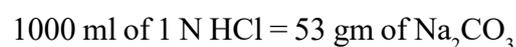


10 ml of supplied water sample contains X gm of Na_2CO_3 ,

1000 ml of Supplied water sample contains 100X gm/L of Na_2CO_3 ,

Amount of NaOH:

We know that

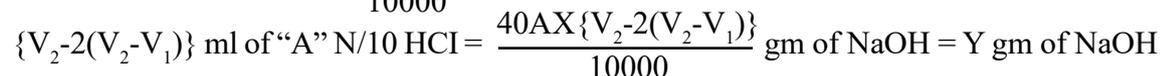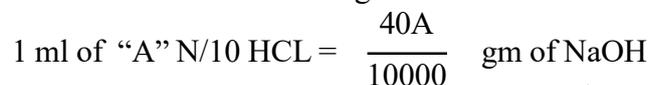

10 ml of supplied water sample contains Y gm of NaOH

1000 ml of Supplied water sample contains 100Y gm/L of NaOH.

Conclusion : The supplied water sample contains 100X gm/L of sodium carbonate and 100Y gm/L of Sodium hydroxide.



Experiment : 2

Aim of the Experiment : To determine the hardness of water by Ethylene Diamine Tetraacetic Acid (EDTA) method.

Apparatus Required : Burette, Pipette, Conical Flask, Measuring Flask, Wash Bottle

Chemicals Required:

(i) Standard disodium-EDTA Solution (ii) Eriochrome black-T indicator (EBT) [Sodium-1-(1-hydroxy-2-naphthyl azo)-6-nitro-2-naphthol-4-sulphonate (II)] (iii) Buffer solution ($\text{NH}_4\text{Cl} + \text{NH}_4\text{OH}$)

Theory : Hardness is the property of water, which prevents the lathering of soap. Originally, it was defined as soap consuming capacity of the water sample. The hardness of water is generally due to the presence of certain salts of Ca^{2+} , Mg^{2+} and other heavy metal ions like Al^{3+} , Fe^{3+} and Mn^{2+} dissolved in it. A sample of hard water, when treated with soap (sodium or potassium salt of higher fatty acid like oleic acid, palmitic acid or stearic acid) does not produce foam but on the other hand forms insoluble white scum or precipitate, which do not possess any detergent action. This is due to the formation of insoluble soaps of calcium and magnesium.

Type of Hardness:

(a) Temporary Hardness : It is caused by the presence of dissolved bicarbonates of calcium, magnesium and other heavy metals and the carbonates of iron. Temporary hardness can be removed by boiling of water as bicarbonate salts are decomposed producing insoluble carbonates or hydroxides which are deposited as a crust at the bottom of the vessel.

(b) Permanent Hardness : It is due to the presence of dissolved chlorides and sulphates of calcium, magnesium, iron and other heavy metals. Hence, the salts responsible for permanent hardness are CaCl_2 , MgCl_2 , CaSO_4 , MgSO_4 , FeSO_4 , $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$, etc. Hardness of water is generally expressed in terms of equivalent amount of CaCO_3 . The reason for choosing CaCO_3 as the standard for reporting hardness of water is actually its molecular weight which is 100. This makes the calculation easier. Moreover, CaCO_3 is the most insoluble salt that can be precipitated in the water treatment.

Units of Hardness:

(i) Parts per million (PPM) : It is defined as the number parts by weight of calcium carbonate present per million (10^6) parts by weight of water i.e. 1 PPM = 1 part of CaCO_3 equivalent hardness in 10^6 parts of water.




(ii) Milligrams per Liter (mg/L) : It is defined as the number of milligrams of calcium carbonate present in one litre of water.

It should be remembered that $1\text{mg/L} = 1\text{PPM}$ for water.

Principle : Disodium salt of EDTA (a chelating ligand) when treated with hard water reacts with it and consumes all the hardness producing cations in alkaline medium (pH 8-10). The excess of reagent is indicated by the reaction of the indicator Eriochrome black-T, which colours the solution from wine red to clear blue that is the end point of this complexometric titration.



Chemical Reactions :

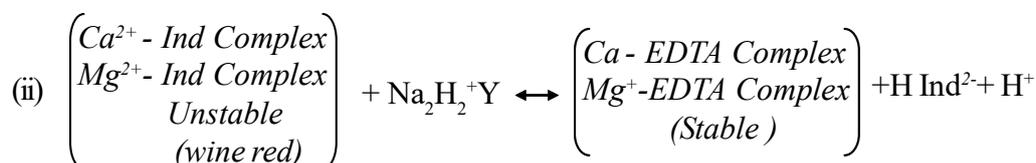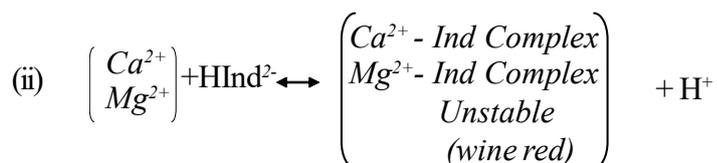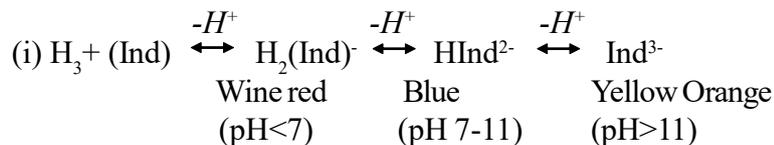

Procedure:

(i) Determination of Total Hardness:

Pipette out 40 ml of hard water sample into a 100 ml of conical flask. Add 2 ml of buffer solution and 2-3 drops of Ericrome black-T indicator. Then titrate the solution with M/100 EDTA solution from the burette until colour changes from wine red to blue colour at the end point. Note the titrate value till you get the concordant reading. Let the volume is V_2 ml.

Tabulation: 01

No of Observations	Amount of supplied water sample in ml	Initial Burette reading in ml	Final Burette reading in ml	Difference in ml	Remarks
1					Rough
2					Concordant
3					
4					

(ii) Determination of Temporary and Permanent Hardness : Take 250 ml of hard water sample in a large beaker and boil gently for about 1 hour (till all the bicarbonates are decomposed into insoluble $\text{CaCO}_3 + \text{Mg}(\text{OH})_2$). Cool, filter into a 250 ml measuring flask and make the volume up to the mark. Take 50 ml of this solution and proceed in the same way as above. The volume of EDTA used corresponds to the permanent hardness in the water sample. Let the volume is V_3 ml.

Temporary hardness is calculated by subtracting permanent hardness from total hardness.

**Tabulations: 02**

No of Observations	Amount of supplied water sample in ml	Initial Burette reading in ml	Final Burette reading in ml	Difference in ml	Remarks
1					Rough
2					Concordant
3					
4					

Calculation :**Total Hardness:**

1000 ml of 1 M EDTA = 100 gm of CaCO_3

1 ml of 1 M EDTA = 100 mg of CaCO_3

1 ml of "a" M/100 EDTA = "a" mg of CaCO_3

V_2 ml of "a" M/100 EDTA = "a" V_2 mg of CaCO_3 = "A" mg of CaCO_3

Now 40 ml water sample contains = "A" mg of CaCO_3

1000 ml or 1 liter of water sample contains = $\frac{A}{40} \times 1000 = 25A$ mg/L = 25A ppm total

hardness in terms of CaCO_3 equivalent hardness.

Permanent Hardness:

1 ml of 1 "a" M/100 EDTA = "a" mg of CaCO_3

V_3 ml of "a" M/100 EDTA = "a" V_3 mg of CaCO_3 = "B" mg of CaCO_3

Now 40 ml boiled water sample contains = "B" mg of CaCO_3

1000 ml or 1 Liter of boiled water sample contains = $\frac{B}{40} \times 1000 = 25B$ mg/L = 25B ppm

permanent hardness in terms of CaCO_3 equivalent hardness.

So temporary hardness is equal to (25A-25B) ppm in terms of CaCO_3 equivalent hardness.

Conclusion : The supplied water sample contains 25A ppm of total hardness, 25B ppm permanent hardness and (25A-25B) ppm of temporary hardness in terms of CaCO_3 equivalent hardness.



Experiment : 3


Aim of the Experiment : Standardization of Potassium Permanganate (KMnO_4) using Oxalic Acid

Apparatus Required : Burette, Pipette, Conical Flask

Chemicals Required : KMnO_4 Solution, Oxalic Acid (N/10), Dilute H_2SO_4

Theory : Potassium permanganate is a secondary standard solution since it contains traces of manganese dioxide as impurity. Moreover, potassium permanganate is a strong oxidizing agent and prone to decompose in presence of water, air and light. As a result, the strength of the potassium permanganate does not remain fixed for a longer time or period. Therefore, the strength of the permanganate solution is determined prior to its use. Potassium permanganate acts as a strong oxidizing agent in acidic medium and therefore it can be titrated against a reducing agent like standard oxalic acid at 60-70 °C in presence of sulphuric acid. Oxalic acid can be decomposed on high-temperature heating before titration. During the reaction, MnO_4^- is reduced to Mn^{2+} and oxalate ions is oxidized to CO_2 . In this titration, potassium permanganate acts as a self-indicator because it has the capability to change colour with change in oxidation state (Mn^{7+} is pink in colour, whereas Mn^{2+} is colorless in water medium). During titration potassium permanganate is reduced by oxalic acid to colourless manganous ions and when the whole reducing agent is consumed, the addition of even one extra drop of KMnO_4 imparts light pink colouration to the solution, which is the end point of titration.

Chemical Reaction:

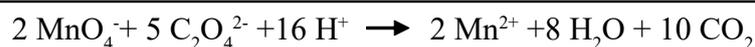

Procedure:

Pipette out 10 ml of given N/10 oxalic acid into a 250 ml of conical flask. Add half test tubes of dilute sulphuric acid and heat up to 50-60 °C. Then, titrate the solution against KMnO_4 solution until to get a permanent light pink color. Repeat the titration till concordant readings are obtained.

Tabulation

No of Observations	Volume of N/10 Oxalic acid	I.B.R. (ml)	F.B.R (ml)	Difference in ml	Remarks
1					Rough
2					Concordant
3					
4					



Calculation :

We know; $S_1V_1 = S_2V_2$

Where, S_1 - strength of Oxalic acid (N/10)

V_1 - Volume of Oxalic acid (10 ml)

S_2 - Strength of $KMnO_4$

V_2 - Volume of $KMnO_4$ consumed

$$S_2 = \frac{S_1 \times V_1}{V_2}$$

Conclusion : Strength of supplied potassium permanganate isN.



Experiment : 4


Aim of the Experiment : Determination of Ferrous ion in Mohr's salt $[\text{FeSO}_4(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4 \cdot 6\text{H}_2\text{O}]$ by using standardized potassium permanganate.

Apparatus Required : Burette, Pipette, Conical Flask, Beaker, Measuring Cylinder, Wash Bottle, Test Tube.

Chemicals Required : (i) Mohr's salt solution, (ii) KMnO_4 solution, (iii) Dilute H_2SO_4

Theory: The amount of ferrous ion present in Mohr's salt solution is determined by titrating against potassium permanganate solution in acidic medium. Here, potassium permanganate acts as a self-indicator. The end point is determined by the appearance of permanent light pink color. During the reaction Fe^{2+} is oxidized to Fe^{3+} and MnO_4^- is reduced to Mn^{2+}

Chemical Reactions:

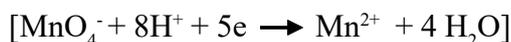

Procedure : Pipette out 10 ml of supplied Mohr's salt solution into a 250 ml of conical flask. Add half test tubes of dilute sulphuric acid and titrate the solution against KMnO_4 solution until to get permanent light pink color. Repeat the titration till concordant readings are obtained.

No of Observations	Volume of N/10 Oxalic acid	I.B.R. (ml)	F.B.R. (ml)	Difference in ml	Remarks
1					Rough
2					Concordant
3					
4					

Calculation : Let the volume of KMnO_4 solution consumed by Mohr's salt solution is = V ml

We know 1000 ml of 1 N $\text{KMnO}_4 = 55.84$ gm of Fe

$$1 \text{ ml of } 1 \text{ N } \text{KMnO}_4 = \frac{55.85}{1000} \text{ gm of Fe}$$

$$V \text{ ml of } \frac{x}{10} \text{ N } \text{KMnO}_4 = \frac{55.85}{1000} \times V \times \frac{x}{10} \text{ gm of Fe} = 'A' \text{ g of Fe}$$

So 10 ml of Mohr's salt solution contains "A" gm of Fe

1000 ml of Supplied Mohr's salt solution contains 100 A gm/L of Fe.

Conclusion : Supplied Mohr's salt solution contains..... gm/L of Fe.



Experiment : 5

Aim of the Experiment : To determine the amount of Dissolved Oxygen present in the supplied sample of water.

Apparatus Required : Burette, Stopper Bottle (500 ml), Measuring Cylinder (250 ml), Test Tube.

Chemicals required :


(i) Manganous sulphate solution (48%), (ii) Alkaline potassium iodide solution, (iii) Concentrated sulphuric acid, (iv) Standard sodium thiosulphate solution, and (v) Freshly prepared starch solution.

Theory:

Dissolved oxygen is an important water quality parameter. It is the amount of oxygen required for complete oxidation of organic matter present in water. Water usually contains about 8 ml of dissolved oxygen per liter of water at room temperature. Determining dissolved oxygen is essential in boiler feed water because it can cause corrosion of the boiler. Dissolved oxygen in water is determined by Winkler's method.

Determination of dissolved oxygen in water is based on the oxidation of potassium iodide by dissolved oxygen. The iodometric method (Winkler) is based on the fact that in alkaline medium, dissolved oxygen oxidizes Mn^{+2} to Mn^{+4} , which in acidic medium oxidizes iodide to free iodine. The amount of iodine released is titrated against standard sodium thiosulphate solution.



Since dissolved oxygen in water is in the molecular state and is not capable of reacting with potassium iodide solution, oxygen carrier (such as Manganous hydroxide) is used to bring about the reaction between KI and oxygen.

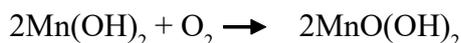

(Oxygen carrier) (Basic Manganic Oxide)



(Nascent Oxygen)

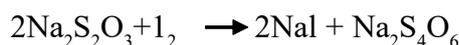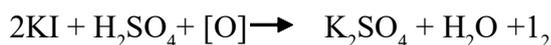

Starch + I_2 Starch Iodide complex (Blue colour)

Procedure:

Take 250 ml of water sample in a stoppered bottle leaving behind around 10 ml of empty space at the top. (Avoiding as far as possible to contact with air). Immediately add 5 ml of manganous sulphate solution



followed by 5 ml of alkaline potassium iodide solution with the help of a pipette so that the solution is delivered well below the surface of water. (The alkaline KI solution contains sodium azide, which takes care of any oxidizing agent present, that are likely to liberate iodine from KI). The bottle is shaken well for several times to ensure proper mixing and the precipitate formed is allowed to settle down for a few minutes. Then 3 ml of concentrated H_2SO_4 is added dropwise to the solution with shaking till the precipitate is getting dissolved and giving a clear yellow color solution. Keep the solution in dark for about 5 minutes inside the cupboard. Then, pipette out 20 ml of the solution and titrate the solution against standard sodium thiosulphate solution from the burette. When the color of the solution is very light yellow (straw color), add 1 ml of freshly prepared starch indicator and continue the titration till the blue color just disappears.

No of Observations	Volume of N/10 Oxalic acid	Burette Reading (ml)		Difference in ml	Remarks
		I.B.R. (ml)	F.B.R (ml)		
1					Rough
2					Concordant
3					
4					

Calculations:

1000 ml of $1N Na_2S_2O_3$ solution equiv 8 gm of Oxygen

1 ml of $1N Na_2SO_3$ solution equiv 8 mg of Oxygen

V ml of "a" N / 10 $Na_2S_2O_3$ solution gm of oxygen equiv $= \frac{8aV}{10}$ gm of oxygen

20 ml of water contains equiv $\frac{8aV}{10}$ mg of Oxygen

1000 ml of water contains of equiv $= \frac{8aV}{10} \times \frac{1000}{20}$ mg/L of Oxygen

= "A" mg/L of Oxygen

= "A" ppm of Oxygen

Conclusion:

The amount of dissolved oxygen present in the supplied sample of water is..... ppm.



Experiment :6

Aim of the Experiment : Determination of Percentage of Available Chlorine in a supplied bleaching powder solution.

Apparatus Required:

Burette, Pipette, Conical Flask, Watch Glass, Measuring Cylinder, Wash Bottle

Chemicals Required:

Bleaching Powder Solution, KI (10%) Solution, Dilute Acetic Acid, (N/10) Sodium thiosulphate Solution, Starch Indicator

Theory :

Bleaching powder is a good disinfectant which has added to water for killing disease-causing bacteria. The germicide action of bleaching powder is due to hypochlorous acid and nascent oxygen liberated. It is powerful oxidizing agent and hygroscopic in nature.



The quality of bleaching powder is based on the quantity of available chlorine presenting in it. Percentage of available chlorine may be defined as the amount of chlorine available for oxidation per hundred parts of bleaching powder. So, more is percentage of available chlorine, better is the quality of the bleaching powder. Although, bleaching powder contains about 56% of chlorine but a good quality of bleaching powder contains only 35-38% of available chlorine. Because on standing bleaching powder undergoes slow decomposition and gets converted into calcium chloride and calcium chlorate. Hence percentage of available chlorine decreases on passage of time.



Principle:

The chlorine, which is liberated in water made to react with KI so that iodine is liberated. This liberated iodine is titrated against a standard solution of sodium thiosulphate using starch as indicator.

Chemical Reactions:

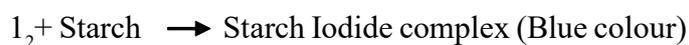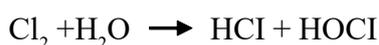



Procedure:

Pipette out 10 ml of supplied bleaching powder solution into a 250 ml of conical flask. Add 15 ml of 10% KI solution followed by 10 ml of dilute acetic acid solution. Cover the conical flask with watch glass and set for 5 minutes in dark. After 5 minutes, titrate the liberated iodine with standard hypo-solution to get a faint yellow colour. Add 2-3 drops of starch indicator and continue the process of titration to get a colorless solution, which is the end point. Note the titrate value. The above process is repeated for another 3 times to get the concordant readings.

Tabulations :

No of Observations	Volume Supplied CaCOCl ₂ solution of	Initial Burette Reading in ml	Final Burette Reading in ml	Difference (ml)	Remark
1					Rough
2					Concordant
3					
4					

Calculations :

Concentration of Bleaching powder solution = 10gm / L

Titrate value = Xml

We know that :

1000 ml of 1 N Na₂S₂O₃ = 35.5 gm of chlorine

1 ml of 1N Na₂S₂O₃ = 0.035 gm of chlorine

1ml of “a” N/10 Na₂S₂O₃ ≈ 0.035a gm of chlorine

X ml of “a” N/10 Na₂S₂O₃ ≈ 0.035aX gm of chlorine

Now 10 ml of supplied bleaching powder solution contains 0.035aX gm of chlorine

1000 ml of supplied bleaching powder solution contains $\frac{0.035aX}{25} \times 1000 = A$ gm of chlorine

% of Available Chlorine :

10 gm of CaOCl₂ solution contains A gm of available chlorine

100 gm of CaOCl₂ solution contains 10A gm of available chlorine

Conclusion :

Supplied bleaching powder solution contains of available chlorine.



Experiment :7

Aim of the Experiment : Estimation of amount of calcium in lime stone.

Apparatus Required : Burette, Pipette, Conical Flask

Chemicals Required:

KMnO₄ Solution, Standard oxalic acid (N/10), 8% Ammonium oxalate solution, NH₄Cl, Ammonia

Theory : Lime stone essentially consists of calcium carbonate but it is generally associated with small quantities of magnesium carbonate. Dolomite is an equimolecular compound of calcium carbonate and magnesium carbonate. These ores are generally contaminated with minor amounts of oxides of iron, aluminium, silicon (free or combined) and organic matters. The minerals have large number of industrial applications and the quality of the mineral as well as its suitability for a particular commercial application depends upon the amounts of CaCO₃, MgCO₃ and the other constituents present. Hence, complete analysis is often necessary.



In this method, the lime stone powder is dissolved in hydrochloric acid and the calcium present in the solution is precipitated as calcium oxalate using oxalic acid or ammonium oxalate in presence of ammonia. The precipitated calcium oxalate after washing is treated with dilute sulfuric acid and the oxalic acid liberated is titrated with a standard KMnO₄ solution. From the volume of KMnO₄ required for the titration, the amount of Ca in the ore can be calculated:

$$1 \text{ ml of } 1 \text{ N KMnO}_4 = 0.020 \text{ gm of Ca}$$

$$1 \text{ ml of } 1 \text{ N KMnO}_4 = 0.028 \text{ gm CaO}$$

$$1 \text{ ml of } 1 \text{ N KMnO}_4 = 0.050 \text{ gm of CaCO}_3$$

Chemical Reactions :

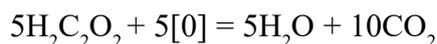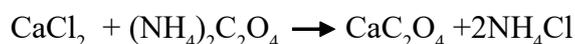

Procedure :

Weight accurately 1 gm of the lime stone in to a beaker and treat it with a little dilute HCl to dissolve the ore. Take care to see that there is no loss of the solution due to quick evolution of CO₂ by covering the beaker with a watch glass. After all the ore is dissolved, wash the watch glass with water in to the same beaker. Render the solution alkaline by adding ammonia. Add 1 gm of NH₄Cl and stir the solution to



dissolve it. Continue the stirring and add excess of 8% ammonium oxalate solution. Boil the solution and allow the calcium oxalate precipitate to settle down. Decant the supernatant liquid through a filter paper. Wash the precipitate several times with hot distilled water containing a little of ammonium hydroxide until the filtrate is free from chloride and oxalate ions (by testing with AgNO_3 for chloride and mild hot and dilute acidified KMnO_4 for oxalate). Preserve this filtrate for the determination of magnesium. if necessary, as magnesium pyrophosphate.

Place the beaker containing the precipitate under the funnel and add 20 to 25 ml of 5N H_2SO_4 in to the filter paper to dissolve the calcium oxalate present in the filter paper. The acid also dissolves the calcium oxalate precipitate in the beaker. Wash the filter paper with distilled water and collect these washing also in to the same beaker. Transfer the solution quantitatively in to a 250 ml measuring flask, make it up to the mark and shake the solution thoroughly. Take 25 ml of the solution in to a conical flask, add 10 ml of dil. H_2SO_4 , heat the solution to about 70°C and titrate against the standard KMnO_4 solution (which in turn was standardised with standard oxalic acid solution first).

No of Observations	Volume of Oxalic Solution	I.B.R. (ml)	F.B.R (ml)	Difference in ml	Remarks
1					Rough
2					Concordant
3					
4					

Calculations :

Weight of ore taken = 1 gm

Volume of the oxalic acid solution made up = 250 ml

Volume of oxalic acid taken for each titration = 25 ml

Volume of KMnO_4 solution rundown = x ml

Standardisation of KMnO_4 solution :

25 ml of N/10 oxalic acid = 25 ml of N/10 KMnO_4 solution

Normality of KMnO_4 = N/10

Now, we know that

1 ml of 1 N KMnO_4 = 0.02 gm of Ca

19.3 ml N/10 KMnO_4 = $0.02 \times X \times 1/10$ gm of Ca



Hence, 25 ml of the solution contains $0.02 \times x$ gm of Ca

250 ml of the solution contains $0.02 \times x$ gm of Ca

Now, 1 gm of the ore contains $0.02 \times x$ gm of Ca

100 gm of the ore contains $0.02 \times X \times 100$ gm

= x gm of Ca

% of Ca present in the ore = $38.6\% = 96.5\% \text{CaCO}_3$

Conclusion:

The supplied lime stone contains $x\%$ of Ca.



Experiment :8

Aim of the Experiment : Determination of flash point of an oil using Pensky-Martens flash point apparatus

Apparatus Required:

Pensky-Marten's Closed Cup Flash Point Apparatus, Thermometer, Measuring Cylinder, LV Beaker

Chemical Required:

Supplied Oil Sample

Theory:

The flash point of an oil is defined as the minimum temperature at which it gives vapours, which when mixed with air form an inflammable mixture and gives a flash of light on the application of a pilot flame. This gives information regarding the volatility of oil necessary to prevent fire hazards.

The fire point is the lowest temperature at which sufficient vapours are grown up by an oil, so that it burns continuously for at least 5 seconds on being lighted by a pilot flame.

The flash point gives a rough indication of the tendency of the oil to volatilise and therefore is useful in process control for maintaining the uniformity of the product. The fire point of an oil is about to 40° higher than its flash point. A lubricant should have its flash point at least above the temperature at which it is to be used. This provides protection against fire hazards during use, transport and storage of lubricants. Both flash and fire points can be determined by using Pensky-Martens closed cup apparatus.

Procedure :

Take the supplied oil sample in the cup provided in the apparatus. Close the cup with the cover and place the thermometer in its position. Adjust the electrical heating system so that the rise in temperature is about 1 °C in 7 minutes. Keep the pilot flame burning and continue hosting with constant stirring. Take the reading at every 5 °C interval to obtain the approximate flash point. Allow the oil to cool with stirring by 5 °C and take the readings with every 1 °C rise in temperature till the flash point is obtained. Once the flash occurs, allow the temperature to rise by about 5 °C more and discontinue the heating. Allow the oil to cool with continuous stirring and take the readings with every 1 °C fall of temperature till no flash occurs. The minimum temperature at which the flash occurs gives the flash point of the oil.



Tabulation: 01 (Observation for approximate flash point)

No. of Observations	Temperature increase by (5 °C)	Remarks
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

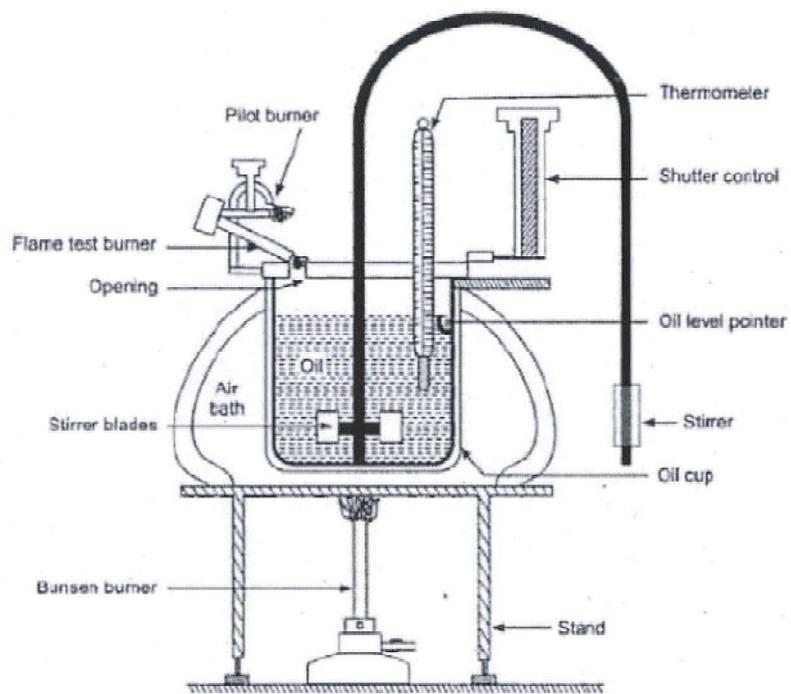


Figure 01: Pensky Marten's Flash Point Apparatus



Tabulation: 02 (Determination of flash point)

No. of Observations	Temperature Increase by (5 °C)	Remarks	No. of Observations	Temperature Increase by (5 °C)	Remarks
1			1		
2			2		
3			3		
4			4		
5			5		
6			6		
7			7		
8			8		
9			9		
10			10		

Conclusion :

The flash point of the given oil is _____ °C = _____ °F.

The fire point of the given oil is _____ °C = _____ °F.



Experiment : 9

Aim of the Experiment : Determination of viscosity of a lubricating oil by using Redwood viscometer.

Apparatus Required :

Redwood Viscometer, Thermometer, Stopwatch

Chemical Required :

Given Lubricating Oil

Theory :

The **Viscosity** is the property of a fluid by virtue of which it offers resistance to its flow. It is thus a measure of the internal resistance in the fluid and its determination is usually done in case of the lubricating oils. It is the single most important property of any lubricating oil, since it is the main factor that determines the operating characteristics of a lubricant.

The **Absolute Viscosity** of an oil at any given temperature is determined by measuring the rate of flow of the oil through a capillary tube. The **Kinematic Viscosity** of lubricating oils is generally determined by measuring the time taken for a given quantity of the oil to flow under its own weight through a capillary of standard dimension under standard conditions. The instrument used for the measurement of viscosity of the oil is called viscometer. **Redwood Viscometer** is commonly used for measurement of viscosity of lubricating oils, in empirical unit and not in absolute unit.

Absolute and Kinematic Viscosities of a fluid can be determined by **Redwood viscometer**, according to the formula

$$\text{Absolute Viscosity} = \left(\alpha t - \frac{\beta}{t} \right) \rho$$

$$\text{Kinematic Viscosity (V)} = \frac{\text{Absolute Viscosity}}{\rho} = \alpha t - \frac{\beta}{t}$$

Where,

V = Kinematic viscosity of the oil in centistokes.

T = Time of flow in seconds for a fixed quantity of the oil flowing through capillary

ρ = Density of the oil

α and β are instrument constants.

The value of α and β are in given below:

Time of flow in seconds for 50 ml	α	β
34 - 100	0.00260	0.00260
Over 100	0.00247	0.00247

The values are calculated in centistokes unit.

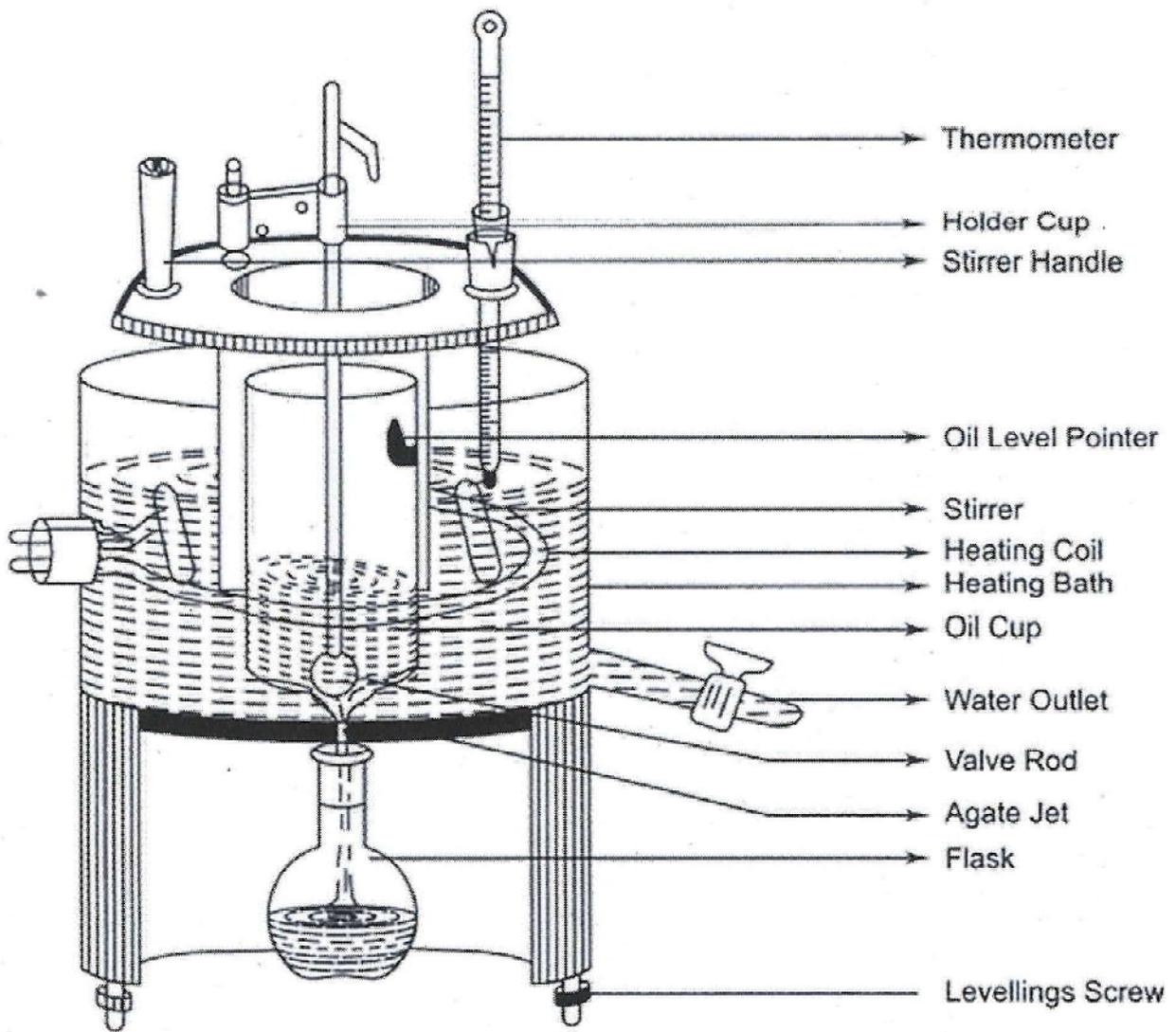


Figure 01: *Redwood Viscometer.*

Procedure :

Before taking the oil in the oil cup ensure that the oil cup is clean and dry and the capillary has no obstructions for the flow of the oil. Close the capillary and fill the cup with oil sample up to the level indicator. The heating jacket is filled with water, which can be heated to rise the temperature of the oil to different values at which measurements are to be made. Make the first measurement when the oil is at room temperature by allowing the oil to flow through the capillary and record the time in seconds when exactly 50 ml of the oil is collected in the measuring Kohlrusch flask placed at the bottom. Close the capillary, refill the oil cup by the same oil up to the levelling mark, increase the temperature of the oil by about 10-15 °C (not less than 10 °C) by heating and record the temperature and the corresponding time in seconds. when exactly 50 ml of the oil is collected in the measuring Kohlrusch flask. Repeat the measurements at five different temperatures. Calculate the kinematic viscosity of the oil at different temperatures and plot a graph between temperature and kinematic viscosity of the oil. Report the mean value as Redwood viscosity in seconds.



Tabulation :

No of Observations	Initial temperature (°C)	Final temperature (°C)	Mean temperature (°C)	Time (Second)	Value of α	Value of β	Kinematic Viscosity (centistokes)

Graph : Plot the graph Temperature versus Kinematic Viscosity

Conclusion :

The downward sloping curve obtain by plotting a graph of temperature versus kinematic viscosity proves that the above are inversely related to each other i.e. with increase in temperature, viscosity decreases and vice-versa and the viscosity of the supplied oil is found to be Redwood seconds.



Experiment : 10


Aim of the experiment : Preparation of Aspirin (acetyl salicylic acid)

Apparatus required : Conical flask, Beaker (100 mL), Buchner funnel

Chemicals required : Salicylic acid, Acetic anhydride, Conc. H_2SO_4

Theory:

Salicylic acid upon acetylation yields acetyl salicylic acid or aspirin. Acetylation proceeds rapidly with acetic anhydride in presence of a little conc. H_2SO_4 as catalyst.

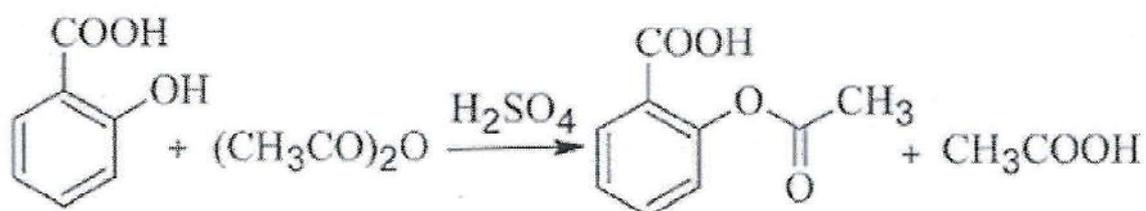

Procedure :

Take 5 g of salicylic acid and 7 mL of acetic anhydride in a 100 mL. conical flask. To it add 2-3 drops of conc. H_2SO_4 ; ; shake and then heat the flask on a water bath keeping temperature between 60-70 °C for 20 minutes. Cool the mixture in an ice bath with stirring; add about 20 mL of the ice cold water to decompose the excess of acetic anhydride. Pour the contents of the conical flask into a 250 mL beaker containing 50 g of crushed ice, stir until white solid appears. Scratch the side wall of the flask with a glass rod or stainless steel spatula, if white solid does not appear. Filter through a Buchner funnel, dry by pressing into the folds of filter paper. Recrystallize the crude acetyl salicylic acid from a mixture of equal volumes of acetic acid and water.

Conclusion:

Yield-5g, M.P=136-137 °C

Acetyl acetic acid decomposes when heated and does not possess a true clearly defined melting point

ପରୀକ୍ଷାଗାର ବ୍ୟବହାର କଠି

ପରୀକ୍ଷାଗାର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପୁସ୍ତକ



ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗ
ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ବୁର୍ଲା
ସମ୍ବଲପୁର, ଓଡ଼ିଶା - ୭୬୮୦୧୮

ସୂଚୀପତ୍ର

କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା	ପରୀକ୍ଷାର ଶୀର୍ଷକ	ପୃଷ୍ଠା ନମ୍ବର
1	ପରୀକ୍ଷଣ - ୧	23
2	ପରୀକ୍ଷଣ - ୨	26
3	ପରୀକ୍ଷଣ - ୩	30
4	ପରୀକ୍ଷଣ - ୪	32
5	ପରୀକ୍ଷଣ - ୫	34
6	ପରୀକ୍ଷଣ - ୬	37
7	ପରୀକ୍ଷଣ - ୭	40
8	ପରୀକ୍ଷଣ - ୮	43
9	ପରୀକ୍ଷଣ - ୯	46
10	ପରୀକ୍ଷଣ - ୧୦	49



ପରୀକ୍ଷା - ୧

ପରୀକ୍ଷାର ଶୀର୍ଷକ : ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ଜଳ ନମୁନାରେ ଥିବା ସୋଡ଼ିୟମ କାର୍ବୋନେଟ୍ ଏବଂ ସୋଡ଼ିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡର ମୋଟ ପରିମାଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ

ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଉପକରଣ : ବ୍ୟୁରେଟ୍, ପିପେଟ୍, କୋନିକାଲ ଫ୍ଲାସ୍କ, ଆଇସ୍ ବାଥ୍



ଆବଶ୍ୟକୀୟ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ : ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ ଅମ୍ଳ (HCl), ମିଥାଇଲ୍ ଓରେଞ୍ଜି, ଫେନୋଲଫଥାଲିନ୍

ବିଶ୍ଳେଷଣ : ଯେତେବେଳେ ଏକ କ୍ଷାର ଏବଂ କାର୍ବୋନେଟର ମିଶ୍ରଣକୁ ଏକ ମାନକ ଅମ୍ଳ ସହିତ ଟାଇଟ୍ରେଟ୍ କରାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଣାମନୀକରଣ (Neutralisation) ଦୁଇ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଘଟେ ।

(୧) ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପରେ, NaOH ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଣାମନୀକରଣ (Neutralisation) ହୋଇଥାଏ ଏବଂ Na₂CO₃ ର ଆଂଶିକ ପ୍ରଣାମନ ହୋଇଥାଏ ।

(୨) ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦକ୍ଷେପରେ, Na₂CO₃ ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଣାମନ ହୋଇଥାଏ ।

ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା :

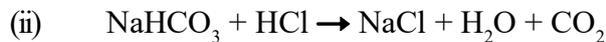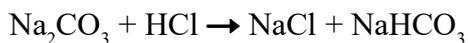

ପ୍ରକ୍ରିୟା :

ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ଜଳ ନମୁନାର ୧୦ ମି.ଲି. ପିପେଟ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ବାହାର କରି କୋନିକାଲ ଫ୍ଲାସ୍କରେ ରଖନ୍ତୁ । ଏଥିରେ ଫେନୋଲଫଥାଲିନ୍ ସୂଚକର ଦୁଇ ବୁନ୍ଦା ମିଶାନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ବରଫ ବାଥରେ ଥଣ୍ଡା କରନ୍ତୁ । ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଯଥେଷ୍ଟ ଥଣ୍ଡା ନ ହୁଏ । ତା'ପରେ ଗୋଲାପା ରଙ୍ଗ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ ଅମ୍ଳ (HCl), ବିରୁଦ୍ଧରେ ଟାଇଟ୍ରେଟ୍ କରନ୍ତୁ । ବ୍ୟୁରେଟ୍ ପଠନ୍ତୁ ଧାନ ଦିଅନ୍ତୁ । ଏହି ପଠନ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବ୍ୟୁରେଟ୍ ପଠନମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ, ଆୟତନର ମୂଲ୍ୟ ଜଣାଇବ (V₁) । ଏହି ଟାଇଟ୍ରେଟ୍ ଦ୍ରବଣରେ, ମିଥାଇଲ୍ ଓରେଞ୍ଜି ସୂଚକ ୨ “ବୁନ୍ଦା” ମିଶାନ୍ତୁ ଏବଂ ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆରୁ ଲାଲ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାଇଟ୍ରେଟ୍ କରନ୍ତୁ । ଏହି ବ୍ୟୁରେଟ୍ ପଠନମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବ୍ୟୁରେଟ୍ ପଠନମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ V₂ ଆୟତନର ମୂଲ୍ୟ ଜଣାଇବ । ସଂଗତ (concordent) ପଠନମୂଲ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଉପରୋକ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତିନିଥର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରନ୍ତୁ ।



ସାରଣୀ :

ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ସଂଖ୍ୟା	ଜଳ ନମୁନାର ଆୟତନ (ମି.ଲି.)	ବ୍ୟୁରେଟ୍ ପଠନ (ମିଲି)			ପାର୍ଥକ୍ୟ (ମିଲିରେ)		ମନ୍ତବ୍ୟ
		ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବ୍ୟୁରେଟ୍ ପଠନମୂଲ୍ୟ I.B.R. (a)	ଅନ୍ତିମ ବ୍ୟୁରେଟ୍ ପଠନମୂଲ୍ୟ F.B.R. (1 st) (b)	ଅନ୍ତିମ ବ୍ୟୁରେଟ୍ ପଠନମୂଲ୍ୟ F.B.R. (2 nd) (c)	(b-a) V ₁	(c-a) V ₂	
1							ପାଖାପାଖି
2							ସଂଗତ
3							
4							



I.B.R. - ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବ୍ୟୁରେଟ୍ ପଠନମୂଲ୍ୟ

F.B.R. - ଅନ୍ତିମ ବ୍ୟୁରେଟ୍ ପଠନମୂଲ୍ୟ

ପରିକଳନ :





ସମୀକରଣ (୧) ରୁ ସମୀକରଣ (୨) କୁ ବିଯୋଗ କରିଲେ

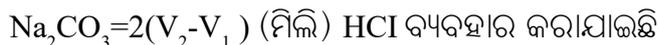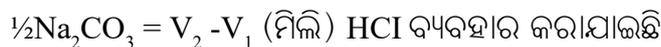

NaOH କୁ ପ୍ରଶମନ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଅମ୍ଳର ଆୟତନ = $V_2 - 2(V_2 - V_1)$ ମିଲି

Na₂CO₃ ର ପରିମାଣ :

ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ,

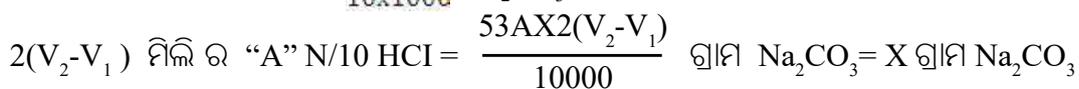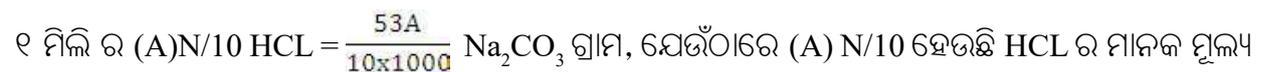

ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ଜଳ ନମୁନାରେ ୧୦ ମିଲିରେ X ଗ୍ରାମ Na₂CO₃ ଅଛି ।

ତାହେଲେ ୧୦୦୦ ମିଲି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ଜଳ ନମୁନାରେ ୧୦୦ X ଗ୍ରାମ /ଲିଟର Na₂CO₃ ଅଛି ।



NaOH ର ପରିମାଣ :

ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ,

$$୧୦୦୦ \text{ ମିଲି } ୧N \text{ HCl} = ୪୦ \text{ ଗ୍ରାମ NaOH}$$

$$୧ \text{ ମିଲିର } ୧N \text{ HCl} = ୪୦ / ୧୦୦୦ \text{ ଗ୍ରାମ NaOH}$$

$$୧ \text{ ମିଲି ର } (A)N/10 \text{ HCL} = \frac{୪୦A}{୧୦ \times ୧୦୦୦} \text{ NaOH}$$

$$\{ V_2 - 2(V_2 - V_1) \} \text{ ମିଲି ର "A" N/10 HCl} = \frac{୪୦A \times \{ V_2 - 2(V_2 - V_1) \}}{୧୦୦୦} \text{ ଗ୍ରାମ NaOH} = Y \text{ ଗ୍ରାମ NaOH}$$

ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ଜଳ ନମୁନାରେ ୧୦ ମିଲିରେ X ଗ୍ରାମ NaOH Y ଗ୍ରାମ ଅଛି ।

ତାହେଲେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ଜଳ ନମୁନା ୧୦୦୦ ମିଲିରେ ୧୦୦ Y ଗ୍ରାମ /ଲିଟର NaOH ଅଛି ।

ନିଷ୍କର୍ଷ: ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ଜଳ ନମୁନାରେ ୧୦୦ X ଗ୍ରାମ/ଲିଟର ସୋଡ଼ିୟମ କାର୍ବୋନେଟ (Na₂CO₃) ଏବଂ ୧୦୦ Y ଗ୍ରାମ/ଲିଟର ସୋଡ଼ିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ (NaOH) ଅଛି ।



ପରୀକ୍ଷା - ୨

ପରୀକ୍ଷା ଶୀର୍ଷକ - ୦୨ :-

ଇଥ୍ରିଲିନୀ ତାଲ ଏମିନ ଟେଟ୍ରାଏସିଟିକ୍ ଏସିଡ୍ (EDTA) ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ଜଳର କ୍ଷାରିୟତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ।

ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଉପକରଣ : ବ୍ୟୁରେଟ୍, ପିପେଟ୍, କୋନିକାଲ୍ ଫ୍ଲ୍ୟାସ୍କ, ମାପକ ଫ୍ଲ୍ୟାସ୍କ, ଧୋଇବା ବୋତଲ

ଆବଶ୍ୟକୀୟ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ :

(i) ମାନକ ତିସୋଡିୟମ୍ EDTA ଦ୍ରବଣ

(ii) ଏରିଓକ୍ଲୋମ କଳା-T ସୂଚକ (EBT) [ସୋଡିୟମ୍ -1 (1- ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସି - 2 ନାପଥାଇଲ ଆଜୋ) -6- ନାଇଟ୍ରୋ -2- ନାପଥାଇଲ-4- ସଲଫୋନେଟ୍ (II)]

(iii) ବର୍ମର ଦ୍ରବଣ ($NH_4Cl + NH_4OH$)

ବିଶ୍ଳେଷଣ : କ୍ଷାରିୟତା ହେଉଛି ଜଳର ଗୁଣ, ଯାହା ସାବୁନର ଫେଣ ହେବାର କ୍ଷମତାକୁ ରୋକିଥାଏ । ମୂଳତଃ, ଏହାକୁ ଜଳ ନମୁନାର ସାବୁନର ଗ୍ରହଣ କ୍ଷମତା ଭାବରେ ପରିଭାଷିତ କରାଯାଇଥାଏ । ଜଳର କ୍ଷାରିୟତା ସାଧାରଣତଃ Ca^{2+} , Mg^{2+} ଏବଂ Al^{3+} , Fe^{3+} ଓ Mn^{2+} ପରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାରୀ ଧାତୁ ଆୟନଗୁଡ଼ିକର ଲୁଣ ଉପସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ । କଠିନ ଜଳର ଏକ ମନୁନାମ ଯେତେବେଳେ ସାବୁନ (ଏଲିକ୍ ଏସିଡ୍, ପାମିଟିକ୍ ଏସିଡ୍ କିମ୍ବା ଷ୍ଟେରିକ୍ ଏସିଡ୍ ପରି ଉଚ୍ଚ ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ୍ ସୋଡିୟମ୍ କିମ୍ବା ପୋଟାସିୟମ୍ ଲୁଣ) ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଫେଣ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଅଦ୍ରବଣୀୟ ଧଳା ସ୍କାମ୍ କିମ୍ବା ଅବଶେଷଣ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଯାହାର କୌଣସି ଡିଟରଜେଣ୍ଟ କ୍ରିୟା ନାହିଁ । ଏହା କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଏବଂ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଅଦ୍ରବଣୀୟ ଗୁଣ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ ।

କ୍ଷାରିୟତାର ପ୍ରକାର :

(କ) ଅସ୍ଥାୟୀ କ୍ଷାରିୟତା : ଏହା କ୍ୟାଲସିୟମ୍, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାରୀ ଧାତୁର ଦ୍ରବୀଭୂତ ବାଇକାର୍ବୋନେଟ୍ ଏବଂ ଲୁହାର କାର୍ବୋନେଟ୍ ପରି ଯୌଗିକର ଉପସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ । ଯେତେବେଳେ ବାଇକାର୍ବୋନେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବିଘଟିତ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଜଳ ଫୁଟାଇ ଅଦ୍ରବଣୀୟ କାର୍ବୋନେଟ୍ କିମ୍ବା ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରି ପାତ୍ରର ତଳ ଭାଗରେ ଏକ କୁଣ୍ଡ ଭାବରେ ଜମା ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଅସ୍ଥାୟୀ କ୍ଷାରିୟତାକୁ ଦୂର କରାଯାଇପାରିବ ।

(ଖ) ସ୍ଥାୟୀ କ୍ଷାରିୟତା : ଏହା କ୍ୟାଲସିୟମ୍, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍, ଲୁହା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାରୀ ଧାତୁର ଦ୍ରବୀଭୂତ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଏବଂ ସଲଫେଟ୍ ଉପସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ । ତେଣୁ, ସ୍ଥାୟୀ କ୍ଷାରିୟତା ପାଇଁ ଦାୟୀ ଲବଣଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି $CaCl_2$, $MgCl_2$, $CaSO_4$, $MgSO_4$, $FeSO_4$, $Al_2(SO_4)_3$ ଇତ୍ୟାଦି । ଜଳର କ୍ଷାରିୟତା $CaSO_3$ ର ସମତୁଲ୍ୟ ପରିମାଣ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ । ଜଳର କ୍ଷାରିୟତା ରିପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ $CaSO_3$ କୁ ମାନକ ଭାବରେ ବାଛିବାର କାରଣ ଏହିକି ଯେ, ଏହା ପରିକଳନରେ ସହଜତା ଆଣେ ଓ ଏହାର ଆଣବିକ ଓଜନ (Molecular mass) ଯାହାକି ୧୦୦ ଏବଂ ଏହା ସବୁଠାରୁ ଅଦ୍ରବଣୀୟ ଲୁଣ ଯାହାକୁ ଜଳ ବିଶୋଧକରଣ ରେ ଅବଶେଷିତ କରାଯାଇପାରିବ ।

କ୍ଷାରିୟତାର ଏକକ :

(i) ପ୍ରତି ମିଲିୟନ ଅଂଶ (PPM) : ଏହାକୁ ପ୍ରତି ମିଲିୟନ (10^6) ଅଂଶ ଜଳରେ ଉପସ୍ଥିତ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍ ଓଜନ ଅନୁସାରେ ଅଂଶ ସଂଖ୍ୟା ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ 10^6 ଅଂଶ ଜଳରେ 1 PPM = $CaCO_3$ ସମକକ୍ଷ କ୍ଷାରିୟତା ଏକ ଅଂଶ ।

(ii) ପ୍ରତି ମିଲିଗ୍ରାମ (ମି.ଗ୍ରା/L) : ଏହାକୁ ଏକ ଲିଟର ଜଳରେ ଥିବା ମିଲିଗ୍ରାମ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍ ସଂଖ୍ୟା






ଭାବରେ ପରିଭାଷିତ କରାଯାଏ ।

ଏହା ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ୍ ଯେ ଜଳ ପାଇଁ ୧ ମି.ଗ୍ରା/L = 1 PPM

ନୀତି : EDTA ର ଡାଇସୋଡ଼ିୟମ ଲୁଣ, ଯେତେବେଳେ କ୍ଷାରୀୟ ଜଳ ସହିତ ମିଶେ ଏହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ ଓ କ୍ଷାରୀୟ ମାଧ୍ୟମରେ (PH 8-10) ସମସ୍ତ କ୍ଷାରୀୟ ଗୁଣ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ଯୁକ୍ତ ରାଜକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ । ଅତ୍ୟଧିକ ଏରିଓକ୍ଲୋମର କଳା - T (EBT), ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଦ୍ରବଣକୁ ଡ୍ୱାଇନ୍ ଲାଲରୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ହୋଇଥାଏ । ଯାହା ଟାଇଟ୍ରେସନର ଶେଷ ବିନ୍ଦୁ ।

ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା :

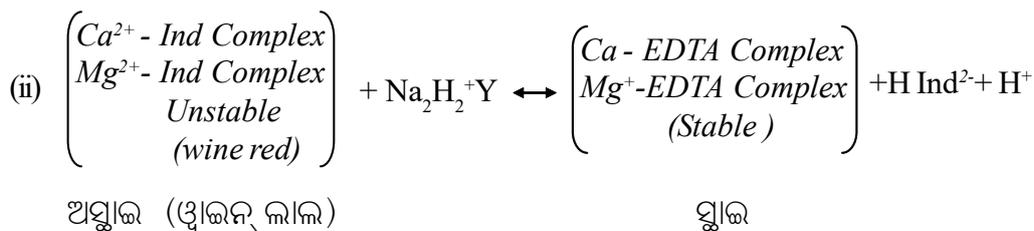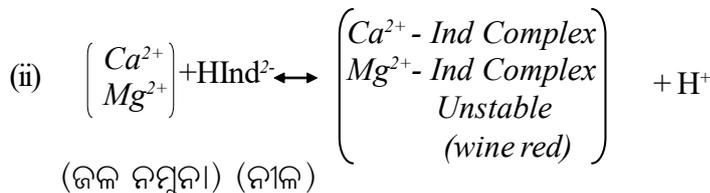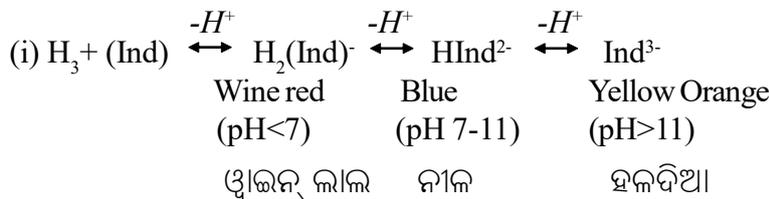

ପ୍ରକ୍ରିୟା :

(୧) ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷାରିୟତାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ :

୧୦୦ ମିଲି କୋନିକାଲ୍ ଫ୍ଲ୍ୟାସ୍କରେ ୨୦ ମିଲି କ୍ଷାରିୟ ଜଳ ନମୁନା ପିପେଟ୍ କରନ୍ତୁ । ୨ ମିଲି ବର୍ଫର ଦ୍ରବଣ ଏବଂ ୨-୩ ବୁନ୍ଦା ଏରିଓକ୍ଲୋମର କଳା - T ସୂଚକ ରୂପେ ମିଶାନ୍ତୁ । ତା'ପରେ ବ୍ୟୁରେଟ୍ରେ ଥିବା M/100 EDTA ଦ୍ରବଣ ସହିତ କୋନିକାଲ୍ ଫ୍ଲ୍ୟାସ୍କର ଦ୍ରବଣକୁ ଟାଇଟ୍ରେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଶେଷ ବିନ୍ଦୁରେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଙ୍ଗ ଡ୍ୱାଇନ୍ ଲାଲରୁ ନୀଳ ରଙ୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନହୁଏ, ଏହି ମାନକ ଆପଣ ସମନ୍ୱିତ ପାଠ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାଇଟ୍ରେଟ୍ ମୂଲ୍ୟକୁ ଧାନ ଦିଅନ୍ତୁ । ଆୟତନ $V_2 ml$ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ।



ସାରଣୀ ୧ :

ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ସଂଖ୍ୟା	ଯୋଗାଣ ହୋଇଥିବା ଜଳ ନମୁନା ପରିମାଣ (ମିଲି)	ବ୍ୟୁରେଟ୍ ପଠନ (ମିଲି)		ପାର୍ଥକ୍ୟ (ମିଲିରେ)	ମନ୍ତବ୍ୟ
		ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବ୍ୟୁରେଟ୍ ପଠନମୂଲ୍ୟ (IBR)	ଅନ୍ତିମ ବ୍ୟୁରେଟ୍ ପଠନମୂଲ୍ୟ (FBR)		
୦୧					ପାଖାପାଖି
୦୨					ସଂଗତ
୦୩					
୦୪					

(ii) ଅସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ କ୍ଷାରିୟତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ : ଏକ ବଡ଼ ବିକରରେ ୨୫୦ ମିଲି କ୍ଷାରୀୟ ଜଳ ନମୁନା ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରାୟ ୧ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୀରେ ଫୁଟାଇ (ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ବାଇକାର୍ବୋନେଟ୍ ଅଦ୍ରବଣୀୟ $\text{CaCO}_3 + \text{Mg}(\text{OH})_2$ ରେ ବିଘଟିତ ନ ହୁଏ) । ପତ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଏକ ୨୫୦ ମିଲି ମାପକ ଫ୍ଲ୍ୟାସ୍କରେ ଛାଣି ଦିଅନ୍ତୁ । ଏହି ଦ୍ରବଣର ୫୦ ମିଲି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଉପରୋକ୍ତ ପରି ସମାନ ଭାବରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ । ବ୍ୟବହୃତ EDTA ର ଆୟତନ ଜଳ ନମୁନାରେ ସ୍ଥାୟୀ କ୍ଷାରିୟତା ସହିତ ସମାନ । ଆୟତନ V_3 ମିଲି ହେବ ।

ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷାରିୟତାକୁ ସ୍ଥାୟୀ କ୍ଷାରିୟତାକୁ ବିୟୋଗ କରି ଅସ୍ଥାୟୀ କ୍ଷାରିୟତା ପରିକଳନ : କରାଯାଏ ।

ସାରଣୀ ୨ :

ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ସଂଖ୍ୟା	ଯୋଗାଣ ହୋଇଥିବା ଜଳ ନମୁନାର ପରିମାଣ (ମିଲି)	ବ୍ୟୁରେଟ୍ ପଠନ (ମିଲି)		ପାର୍ଥକ୍ୟ (ମିଲିରେ)	ମନ୍ତବ୍ୟ
		ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବ୍ୟୁରେଟ୍ ପଠନମୂଲ୍ୟ (IBR)	ଅନ୍ତିମ ବ୍ୟୁରେଟ୍ ପଠନମୂଲ୍ୟ (FBR)		
୦୧					ପାଖାପାଖି
୦୨					ସଂଗତ
୦୩					
୦୪					



ପରିକଳନ :

ମୋଟ କ୍ଷାରିୟତା :

୧୦୦୦ ମିଲି ୧M EDTA = ୧୦୦ ଗ୍ରାମ CaCO_3

୧ ମିଲିର ୧M EDTA = ୧୦୦ ମିଗ୍ରା CaCO_3

୧ ମିଲି ର “a” M/100 EDTA = “a” ମିଗ୍ରା CaCO_3

V_2 ml “a” M/100 EDTA = “a” V_2 ମିଗ୍ରା CaCO_3 = CaCO_3 ର “A” ମିଗ୍ରା

ଏବେ ୪୦ ମିଲି ଜଳ ନମୁନାରେ = “A” ମିଗ୍ରା CaCO_3 ଅଛି ।

୧୦୦୦ ମିଲି କିମ୍ବା ୧ ଲିଟର ଜଳ ନମୁନାରେ = $\frac{A}{40} \times 1000 = 9.8 A$ ମିଗ୍ରା / ଲିଟର 9.8 “A” ପିପିଏମ୍ ମୋଟ କ୍ଷାରିୟତା ଯାହାକି CaCO_3 ର ସମ କ୍ଷାରୀୟତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରହିଛି ।

ସ୍ଥାୟୀ କ୍ଷାରିୟତା :

୧ ମିଲି ର “a” M/100 EDTA = “a” ମିଗ୍ରା CaCO_3

V_3 ml “a” M/100 EDTA = “a” V_3 ମିଗ୍ରା CaCO_3 = CaCO_3 ର “B” ମିଗ୍ରା

ଏବେ ୪୦ ମିଲି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳ ନମୁନାରେ = “B” ମିଗ୍ରା CaCO_3

୧୦୦୦ ମିଲି କିମ୍ବା ୧ ଲିଟର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳ ନମୁନାରେ = $\frac{B}{40} \times 1000 = 9.8 B$ ମିଗ୍ରା / ଲିଟର

= 9.8 “B” ପିପିଏମ୍ କ୍ଷାରିୟତା ଯାହାକି CaCO_3 ର ସମ କ୍ଷାରୀୟତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରହିଛି ।

ତେଣୁ ଅସ୍ଥାୟୀ କ୍ଷାରିୟତା (25A-25B) ପିପିଏମ୍ ସହିତ ସମାନ ଯାହାକି CaCO_3 ର ମାନକ କ୍ଷାରୀୟତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରହିଛି ।

ନିଷ୍ପତ୍ତି : ଯୋଗାଣ ହୋଇଥିବା ଜଳ ନମୁନାରେ ମୋଟ କ୍ଷାରିୟତା 25A ppm, ସ୍ଥାୟୀ କ୍ଷାରିୟତା 25B ppm ଏବଂ (25A-25B) ppm ଅସ୍ଥାୟୀ କ୍ଷାରିୟତା ରହିଛି ଯାହାକି CaCO_3 ର ସମ କ୍ଷାରୀୟତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରହିଛି ।



ପରୀକ୍ଷଣ - ୩


ପରୀକ୍ଷଣର ଶୀର୍ଷକ : ଅକ୍ସାଲିକ୍ ଏସିଡ୍ (Acid) ବ୍ୟବହାର କରି ପୋଟାସିୟମ୍ ପର୍ମାଙ୍ଗାନେଟ୍ (KMnO_4) ର ମାନମାନକରଣ (Standardisation)

ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଉପକରଣ : ବ୍ୟୁରେଟ୍, ପିପେଟ୍, କୋନିକାଲ୍ ଫ୍ଲ୍ୟାସ୍କ

ଆବଶ୍ୟକୀୟ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ : KMnO_4 ଦ୍ରବଣ, ଅକ୍ସାଲିକ୍ ଏସିଡ୍ (N/10), ଦ୍ରବୀଭୂତ ଗନ୍ଧକାମ୍ଳ (DilH_2SO_4)

ବିଶ୍ଳେଷଣ : ପୋଟାସିୟମ୍ ପର୍ମାଙ୍ଗାନେଟ୍ ଏକ ଦ୍ୱିତୀୟକ ଦ୍ରବଣ (secondary solution) କାରଣ ଏଥିରେ ମାଙ୍ଗାନିଜ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ର ଅଶୁଦ୍ଧତା ଥାଏ, ଯାହା ପୋଟାସିୟମ୍ ପର୍ମାଙ୍ଗାନେଟ୍ କୁ ବିଘଟିତ କରେ । ଫଳସ୍ୱରୂପ, ପୋଟାସିୟମ୍ ପର୍ମାଙ୍ଗାନେଟ୍ ର ମାନକକ୍ଷମତା (strength)ର ଶକ୍ତି ଅଧିକ ସମୟ କିମ୍ବା କାଳ ପାଇଁ ସ୍ଥିର ରହେ ନାହିଁ । ତେଣୁ, ପର୍ମାଙ୍ଗାନେଟ୍ ଦ୍ରବଣର ଶକ୍ତି ଏହାର ବ୍ୟବହାର ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ । ପୋଟାସିୟମ୍ ପର୍ମାଙ୍ଗାନେଟ୍ ଅମ୍ଳୀୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଜାରକ (oxidising agent) ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ତେଣୁ ଏହାକୁ ସଲଫ୍ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଉପସ୍ଥିତିରେ $20 - 30^\circ\text{C}$ ରେ ମାନକ ଅକ୍ସାଲିକ୍ ଏସିଡ୍ ପରି ଏକ ବିଜାରକ (reducing agent) ବିରୁଦ୍ଧରେ ଟାଇଟ୍ରେଟ୍ କରାଯାଇପାରିବ । ଟାଇଟ୍ରେସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ C-C ସହଭାଜକ ବନ୍ଧନକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଅକ୍ସାଲିକ୍ ଏସିଡ୍ କୁ ଗରମ କରାଯାଏ । ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସମୟରେ MnO_4^- କୁ Mn^{2+} କୁ ବିଜାରିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଅକ୍ସାଲେଟ୍ ଆୟନଗୁଡ଼ିକ CO_2 କୁ ଜାରିତ ହୁଏ । ଏହି ଟାଇଟ୍ରେସନ୍ରେ, ପୋଟାସିୟମ୍ ପର୍ମାଙ୍ଗାନେଟ୍ ଏକ ସ୍ୱୟଂ-ସୂଚକ (self-indicator) ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ କାରଣ ଏହାର ଅକ୍ସିଡେସନ୍ ମୂଲ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର କ୍ଷମତା ଅଛି (Mn^{7+} ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗର ଏବଂ Mn^{2+} ଜଳ ମାଧ୍ୟମରେ ରଙ୍ଗହୀନ) । ଟାଇଟ୍ରେସନ୍ ସମୟରେ ପୋଟାସିୟମ୍ ପର୍ମାଙ୍ଗାନେଟ୍, ଅକ୍ସାଲିକ୍ ଏସିଡ୍ ଦ୍ୱାରା ବିଜାରିତ ହୋଇ ରଙ୍ଗହୀନ ମାଙ୍ଗାନାସ୍ ଆୟନରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଏ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିଜାରକ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ସେତେବେଳେ, KMnO_4 ର ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ଅତିରିକ୍ତ ବୁଦ୍ଧା ଦ୍ରବଣକୁ ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିଥାଏ, ଯାହା ଟାଇଟ୍ରେସନ୍ର ଶେଷ ବିନ୍ଦୁ ।

ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା :
$$[\text{MnO}_4^- + 8\text{H}^+ + 5\text{e} \rightarrow \text{Mn}^{2+} + 4\text{H}_2\text{O}] \times 2$$

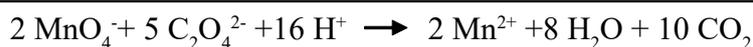

ପ୍ରକ୍ରିୟା :

୨୫୦ ମିଲି କୋନିକାଲ୍ ଫ୍ଲ୍ୟାସ୍କରେ ୧୦ ମିଲି N/10 ଅକ୍ସାଲିକ୍ ଏସିଡ୍ ପିପେଟ୍ କରନ୍ତୁ । ଅଧା ଟେଣ୍ଟସ୍ୟୁଏର୍ ଦ୍ରବୀଭୂତ ସଲଫ୍ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଯୋଡ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ $30 - 35^\circ$ ସେଲସିୟସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗରମ କରନ୍ତୁ । ତାପରେ, ଦ୍ରବଣକୁ ସ୍ଥାୟୀ ହାଲୁକା ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ KMnO_4 ଦ୍ରବଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଟାଇଟ୍ରେଟ୍ କରନ୍ତୁ । ସଂଗତ ପାଠ୍ୟ ପ୍ରାୟ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାଇଟ୍ରେସନ୍ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରନ୍ତୁ ।



ସାରଣୀ :

ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ସଂଖ୍ୟା	N/10 ଅକ୍ସାଲିକ୍ ଅମ୍ଳର ଆୟତନ	ବ୍ୟୁରେଟ୍ ପଠନ (ମିଲି)		ପାର୍ଥକ୍ୟ (ମିଲିରେ)	ମନ୍ତବ୍ୟ
		ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବ୍ୟୁରେଟ୍ ପଠନମୂଲ୍ୟ (IBR)	ଅନ୍ତିମ ବ୍ୟୁରେଟ୍ ପଠନମୂଲ୍ୟ (FBR)		
୦୧					ପାଖାପାଖି
୦୨					ସଂଗତ
୦୩					
୦୪					

ପରିକଳନ :

$$S_1 V_1 = S_2 V_2$$

ଯେଉଁଠାରେ, ଅକ୍ସାଲିକ୍ ଏସିଡ୍ (N/10) ର ମାନକକ୍ଷମତା ଶକ୍ତି

V_1 = ଅକ୍ସାଲିକ୍ ଅମ୍ଳର, ପରିମାଣ (୧୦ ମିଲି)

S_2 = $KMnO_4$ ର ମାନକକ୍ଷମତା ଶକ୍ତି

V_2 = $KMnO_4$ ର ପରିମାଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି

$$S_2 = \frac{S_1 \times V_1}{V_2}$$

ନିଷ୍ପତ୍ତି : ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ପୋଟାସିୟମ୍ ପରମାଙ୍ଗାନେଟ୍ ର ମାନକକ୍ଷମତା ଶକ୍ତିN ।



ପରୀକ୍ଷଣ - ୪


ପରୀକ୍ଷଣର ଶୀର୍ଷକ : ମାନକିକୃତ ପୋଟାସିୟମ୍ ପରମାଙ୍ଗାନେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ମୋହର ଲୁଣରେ ଫେରସ୍ ଆୟନ୍ (ଲୋହ) $[FeSO_4 (NH_4)_2 SO_4 \cdot 6H_2O]$ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ।

ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଉପକରଣ : ବ୍ୟୁରେଟ୍, ପିପେଟ୍, କୋନିକାଲ୍ ଫ୍ଲ୍ୟାସ୍କ, ବିକର, ମାପକ ସିଲିଣ୍ଡର, ଧୋଇବା ବୋତଲ, ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ୍ ।

ଆବଶ୍ୟକୀୟ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ : (i) ମୋହରର ଲୁଣ ଦ୍ରବଣ, (ii) $KMnO_4$ ଦ୍ରବଣ, (iii) ଦ୍ରବୀଭୂତ H_2SO_4

ବିଶ୍ଳେଷଣ : ମୋହରର ଲୁଣ ଦ୍ରବଣରେ ଥିବା ଫେରସ୍ ଆୟନ୍‌ର ପରିମାଣ ଅମ୍ଳୀୟ ମାଧ୍ୟମରେ ପୋଟାସିୟମ୍ ପରମାଙ୍ଗାନେଟ୍ ଦ୍ରବଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଟାଇଟ୍ରେଟିଂ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ । ଏଠାରେ, ପୋଟାସିୟମ୍ ପରମାଙ୍ଗାନେଟ୍ ଏକ ସ୍ୱୟଂ-ସୂଚକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ । ସ୍ଥାୟୀ ହାଲୁକା ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗ ଦେଖାଯିବା ଦ୍ୱାରା ଶେଷ ବିନ୍ଦୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ । ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସମୟରେ Fe^{2+} ଜାରିତ ହୋଇ Fe^{3+} କୁ ଏବଂ MnO_4^- ବିଜରିତ ହୋଇ Mn^{2+} କୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ଥାଏ ।

ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା :

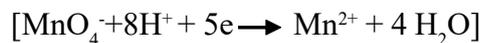

ପ୍ରକ୍ରିୟା :

ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ମୋହର ଲୁଣ ଦ୍ରବଣର ୧୦ ମିଲି ପିପେଟ୍ କରି ଏକ ୨୫୦ ମିଲି କୋନିକାଲ୍ ଫ୍ଲ୍ୟାସ୍କରେ ରଖନ୍ତୁ । ଦ୍ରବୀଭୂତ ସଲଫ୍ୟୁରିକ୍ ଅମ୍ଳର, ଅଧା ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ୍ ଯୋଡନ୍ତୁ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ହାଲୁକା ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ $KMnO_4$ ଦ୍ରବଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଟାଇଟ୍ରେଟ୍ କରନ୍ତୁ । ସଂଗତ ପାଠ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାଇଟ୍ରେସନ୍ ପୁନଃରାବୃତ୍ତି କରନ୍ତୁ ।



ସାରଣୀ :

ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ସଂଖ୍ୟା	ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ମୋହର ଲୁଗା ଦ୍ରବଣର ପରିମାଣ	ବ୍ୟୁରେଟ୍ ପଠନ (ମିଲି)		ପାର୍ଥକ୍ୟ (ମିଲିରେ)	ମନ୍ତବ୍ୟ
		ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବ୍ୟୁରେଟ୍ ପଠନମୂଲ୍ୟ (IBR)	ଅନ୍ତିମ ବ୍ୟୁରେଟ୍ ପଠନମୂଲ୍ୟ (FBR)		
୦୧					ପାଖାପାଖି
୦୨					ସଂଗତ
୦୩					
୦୪					

ପରିକଳନ :

ମୋହରର ଲୁଗା ଦ୍ରବଣ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ KMnO_4 ଆୟତନ = V ml

୧୦୦୦ ମିଲି ୧ N KMnO_4 = ୫୫.୮୪ ଗ୍ରା.ମ Fe

$$୧ \text{ ମିଲି } ୧ = \text{KMnO}_4 \frac{୫୫.୮୪}{୧୦୦୦} \text{ Fe ର ଗ୍ରା.ମ}$$

$$\frac{X}{୧୦} \text{ KMnO}_4 \text{ ର } V \text{ ml} = \frac{୫୫.୮୪}{୧୦୦୦} \times V \times \frac{X}{୧୦} \text{ ଗ୍ରା.ମ Fe} = \text{“A” ଗ୍ରା.ମ Fe}$$

ତେଣୁ ୧୦ ମିଲି ମୋହର ଲୁଗା ଦ୍ରବଣରେ “A” ଗ୍ରା.ମ Fe ଥାଏ ।

୧୦୦୦ ମିଲି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ମୋହର ଲୁଗା ଦ୍ରବଣରେ ୧୦୦ A ଗ୍ରା.ମ./ଲିଟର Fe ଥାଏ ।

ନିଷ୍ପତ୍ତି : ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ମୋହର ଲୁଗା ଦ୍ରବଣରେ ଗ୍ରା.ମ./ଲିଟର Fe ଥାଏ ।



ପରୀକ୍ଷା - ୫


ପରୀକ୍ଷାର ଶୀର୍ଷକ : ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ଜଳ ନମୁନାରେ ଦ୍ରବିତ ଅମ୍ଳଜାନର ପରିମାଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ।

ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଉପକରଣ : ବ୍ୟୁରେଟ୍, ଷ୍ଟପର ବୋତଲ (୫୦୦ ମିଲି), ମାପକ ସିଲିଣ୍ଡର (୨୫୦ ମିଲି), ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ୍ ।

ଆବଶ୍ୟକୀୟ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ : (i) ମାଙ୍ଗାନସ୍ ସଲଫେଟ୍ ଦ୍ରବଣ (୪୮%), (ii) ଆଲକାଲାଇନ୍ ପୋଟାସିୟମ୍ ଆୟୋଡାଇଡ୍ ଦ୍ରବଣ, (iii) ଦ୍ରବୀଭୂତ ସଲଫ୍ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍, (iv) ମାନକ ସୋଡିୟମ୍ ଆୟୋସଲଫେଟ୍ ଦ୍ରବଣ ଏବଂ (v) ସଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଷ୍ଟାର୍ଟ୍ ଦ୍ରବଣ ।

ବିଶ୍ଳେଷଣ : ଦ୍ରବୀଭୂତ ଅମ୍ଳଜାନ ହେଉଛି ଜଳ ଗୁଣବତ୍ତାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିମାପକ । ଏହା ଜଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ଜୈବ ପଦାର୍ଥର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାରକ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଅମ୍ଳଜାନର ପରିମାଣ । ସାଧାରଣତଃ କୋଠରି ତାପମାତ୍ରାରେ ପ୍ରତି ଲିଟର ଜଳରେ ପ୍ରାୟ ୮ ମିଲି ଦ୍ରବୀଭୂତ ଅମ୍ଳଜାନ ଥାଏ । ଦ୍ରବୀଭୂତ ଅମ୍ଳଜାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଉତ୍ତମ ଉପକରଣ ପାଇଁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ କାରଣ ଏହା ଉପକରଣକୁ କ୍ଷୟ ଘଟାଇଥାଏ । ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ଅମ୍ଳଜାନ ଡ୍ରିଙ୍କିଙ୍ଗ୍ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ । ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ଅମ୍ଳଜାନ ଦ୍ୱାରା ପୋଟାସିୟମ୍ ଆୟୋଡାଇଡ୍ 'ଜାରଣ' ପ୍ରକ୍ରିୟା (oxidation process) ଉପରେ ଆଧାରିତ । ଆୟୋଡୋମେଟ୍ରିକ୍ ପଦ୍ଧତି (ଡ୍ରିଙ୍କିଙ୍ଗ୍) ଏହି ତଥ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଯେ କ୍ଷାରୀୟ ମାଧ୍ୟମରେ, ଦ୍ରବୀଭୂତ ଅମ୍ଳଜାନ Mn^{2+} ରୁ Mn^{4+} କୁ ଜାରିତ କରେ, ଯାହା ଅମ୍ଳୀୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆୟୋଡାଇଡ୍ କୁ ମୁକ୍ତ ଆୟୋଡିନରେ ଜାରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ଆୟୋଡିନର ପରିମାଣକୁ ମାନକ ସୋଡିୟମ୍ ଆୟୋସଲଫେଟ୍ ଦ୍ରବଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଶୋଧନ କରାଯାଏ ।

ଯେହେତୁ ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ଅମ୍ଳଜାନ ଆଣବିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ ତେଣୁ ଏହା ପୋଟାସିୟମ୍ ଆୟୋଡାଇଡ୍ ଦ୍ରବଣ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୁଏ ନାହିଁ, ତେଣୁ ପୋଟାସିୟମ୍ ଆୟୋଡାଇଡ୍ (KI) ଏବଂ ଅମ୍ଳଜାନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆଣିବା ପାଇଁ ଅମ୍ଳଜାନ ବାହକ (ଯେପରିକି ମାଙ୍ଗାନସ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍) ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ।

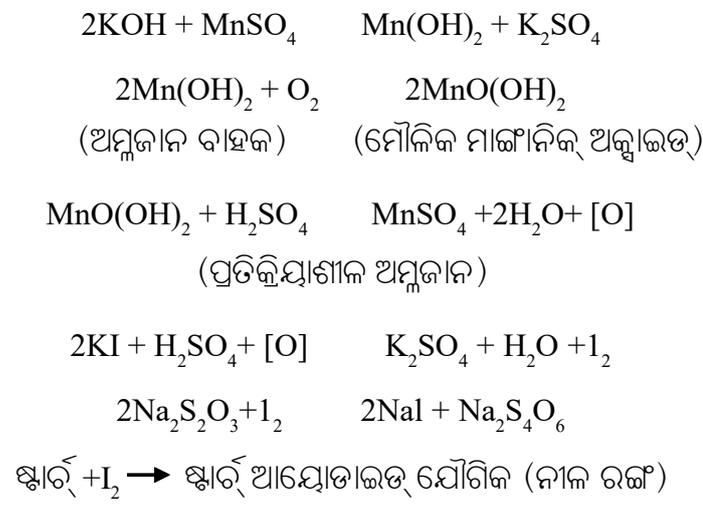



ପ୍ରକ୍ରିୟା :

ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ଜଳ ନମୁନାର ୫୦୦ ମିଲି ନିଅ । ଉପରେ ପ୍ରାୟ ୧୦ ମିଲି ଖାଲିସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ୨୫୦ ମିଲି ଜଳ ନମୁନା ବନ୍ଧ ବୋତଲରେ ନିଅନ୍ତୁ । (ଯେତେଦୂର ସମ୍ଭବ ବାୟୁ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବାକୁ ଏଡ଼ାଇବା) । ତୁରନ୍ତ ୧ ମିଲି ମାଙ୍ଗାନସ୍ ସଲଫେଟ୍ ଦ୍ରବଣ ଏବଂ ତା’ପରେ ୧ ମିଲି କ୍ଷାରୀୟ ପୋଟାସିୟମ୍ ଆୟୋଡାଇଡ୍ ଦ୍ରବଣକୁ ପିପେଟ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ମିଶାନ୍ତୁ, ଯଦୁ ନିଅନ୍ତୁ ଯେ ଦ୍ରବଣଟି ଜଳର ପୃଷ୍ଠ ତଳେ ଭଲ ଭାବରେ ବିତରଣ ହୁଏ । (କ୍ଷାରୀୟ ଦ୍ରବଣରେ KI ସୋଡ଼ିୟମ୍ ଆଇଡାଇଡ୍ ଥାଏ, ଯାହା ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଯେକୌଣସି ଜାରକର ଯଦୁ ନିଏ, ଯାହା ପୋଟାସିୟମ୍ ଆୟୋଡାଇଡ୍ (KI) ରୁ ଆୟୋଡିନ୍ ମୁକ୍ତ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ) । ତା’ପରେ ମିଶ୍ରଣର ସଠିକତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ବୋତଲକୁ ଅନେକ ଥର ତଳ-ଉପର କରିବା ଏବଂ ଗଠିତ ଅବଶେଷକୁ (precipitate) କିଛି ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ସ୍ଥିର ହେବାକୁ ଦିଆଯାଏ । ତା’ପରେ ୩ ମିଲି ଦ୍ରବୀଭୂତ H_2SO_4 ର ଦ୍ରବଣକୁ ବୁନ୍ଦା ବୁନ୍ଦା କରି ମିଶାଯାଏ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବଶେଷ ଦ୍ରବୀଭୂତ ନହୁଏ, ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଦ୍ରବଣ ପ୍ରଦାନ କରେ । ଆଲମାରା ଭିତରେ ୫ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଦ୍ରବଣକୁ ଅନ୍ଧାରରେ ରଖନ୍ତୁ । ତା’ପରେ, ୪୦ ମିଲି ଦ୍ରବଣକୁ ପିପେଟ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବହୁତ ବ୍ୟୁବେକ୍ଟରୁ ମାନକ (standard) ସୋଡ଼ିୟମ୍ ଥିଓସଲଫେଟ୍ ଦ୍ରବଣ ସହିତ ଏହାକୁ ଟାଇଟ୍ରେଟ୍ କରନ୍ତୁ । ଯେତେବେଳେ ଦ୍ରବଣର ରଙ୍ଗ ବହୁତ ହାଲୁକା ହଳଦିଆ (ନଡ଼ା ପରି ରଙ୍ଗ) ହୋଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ୧ ମିଲି ସଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଷ୍ଟାର୍ଟ ସୂଚକ ମିଶାନ୍ତୁ ଏବଂ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାଇଟ୍ରେସନ୍ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ ।

ସାରଣୀ :

ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ସଂଖ୍ୟା	ଜଳ ନମୁନାର ଆୟତନ (ମିଲି)	ବ୍ୟୁବେକ୍ଟ ପଠନ (ମିଲି)		ପାର୍ଥକ୍ୟ (ମିଲିରେ)	ମନ୍ତବ୍ୟ
		ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବ୍ୟୁବେକ୍ଟ ପଠନମୂଲ୍ୟ (IBR)	ଅନ୍ତିମ ବ୍ୟୁବେକ୍ଟ ପଠନମୂଲ୍ୟ (FBR)		
୦୧					ପାଖାପାଖି
୦୨					ସଂଗତ
୦୩					
୦୪					



ପରିକଳନ :

୧୦୦୦ ମିଲି ୧ N $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ ଦ୍ରବଣ = ୮ ଗ୍ରାମ ଅମ୍ଳଜାନ

୧ ମିଲି ୧ N $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ ଦ୍ରବଣ = ୮ ମି.ଗ୍ରାମ ଅମ୍ଳଜାନ

V ମିଲି “a N/10” $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ ଦ୍ରବଣ = $\frac{8aV}{10}$ ଅମ୍ଳଜାନର ମି.ଗ୍ରା.

୪୦ ମିଲି ଜଳରେ = $\frac{8aV}{10}$ ଗ୍ରା.ମ ମି.ଗ୍ରାମ ଅମ୍ଳଜାନ ଥାଏ ।

୧୦୦୦ ମିଲି ଜଳରେ $\frac{8YZ}{10} \times \frac{୧୦୦୦}{୪୦}$ ମି.ଗ୍ରାମ/ଲିଟର ଅମ୍ଳଜାନ ଥାଏ

= “A” ମି.ଗ୍ରାମ/ଲିଟର ଅମ୍ଳଜାନ

= ଅମ୍ଳଜାନର “A” ppm

ନିଷ୍ପତ୍ତି : ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ଜଳ ନମୁନାରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ଅମ୍ଳଜାନର ପରିମାଣ..... ppm



ପରୀକ୍ଷା - ୭

ପରୀକ୍ଷାର ଶୀର୍ଷକ : ଯୋଗାଣ ହୋଇଥିବା କ୍ଲୋରିନ୍ ପାଉଡରରେ ଉପଲବ୍ଧ କ୍ଲୋରିନର ପ୍ରତିଶତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ।

ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଉପକରଣ : ବ୍ୟୁରେଟ୍, ବ୍ୟୁରେଟ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ପିପେଟ୍, କୋନିକାଲର୍ ଫ୍ଲାସ୍କ, କାଚ ପାତ୍ର, ମାପ ସିଲିଣ୍ଡର, ଧୋଇବା ବୋତଲ ।

ଆବଶ୍ୟକୀୟ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ : କ୍ଲୋରିନ୍ ପାଉଡର ଦ୍ରବଣ KI (୧୦%) ଦ୍ରବଣ, ଦ୍ରବୀୟ (dilute) ଆସେଟିକ୍ ଏସିଡ୍, N/୧୦ ସୋଡିୟମ୍ ଆଉସଲଫେଟ୍ ଦ୍ରବଣ, ଷ୍ଟାର୍ଚ୍ଚ ସୂଚକ ।

ବିଶ୍ଳେଷଣ : କ୍ଲୋରିନ୍ ପାଉଡର ଏକ ଭଲ ଜୀବାଣୁନାଶକ ଯାହା ଜଳରେ ମିଶି ରୋଗ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ଜୀବାଣୁକୁ ମାରିଥାଏ । କ୍ଲୋରିନ୍ ପାଉଡରର ଜୀବାଣୁନାଶକ କାର୍ଯ୍ୟ ହାଇପୋକ୍ଲୋରସ୍ ଅମ୍ଳ (HOCL) ଏବଂ ନିର୍ଗତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ (nascent) ଅମ୍ଳଜାନ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ । ଏହା ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଜାରକ (oxidizing agent) ଏବଂ ହାଇଗ୍ରୋସ୍କୋପିକ୍ (ପରିବେଶରେ ଥିବା ଆର୍ଦ୍ରତା ଶୋଷଣ କରିବାର କ୍ଷମତା) ପ୍ରକୃତିର ଅଟେ ।


କ୍ଲୋରିନ୍ ପାଉଡରର ଗୁଣବତ୍ତା ଏଥିରେ ଥିବା କ୍ଲୋରିନର ପରିମାଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ । ଉପଲବ୍ଧ କ୍ଲୋରିନର ପ୍ରତିଶତକୁ ପ୍ରତି ଶହେ ଅଂଶ କ୍ଲୋରିନ୍ ପାଉଡରରେ ଜାରଣ (ଅକ୍ସିଡେସନ) ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ କ୍ଲୋରିନର ପରିମାଣ ଭାବରେ ପରିଭାଷିତ କରାଯାଇପାରେ । ତେଣୁ, ଉପଲବ୍ଧ କ୍ଲୋରିନର ପ୍ରତିଶତ ଯେତେ ଅଧିକ, କ୍ଲୋରିନ୍ ପାଉଡରର ଗୁଣବତ୍ତା ସେତେ ଭଲ । ଯଦିଓ କ୍ଲୋରିନ୍ ପାଉଡରରେ ପ୍ରାୟ ୫-୭% କ୍ଲୋରିନ୍ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ଏକ ଭଲ ଗୁଣବତ୍ତା କ୍ଲୋରିନ୍ ପାଉଡରରେ ଉପଲବ୍ଧ କ୍ଲୋରିନର କେବଳ ୩୫-୩୮% ଥାଏ । କାରଣ ରଖା ହୋଇଥିବା କ୍ଲୋରିନ୍ ପାଉଡର ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଘଟନ ହୁଏ ଏବଂ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଏବଂ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ କ୍ଲୋରେଟ୍ରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୁଏ । ତେଣୁ ସମୟ ବିତିବା ସହିତ ଉପଲବ୍ଧ କ୍ଲୋରିନର ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଏ ।



ନିତି :

ଜଳରେ ମୁକ୍ତ ହେଉଥିବା କ୍ଲୋରିନ୍, KI ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ଆୟୋଡିନ୍ ରୂପରେ ମୁକ୍ତ ହୁଏ । ଏହି ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ଆୟୋଡିନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଚ୍ଚକୁ ସୂଚକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରି ସୋଡିୟମ୍ ଆୟୋସଲଫେଟ୍‌ର ଏକ ମାନକ (standard) ଦ୍ରବଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଟାଇଟ୍ରେଟ୍ କରାଯାଏ ।

ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା :

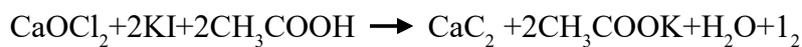



ପ୍ରକ୍ରିୟା :

୨୫୦ ମିଲି କୋନିକାଲ୍ ଫ୍ଲାସ୍‌ରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡର ଦ୍ରବଣର ୧୦ ମିଲି ପିପେଟ୍ କରନ୍ତୁ । ୧୫ ମିଲି ୧୦% KI ଦ୍ରବଣ ଏବଂ ୧୦ ମିଲି ଦ୍ରବୀୟ (diluted) ଆସେଟିକ୍ ଏସିଡ୍ ଦ୍ରବଣ ମିଶାନ୍ତୁ । କୋନିକାଲ୍ ଫ୍ଲାସ୍‌କୁ ଡ୍ରାପ୍ ଗ୍ଲାସ୍ ସହିତ ଘୋଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ଧାରରେ ୩୦ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ରଖନ୍ତୁ । ୩୦ ମିନିଟ୍ ପରେ ମୁକ୍ତ ଆୟୋଡିନ୍ କୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହାଇପୋ (hypo) ଦ୍ରବଣ ସହିତ ଟାଇଟ୍ରେଟ୍ କରନ୍ତୁ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ହାଲୋଜିନ୍ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ଆସିବ । ୨ ରୁ ୩ ବୁନ୍ଦା ଷ୍ଟାର୍ଟ ସୂଚକ ମିଶାନ୍ତୁ ଏବଂ ରଙ୍ଗହୀନ ଦ୍ରବଣ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାଇଟ୍ରେସନ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ହେଉଛି ଶେଷ ବିନ୍ଦୁ । ଟାଇଟ୍ରେଟ୍ ମୂଲ୍ୟକୁ ଧାନ ଦିଅନ୍ତୁ । ସଂଗତ ମୂଲ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଉପରୋକ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତିନି ଥର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରନ୍ତୁ ।

ସାରଣୀ :

ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ସଂଖ୍ୟା	ଦିଆଯାଇଥିବା CaOCl_2 ଦ୍ରବଣର ଆୟତନ (ମିଲି)	ବ୍ୟୁରେଟ୍ ପଠନ (ମିଲି)		ପାର୍ଥକ୍ୟ (ମିଲିରେ)	ମନ୍ତବ୍ୟ
		ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବ୍ୟୁରେଟ୍ ପଠନମୂଲ୍ୟ (IBR)	ଅନ୍ତିମ ବ୍ୟୁରେଟ୍ ପଠନମୂଲ୍ୟ (FBR)		
୦୧					ପାଖାପାଖି
୦୨					ସଂଗତ
୦୩					
୦୪					

ପରିକଳନ :

ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡର ଦ୍ରବଣର ସାନ୍ଦ୍ରତା = ୧୦ ଗ୍ରାମ / ଲିଟର

ଟାଇଟ୍ରେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ = X ମିଲି

ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ :

୧୦୦୦ ମିଲି ୧ N $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ = ୩୫.୫ ଗ୍ରାମ କ୍ଲୋରିନ୍

୧ ମିଲି ୧ N $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ ଦ୍ରବଣ = ୦.୦୩୫ ଗ୍ରାମ କ୍ଲୋରିନ୍

୧ ମିଲି "a N/10" $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ = ୦.୦୩୫ a ଗ୍ରାମ କ୍ଲୋରିନ୍

X ମିଲି "a N/10" $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ = ୦.୦୩୫ aX ମି.ଗ୍ରାମ କ୍ଲୋରିନ୍



ଏବେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ୧୦ ମିଲି ବ୍ଲୁଟିଂ ପାଉଡର ଦ୍ରବଣରେ ୦.୦୦୩୫ aX ଗ୍ରାମ କ୍ଲୋରିନ୍ ଅଛି ।

ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ୧୦୦୦ ମିଲି ବ୍ଲୁଟିଂ ପାଉଡର ଦ୍ରବଣରେ (୦.୦୦୩୫ aX ୧୦୦୦) / ୨୫ = A ଗ୍ରାମ କ୍ଲୋରିନ୍ ଥାଏ ।

ଉପଲବ୍ଧ କ୍ଲୋରିନ୍ % :

୧୦ ଗ୍ରାମ CaOCl_2 ଦ୍ରବଣରେ A ଗ୍ରାମ ଉପଲବ୍ଧ କ୍ଲୋରିନ୍ ଅଛି

୧୦୦ ଗ୍ରାମ CaOCl_2 ଦ୍ରବଣରେ ୧୦ A ଗ୍ରାମ ଉପଲବ୍ଧ କ୍ଲୋରିନ୍ ଅଛି

ନିଷ୍ପତ୍ତି : ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ବ୍ଲୁଟିଂ ପାଉଡର ଦ୍ରବଣରେଉପଲବ୍ଧ କ୍ଲୋରିନ୍ ଅଛି ।



ପରୀକ୍ଷଣ - ୭

ପରୀକ୍ଷଣର ଶୀର୍ଷକ : ରୂନ ପଥରରେ କ୍ୟାଲସିୟମର ପରିମାଣ ଆକଳନ କରିବା ।

ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଉପକରଣ : ବ୍ୟୁରେଟ୍, ପିପେଟ୍, କୋନିକାଲର୍ ଫ୍ଲାସ୍କ ।

ଆବଶ୍ୟକୀୟ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ : KMnO_4 ଦ୍ରବଣ, ମାନକ ଅକ୍ସାଲିକ୍ ଏସିଡ୍ (N/10), ୮% ଆମୋନିୟମ୍ ଅକ୍ସାଲେଟ୍ ଦ୍ରବଣ, NH_4Cl , ଆମୋନିଆ ।

ବିଶ୍ଳେଷଣ : ରୂନ ପଥର ମୂଳତଃ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍ରେ ଗଠିତ କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣତଃ କମ ପରିମାଣର ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍ ସହିତ ଜଡିତ । ଡୋଲୋମାଇଟ୍ ହେଉଛି କ୍ୟାଲସିୟମ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍ ଏବଂ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍ର ଏକ ସମତୁଲ୍ୟ ଯୌଗିକ । ଏହି ଖଣିଜଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ଲୌହ, ଆଲୁମିନିୟମ୍, ସିଲିକନ୍ (ମୁକ୍ତ କିମ୍ବା ମିଶ୍ରୀତ) ଏବଂ ଜୈବ ପଦାର୍ଥର ଅକ୍ଷାଇଡ୍ ସହିତ ଦୂଷିତ ହୋଇଥାଏ । ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକର ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରୟୋଗ ଅଛି ଏବଂ ଖଣିଜର ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବାଣିଜ୍ୟିକ ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ଏହାର ଉପଯୁକ୍ତତା CaCO_3 , MgCO_3 ଏବଂ ଉପସ୍ଥିତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପାଦାନର ପରିମାଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ । ତେଣୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରାୟତଃ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ।



ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ, ରୂନ ପଥର ପାଉଡରକୁ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଅମ୍ଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ କରାଯାଏ ଏବଂ ଆମୋନିଆ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଅକ୍ସାଲିକ୍ ଏସିଡ୍ କିମ୍ବା ଆମୋନିୟମ୍ ଅକ୍ସାଲେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଦ୍ରବଣରେ ଉପସ୍ଥିତ କ୍ୟାଲସିୟମ୍କୁ ଅକ୍ସାଲେଟ୍ ଭାବରେ ଅବଶୋଷିତ ହୁଏ । ଧୋଇବା ପରେ ଅବଶୋଷିତ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଅକ୍ସାଲେଟ୍ କୁ ଦ୍ରବୀୟ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଏସିଡ୍ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରାଯାଏ ଏବଂ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ଅକ୍ସାଲିକ୍ ଏସିଡ୍ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାନକ KMnO_4 ଦ୍ରବଣ ସହିତ ଟାଇଟ୍ରେଟ୍ କରାଯାଏ । ଟାଇଟ୍ରେସନ୍ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ KMnO_4 ଆୟତନରୁ, ଏହି ଖଣିଜ ପଥରରେ ଥିବା କ୍ୟାଲସିୟମ୍ର ପରିମାଣ ଗଣନା କରାଯାଇପାରେ ।

$$1 \text{ ml of } 1 \text{ N } \text{KMnO}_4 = 0.020 \text{ gm of Ca}$$

$$1 \text{ ml of } 1 \text{ N } \text{KMnO}_4 = 0.028 \text{ gm CaO}$$

$$1 \text{ ml of } 1 \text{ N } \text{KMnO}_4 = 0.050 \text{ gm of CaCO}_3$$

ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା :

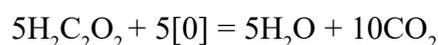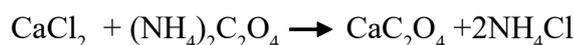



ପ୍ରକ୍ରିୟା :

ଏକ ବିକରରେ ୧ ଗ୍ରାମ ରୁନ ପଥରକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଓଜନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଖଣିଜ ପଥରକୁ ଦ୍ରବୀଭୂତ କରିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ଅଳ୍ପ ଦ୍ରବ୍ୟମ୍ବ HCl ସହିତ ବିଶୋଧନ କରନ୍ତୁ । ଧାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେପରି CO_2 ଗ୍ୟାସ୍ ଦୁର୍ଗନ୍ଧରେ ବାହାରିବା ଦ୍ୱାରା ଦ୍ରବଣ ନଷ୍ଟ ନହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ବିକରକୁ ବୃତ୍ତାକାର କାର ଦ୍ୱାରା ଘୋଡ଼ାଇ ରଖନ୍ତୁ । ସମସ୍ତ ଧାତୁ ପିଣ୍ଡ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହେବା ପରେ ବୃତ୍ତାକାର କାରକୁ ପାଣିରେ ଧୋଇ ସେହି ବାକର ମଧ୍ୟରେ ମିଶ୍ରଣ କରନ୍ତୁ । ତାପରେ ଆମୋନିଆ ମିଶାଇ ଦ୍ରବଣକୁ କ୍ଷାରୀୟ କରନ୍ତୁ । ତାହାପରେ ୧ ଗ୍ରାମ ଆମୋନିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ (NH_2Cl) ମିଶ୍ରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଦ୍ରବଣଟି ଦ୍ରବିଭୂତ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ମିଶ୍ରଣ କରନ୍ତୁ । ମିଶ୍ରଣ ଜାରିରଖି ଅଧିକ ପରିମାଣର ୮% ଆମୋନିୟମ୍ ଅକ୍ସାଲେଟ୍ ଦ୍ରବଣକୁ ପୁଣି ଦ୍ରବୀଭୂତ କରନ୍ତୁ । ତାହାପରେ ଦ୍ରବଣକୁ ଫୁଟାନ୍ତୁ ଏବଂ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଅକ୍ସାଲେଟ୍ ଅବଶେଷକୁ ସ୍ଥିର ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ । ସ୍ୱଳ୍ପ ଦ୍ରବ୍ୟମ୍ବ ଛାଣଣୀ କାଗଜ ଦ୍ୱାରା ଅଲଗା କରନ୍ତୁ, କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଏବଂ ଅକ୍ସାଲେଟ୍ ଆୟନ (କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ପାଇଁ $AgNO_3$ ଏବଂ ଅକ୍ସାଲେଟ୍ ପାଇଁ ଗରମ ଏସିଟିଲେଟେଡ୍ ଦ୍ରବ୍ୟମ୍ବ $KMnO_4$ ସହିତ ପରୀକ୍ଷଣ କରି) ମୁକ୍ତ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଳ୍ପ ଆମୋନିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ ଯୁକ୍ତ ଗରମ ପାତନ ପାଣି ସହିତ ଅବଶେଷକୁ ଅନେକ ଥର ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ । ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ପାଇଁ ଏହି ଅବଶେଷକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ । ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍‌କୁ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ପାଇରୋଫସଫେଟ୍ ରୂପେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରନ୍ତୁ ।

ଫନେଲ ତଳେ ଅବଶେଷ ଥିବା ବିକରକୁ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଛାଣଣୀ କାଗଜରେ ଥିବା କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଅକ୍ସାଲେଟ୍‌କୁ ଦ୍ରବୀଭୂତ କରିବା ପାଇଁ ଫିଲ୍ଟର ପେପରରେ ୨୦ ରୁ ୨୫ ମିଲି ୫N H_2SO_4 କୁ ମିଶାନ୍ତୁ । ଏହି ଏସିଡ୍ ବିକରରେ ଥିବା କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଅକ୍ସାଲେଟ୍ ଅବଶେଷକୁ ମଧ୍ୟ ଦ୍ରବୀଭୂତ କରିଦିଅନ୍ତୁ । ଛାଣଣୀ କାଗଜ କୁ ପାତନ ପାଣିରେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ଧୂଆ ପାଣି ମଧ୍ୟ ସମାନ ବିକରରେ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ । ଏହି ଦ୍ରବଣକୁ ପରିମାଣାତ୍ମକ ଭାବରେ ୨୫୦ ମିଲି ମାପ ଫ୍ଲ୍ୟାସ୍କରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଏଥିରେ ଚିହ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାତନ ପାଣି ଭରନ୍ତୁ ଏବଂ ଦ୍ରବଣକୁ ଭଲ ଭାବରେ ହଲାଇନ୍ତୁ । ୨୫ ମିଲି ଦ୍ରବଣକୁ ଏକ କୋନିକାଲ ଫ୍ଲ୍ୟାସ୍କରେ ନିଅନ୍ତୁ, ସେଥିରେ ୧୦ ମିଲି ଦ୍ରବ୍ୟମ୍ବ H_2SO_4 ମିଶ୍ରଣ କରି ଦ୍ରବଣକୁ ପ୍ରାୟ ୭୦ °C ରେ ଗରମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମାନକ $KMnO_4$ ଦ୍ରବଣ (ଯାହା ପରେ ପ୍ରଥମେ ମାନକ ଅକ୍ସାଲିକ୍ ଏସିଡ୍ ଦ୍ରବଣ ସହିତ ମାନକୀକରଣ କରାଯାଇଥିଲା) ବିରୁଦ୍ଧରେ ଟାଇଟ୍ରେଟ୍ କରନ୍ତୁ ।

ସାରଣୀ :

ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ସଂଖ୍ୟା	ଅକ୍ସାଲିକ୍ ଏସିଡ୍ ଦ୍ରବଣର ପରିମାଣ	ବ୍ୟୁରେଟ୍ ପଠନ (ମିଲି)		ପାର୍ଥକ୍ୟ (ମିଲିରେ)	ମତ୍ତବ୍ୟ
		ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବ୍ୟୁରେଟ୍ ପଠନମୂଲ୍ୟ (IBR)	ଅନ୍ତିମ ବ୍ୟୁରେଟ୍ ପଠନମୂଲ୍ୟ (FBR)		
୦୧					
୦୨					
୦୩					
୦୪					



ପରିକଳନ :

ନିଆଯାଇଥିବା ପଥରର ଓଜନ = ୧ ଗ୍ରା.ମ

ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅକ୍ସାଲିକ୍ ଏସିଡ୍ ଦ୍ରବଣର ଆୟତନ = ୨୫୦ ମି.ଲି.

ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟାଇଟ୍ରେସନ୍ ପାଇଁ ନିଆଯାଇଥିବା ଅକ୍ସାଲିକ୍ ପରିମାଣ = ୨୫ ମି.ଲି.

KMnO_4 ଦ୍ରବଣର ଆୟତନ = X ml

KMnO_4 ର ମାନକୀରଣ :

୨୫ ମିଲି N/୧୦ ଅକ୍ସାଲିକ୍ ଏସିଡ୍ = ୨୫ ମି.ଲି. N/୧୦ KMnO_4 ଦ୍ରବଣ

ସାଧାରଣତା KMnO_4 ର ମାନକ N/୧୦

ଏବେ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ

୧ ମିଲି ୧ N KMnO_4 = ୦.୦୨ ଗ୍ରା.ମ Ca

୧୯.୩ ମିଲି N/୧୦ KMnO_4 = ୦.୦୨ x X x ୧/୧୦ ଗ୍ରା.ମ Ca

ତେଣୁ, ୨୫ ମିଲି ଦ୍ରବଣରେ ୦.୦୨ x X ଗ୍ରାମ Ca ଥାଏ

୨୫୦ ମିଲି ଦ୍ରବଣରେ ୦.୦୨ x X ଗ୍ରାମ Ca ଥାଏ

ଏବେ, ୧ ଗ୍ରାମ ପଥରରେ ୦.୦୨ x X ଗ୍ରାମ Ca ଅଛି

୧୦୦ ଗ୍ରାମ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥରେ ୦.୦୨ x X x ୧୦୦ ଗ୍ରା.ମ ଥାଏ = x ଗ୍ରା.ମ Ca

% ଧାତୁରେ ଥିବା Ca = ୩୮.୬% = ୯୬.୫% CaCO_3

ନିଷ୍ପତ୍ତି : ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ବୃନ୍ ପଥରରେ x % Ca ରହିଛି ।



ପରୀକ୍ଷଣ - ୮

ପରୀକ୍ଷଣର ଲକ୍ଷ୍ୟ : ପେନସିଲ୍-ମାର୍ଚେନ୍ସ୍ ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ପଏଣ୍ଟ୍ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରି ତେଲର ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ପଏଣ୍ଟ୍ ନିର୍ଣ୍ଣୟ

ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଯନ୍ତ୍ରପାତି : ପେନସିଲ୍-ମାର୍ଚେନ୍ସ୍ ବନ୍ଦ କପ୍ ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ପଏଣ୍ଟ୍ ଉପକରଣ, ଥର୍ମୋମିଟର, ମାପକ ସିଲିଣ୍ଡର, LV ବିକର)

ଆବଶ୍ୟକୀୟ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ : ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ତେଲ ନମୁନା

ବିଶ୍ଳେଷଣ : ତେଲର ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ବିନ୍ଦୁକୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଭାବରେ ପରିଭାଷିତ କରାଯାଏ ଯେଉଁଥିରେ ଏହା ବାଷ୍ପ ଦିଏ, ଯାହା ବାୟୁ ସହିତ ମିଶି ଏକ ଜୁଲନଶୀଳ ମିଶ୍ରଣ ଗଠନ କରେ ଏବଂ ପାଇଲଟ୍ ଶିଖା ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଆଲୋକର ଝଲସ ଦିଏ । ଏହା ଅଗ୍ନି ବିପଦକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ତେଲର ଅସ୍ଥିରତା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦିଏ ।

ଅଗ୍ନିବିନ୍ଦୁ ହେଉଛି ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଯେଉଁଠାରେ ତେଲ ଦ୍ୱାରା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବାଷ୍ପ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ପାଇଲଟ୍ ଶିଖା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେବା ପରେ ଏହା ଅତି କମରେ ୫ ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ଜଳେ ।

ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ବିନ୍ଦୁ ତେଲର ଅସ୍ଥିରତା ପ୍ରକୃତିର ଏକ ଆସ୍ତେଆଭାସ ପ୍ରଦାନ କରେ ଏବଂ ତେଣୁ ଉତ୍ପାଦର ସମାନତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଉପଯୋଗୀ ତେଲର ଅଗ୍ନି ବିନ୍ଦୁ ଏହାର ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ବିନ୍ଦୁଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୪୦° ଅଧିକ । ଏକ ଲୁବ୍ରିକେଣ୍ଟର ବ୍ୟବହାର, ପରିବହନ ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ ସମୟରେ ଅଗ୍ନି ବିପଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରେ । ପେନିକ୍ସ ମାର୍ଚେନ୍ସ୍ ବନ୍ଦ କପ୍ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରି ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ଏବଂ ଅଗ୍ନି ବିନ୍ଦୁ ଉଭୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇପାରିବ ।


ପ୍ରକ୍ରିୟା :

ଉପକରଣରେ ଦିଆଯାଇଥିବା କପରେ ଯୋଗାଣ ହୋଇଥିବା ତେଲ ନମୁନା ନିଅନ୍ତୁ । ଢାକଣା ସହିତ କପକୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଥର୍ମୋମିଟରକୁ ଏହାର ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ । ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଗରମ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଏପରି ଭାବରେ ସମନ୍ୱୟ କରିବା କରନ୍ତୁ ଯେ ୭ ମିନିଟରେ ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରାୟ ୧ °C ବୃଦ୍ଧି ପାଏ । ପାଇଲଟ୍ ଅଗ୍ନିକୁ ଜଳୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ନିରନ୍ତର ଘାଣ୍ଟିବା ସହିତ ତାପନ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ । ପାଇଲଟ୍ ଶିଖା ଜଳାଇ ରଖନ୍ତୁ । ଆନୁମାନିକ ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ପଏଣ୍ଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତି ୫ °C ବ୍ୟବଧାନରେ ମାପନ ଫଳାଫଳ ନିଅନ୍ତୁ । ତେଲକୁ ୫ °C ଅଧିକରାଳ ସହିତ ଥଣ୍ଡା ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ପଏଣ୍ଟ୍ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପମାତ୍ରାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୧ °C ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ମାପନ ଫଳାଫଳ ନିଅନ୍ତୁ । ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ହେବା ପରେ, ତାପମାତ୍ରାକୁ ପ୍ରାୟ ୫ °C ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଗରମ କରିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ । ନିରନ୍ତର ଅଧିକରାଳ ସହିତ ତେଲକୁ ଥଣ୍ଡା ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତି ୧ °C ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ସହିତ ମାପନ ଫଳାଫଳ ନିଅନ୍ତୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ନହୁଏ । ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ହେଉଥିବା ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ତେଲର ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ପଏଣ୍ଟ୍ ଦିଏ ।



ସାରଣୀ : ୦୧ (ଆନୁମାନିକ ଫ୍ଲାସ୍ ପଏଣ୍ଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ)

ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ସଂଖ୍ୟା	ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି (ଃ ^୦ ତାପ ବୃଦ୍ଧି)	ମନ୍ତବ୍ୟ
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

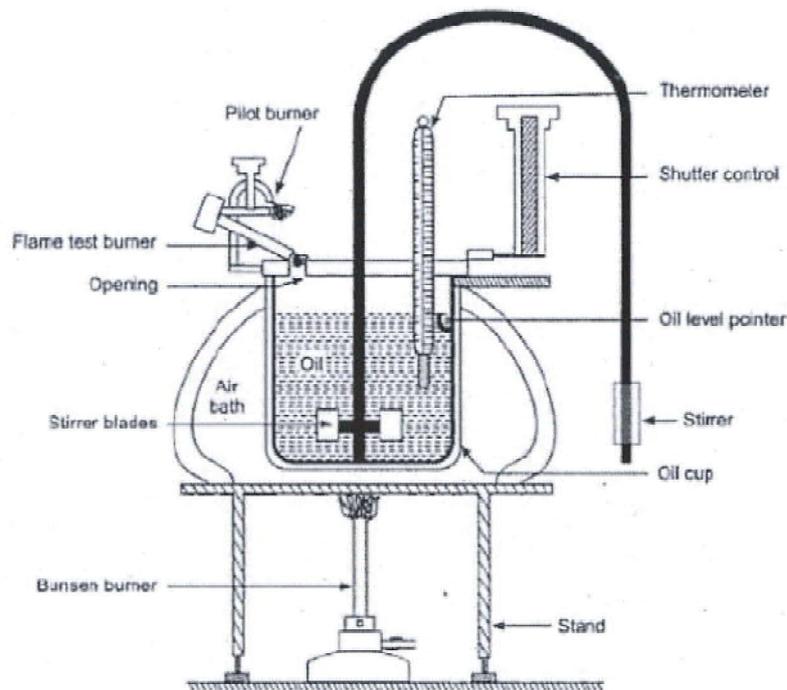

ସାରଣୀ ୦୧ : ପେନ୍‌ସ୍ ମାଟେରିଆଲ୍ ଫ୍ଲାସ୍ ପଏଣ୍ଟ୍ ଉପକରଣ



ସାରଣୀ : ୦୨ (ଫ୍ଲାସ ପଏଣ୍ଟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ)

ସଂଖ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ	ତାପମାତ୍ରା (୧ °C) ବୃଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା	ମତ୍ତବ୍ୟ	ସଂଖ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ	ତାପମାତ୍ରା (୧ °C) ବୃଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା	ମତ୍ତବ୍ୟ
1			1		
2			2		
3			3		
4			4		
5			5		
6			6		
7			7		
8			8		
9			9		
10			10		

ନିଷ୍ପତ୍ତି :

ଦିଆଯାଇଥିବା ତେଲର ଫ୍ଲାସ୍ ବିନ୍ଦୁ ହେଉଛି _____ °C = _____ °F । ଦିଆଯାଇଥିବା ତେଲର ଅଗ୍ନି ବିନ୍ଦୁ ହେଉଛି _____ °C = _____ °F ।



ପରୀକ୍ଷା - ୯

ପରୀକ୍ଷାର ଶୀର୍ଷକ : ରେଡଭର୍ଡ୍ ଭିସ୍କୋମିଟର ବ୍ୟବହାର କରି ଏକ ଲୁବ୍ରିକେଟିଂ ତେଲର 'ଘନତ୍ୱ' ନିର୍ଣ୍ଣୟ ।

ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଉପକରଣ : ରେଡଭର୍ଡ୍ ଭିସ୍କୋମିଟର, ତାପମାପା, ଷ୍ଟପ୍‌କ୍ଲକ୍

ଆବଶ୍ୟକୀୟ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ : ଲୁବ୍ରିକେଟିଂ ତେଲ

ବିଶ୍ଳେଷଣ : ଭିସ୍କୋମିଟି ହେଉଛି ଏକ ତରଳ ପଦାର୍ଥର ଗୁଣ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଏହା ଏହାର ପ୍ରବାହକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରେ । ତେଣୁ ଏହା ତରଳ ପଦାର୍ଥର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପ୍ରତିରୋଧର ଏକ ମାପ ଏବଂ ଏହାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ସାଧାରଣତଃ ଲୁବ୍ରିକେଟିଂ ତେଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ କରାଯାଏ । ଏହା ଯେକୌଣସି ଲୁବ୍ରିକେଟିଂ ତେଲର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁଣ, କାରଣ ଏହା ମୁଖ୍ୟ କାରକ ଯାହା ଏକ ଲୁବ୍ରିକେଟିଂର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରେ ।

ଯେକୌଣସି ତାପମାତ୍ରାରେ ତେଲର ପରମ ସାନ୍ଦ୍ରତା ଏକ କୈଶିକ ନଳୀ ମାଧ୍ୟମରେ ତେଲର ପ୍ରବାହ ହାର ମାପି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ । ସାଧାରଣତଃ **ମାନକ** ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏକ ମାନକ ପରିମାଣର କୈଶିକ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣର ତେଲ ନିଜ ଓଜନ ତଳେ ପ୍ରବାହିତ ହେବା ପାଇଁ ଲାଗୁଥିବା ସମୟ ମାପି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ । ତେଲର ସାନ୍ଦ୍ରତା ମାପ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଉପକରଣକୁ ଭିସ୍କୋମିଟର କୁହାଯାଏ । ରେଡଭର୍ଡ୍ ଭିସ୍କୋମିଟର ସାଧାରଣତଃ ଅନୁଭୂତିଶୀଳ ଏକକରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଅଭିଜ୍ଞତାମୂଳକ ଏକକରେ ଲୁବ୍ରିକେଟିଂ ତେଲର **ସାନ୍ଦ୍ରତା ମାପ** ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ।

ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ, ରେଡଭର୍ଡ୍ ଭିସ୍କୋମିଟର ଦ୍ୱାରା ତରଳ ପଦାର୍ଥର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଗତିଜ ସାନ୍ଦ୍ରତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇପାରିବ ।

$$\text{ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘନତ୍ୱ} = \left(\alpha t - \frac{\beta}{t} \right) \rho$$

$$\text{ଗତିଜ ସାନ୍ଦ୍ରତା (V)} = \frac{\text{Absolute Viscosity}}{\rho} = \alpha t - \frac{\beta}{t}$$

କେଉଁଠାରେ,

V = ସେଣ୍ଟିମିଟରରେ ତେଲର ଗତିଜ ସାନ୍ଦ୍ରତା ।

T = କୈଶିକ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରବାହିତ ତେଲର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣ ପାଇଁ ସେକେଣ୍ଡରେ ପ୍ରବାହ ସମୟ

P = ତେଲର ଘନତ୍ୱ


α ଏବଂ β ହେଉଛି ଯନ୍ତ୍ର ସ୍ଥିର ।



α ଏବଂ β ର ମୂଲ୍ୟ ତଳେ ଦିଆଯାଇଛି :

୫୦ ମିଲି ପାଇଁ ପ୍ରବାହ ସମୟ ସେକେଣ୍ଡରେ	α	β
୩୪-୧୦୦	0.00260	0.00260
୧୦୦ ରୁ ଅଧିକ	0.00247	0.00247

ମୂଲ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡ୍ ମୁନିଟରେ ଗଣନା କରାଯାଏ ।

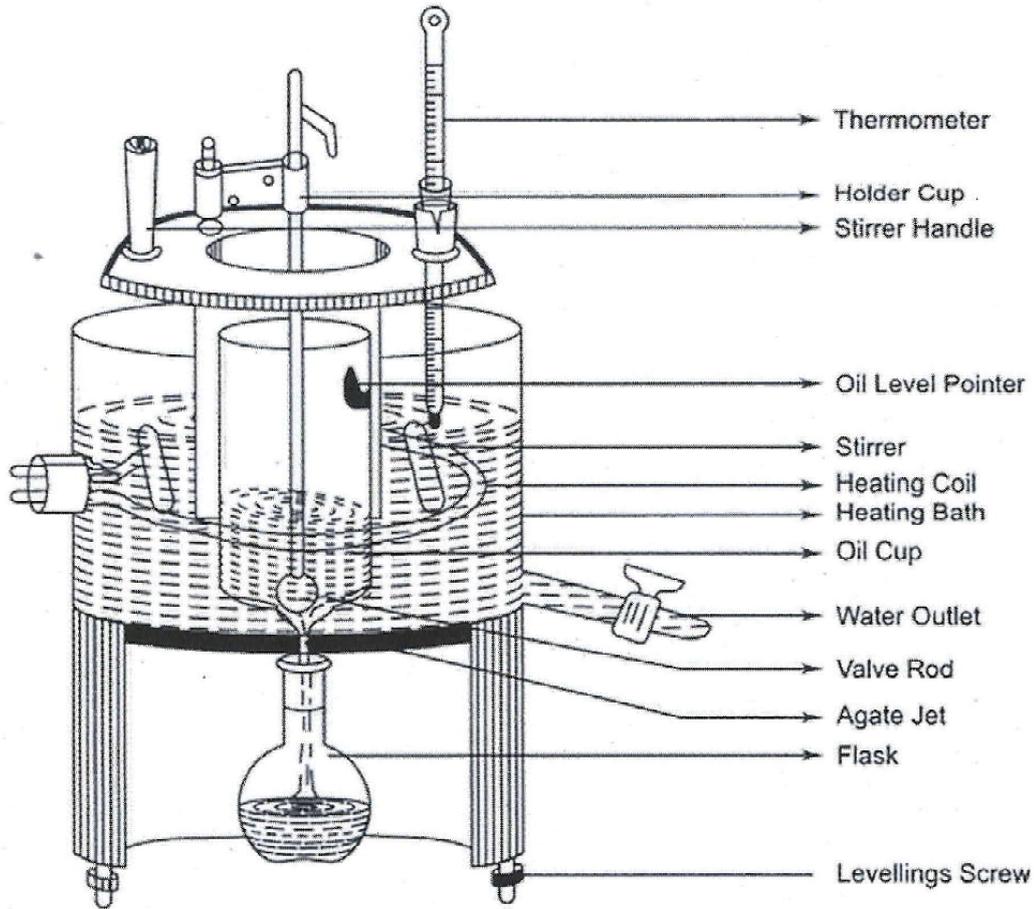

ଚିତ୍ର ୦୧ : ରେଡଭଜ୍ ଭିସକୋମିଟର ।

ପ୍ରକ୍ରିୟା :

ତେଲ କପରେ ତେଲ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ତେଲ କପଟି ସଫା ଏବଂ ଶୁଖିଲା ଅଛି ଏବଂ ତେଲ ପ୍ରବାହ ପାଇଁ କୈପିଲାରୀରେ କୌଣସି ବାଧା ନାହିଁ । କୈପିଲାରୀ (Capillary) ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କପଟିକୁ ସ୍ତର ସ୍ତରକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତେଲ ନମୁନାରେ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ । ଗରମ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ପାଣିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ତେଲର ତାପମାତ୍ରାକୁ ବିଭିନ୍ନ ମୂଲ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଗରମ କରାଯାଇପାରିବ ଯେଉଁଠାରେ ମାପ କରିବାକୁ ହେବ । ତେଲ କୋଠରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରବାହିତ ହେବା ସମୟରେ ପ୍ରଥମ ମାପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତଳେ ରଖାଯାଇଥିବା ମାପକ କୋହଲରାସ୍ ପ୍ୟୁଙ୍କରେ ଠିକ୍ ୫୦ ମିଲି ତେଲ ସଂଗ୍ରହ ହେବା ସମୟକୁ ସେକେଣ୍ଡରେ ରେକର୍ଡ କରନ୍ତୁ । କୈପିଲାରୀ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ସମାନ ତେଲ ଦ୍ୱାରା ତେଲ କପକୁ ଲେଭଲିଂ ଚିହ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ



ପୁନଃଭର କରନ୍ତୁ, ଗରମ କରି ତେଲର ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରାୟ ୧୦-୧୫ °C (୧୦ °C ରୁ କମ୍ ନୁହେଁ) ବୁଦ୍ଧି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମାପକ କୋହଲରାସ୍ ପ୍ଲମ୍ବରେ ଠିକ୍ ୫୦ ମିଲି ତେଲ ସଂଗ୍ରହ ହେବା ପରେ ସେକେଣ୍ଡରେ ତାପମାତ୍ରା ଏବଂ ଅନୁରୂପ ସମୟ ରେକର୍ଡ କରନ୍ତୁ । ପାଞ୍ଚଟି ଭିନ୍ନ ତାପମାତ୍ରାରେ ମାପ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରନ୍ତୁ । ବିଭିନ୍ନ ତାପମାତ୍ରାରେ ତେଲର ଗତିଗତ ଘନତ୍ୱ ଗଣନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପମାତ୍ରା ଏବଂ ତେଲର ଗତିଗତ ଘନତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଗ୍ରାଫ୍ ପ୍ଲଟ୍ କରନ୍ତୁ । ସେକେଣ୍ଡରେ ରେଡିଉଡ୍ ଘନତ୍ୱ ଭାବରେ ହାରାହାରି ମୂଲ୍ୟ ରିପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ।

ସାରଣୀ :

ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ସଂଖ୍ୟା	ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତାପମାତ୍ରା (°C)	ଅନ୍ତିମ ତାପମାତ୍ରା (°C)	ମଧ୍ୟ ତାପମାତ୍ରା (°C)	ସମୟ (ସେକେଣ୍ଡ)	α ର ମୂଲ୍ୟ	β ର ମୂଲ୍ୟ	ଗତିଜ ଘନତ୍ୱ (ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡ୍)
୧							
୨							
୩							
୪							
୫							

ଗ୍ରାଫ୍ : ତାପମାତ୍ରା ବନାମ କାଇନେମାଟିକ୍ ଘନତ୍ୱ ଗ୍ରାଫ୍ ପ୍ଲଟ୍ କରନ୍ତୁ ।

ଉପସଂହାର :

ତାପମାତ୍ରା ବନାମ ଗତିଜ ସାହୁତାର ଏକ ଗ୍ରାଫ୍ ପ୍ଲଟ୍ କରି ପ୍ରାୟ ନିମ୍ନ ଶବ୍ଦ ସ୍ଲୋପି ବକ୍ର ପ୍ରମାଣ କରେ ଯେ ଉପରୋକ୍ତଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ସହିତ ବିପରୀତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ଅର୍ଥାତ୍ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ସହିତ, ଘନତ୍ୱ ହ୍ରାସ ପାଏ ଏବଂ ବିପରୀତ ଭାବରେ ଯୋଗାଣ ହୋଇଥିବା ତେଲର ସାହୁତା ରେଡିଉଡ୍ ସେକେଣ୍ଡ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼େ ।




ପରୀକ୍ଷଣ-୧୦

ପରୀକ୍ଷଣର ଶୀର୍ଷକ : ଆସ୍ଟିରିନ୍ (ଏସ୍ଟେରିଲ ସାଲିସିଲିକ୍ ଏସିଡ୍)ର ପ୍ରସ୍ତୁତି ।

ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଉପକରଣ : କନିକାଲ୍ ଫ୍ଲାସ୍କ, ବିକର (୧୦୦ ମିଲି), ବୁତନର୍ ଫନେଲ୍

ଆବଶ୍ୟକୀୟ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ : ସାଲିସିଲିକ୍ ଏସିଡ୍, ଏସ୍ଟେରିକ୍ ଏନହାଇଡ୍ରାଇଡ୍,

ବିଶ୍ଳେଷଣ : ସାଲିସିଲିକ୍ ଏସିଡ୍ ଏସ୍ଟେରିଲେସନ୍ କରିବା ସହିତ ଏସ୍ଟେରିକ୍ ସାଲିସିଲିକ୍ ଏସିଡ୍ କିମ୍ବା ଆସ୍ଟିରିନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ । ଏସ୍ଟେରିଲେସନ୍ ଏସ୍ଟେରିକ୍ ଏନହାଇଡ୍ରାଇଡ୍ ସହିତ ଶୀଘ୍ର ହୁଏ ଏବଂ କିଛି ଗାଢ଼ ଗନ୍ଧକାମ୍ଳ (Con. H₂SO₄) ର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏହା ଏକ ପ୍ରରୋଚକ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ।

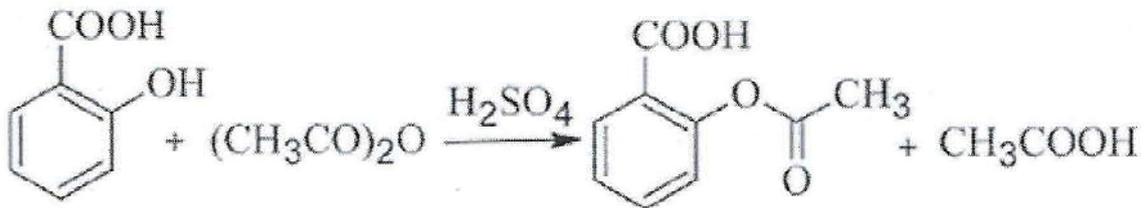

ପ୍ରକ୍ରିୟା :

୫ ଗ୍ରାମ ସାଲିସିଲିକ୍ ଏସିଡ୍ ଏବଂ ୭ ମିଲି ଏସ୍ଟେରିକ୍ ଏନହାଇଡ୍ରାଇଡ୍‌କୁ ୧୦୦ ମିଲି କନିକାଲ୍ ଫ୍ଲାସ୍କରେ ନିଅନ୍ତୁ । ଏହାର ୨-୩ ବୁନ୍ଦା ଗାଢ଼ ଗନ୍ଧକାମ୍ଳ (Con. H₂SO₄) ପକାଇବା ହେଉ, ଏହାକୁ ଭଲଭାବରେ ମିଶ୍ରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପରେ ଫ୍ଲାସ୍କକୁ ଏକ ଜଳ ପାତ୍ରରେ ଗରମ କରନ୍ତୁ, ତାପମାତ୍ରା ୬୦-୭୦ °C ମଧ୍ୟରେ ରଖି ୨୦ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ । ମିଶ୍ରଣକୁ ଏକ ଥଣ୍ଡା ପାତ୍ରରେ ଅନବରତ ଘୁନର୍ନ କରି ଥଣ୍ଡା କରନ୍ତୁ, ଏହାରେ ପ୍ରାୟ ୨୦ ମିଲି ଅତି ଥଣ୍ଡା ଜଳ ଯୋଡ଼ନ୍ତୁ ଯାହା ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ଟେରିକ୍ ଏନହାଇଡ୍ରାଇଡ୍ କୁ ବିଘଟଣ କରିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । କନିକାଲ୍ ଫ୍ଲାସ୍କରେ ଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ୨୫୦ ମିଲି ବିକରରେ ୫୦ ଗ୍ରାମ ବରଫ୍ ଗୁଣ୍ଡ ରଖି ଘୁନର୍ନ କରନ୍ତୁ ଯେପରିକି, ସେଥିରେ । ଯଦି ସେଥିରେ ଧଳା ପଦାର୍ଥ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ ତେବେ ଫ୍ଲାସ୍କର ଭିତରୀ ସ୍ତରକୁ ଗ୍ଲାସ୍ ରଡ୍ କିମ୍ବା ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ସ୍ଟିଲ୍ ସ୍ପାରୁଲା ସହିତ ଘର୍ଷଣ କରନ୍ତୁ । ବୁତନର୍ ଫନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଫିଲ୍ଟର କରନ୍ତୁ ଓ ଫିଲ୍ଟର କାଗଜର ଫୋଲ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଚାପି ଶୋଷଣ କରି ଶୁଷ୍କ କରନ୍ତୁ । ନିର୍ଗତ ଏସ୍ଟେରିକ୍ ସାଲିସିଲିକ୍ ଏସିଡ୍‌କୁ ଏସ୍ଟେରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଏବଂ ପାଣିର ସମାନ ଭାଗର ମିଶ୍ରଣରୁ ପୁନଃ crystallize (ଦାନାଦାନ ରୂପ) କରନ୍ତୁ ।

ନିଷ୍କର୍ଷ :

ଉତ୍ପାଦନ = ୫ ଗ୍ରାମ ଗଲନସ୍ଥାନ = ୧୩୬-୧୩୭ °C

ଏସ୍ଟେରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଅମ୍ଳ ଗରମ କରିବା ସମୟରେ ବିଘଟିତ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଏହା ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଗଲନାଙ୍କ ରଖେନାହିଁ ।

ପରୀକ୍ଷାଗାର ବ୍ୟବହାର କର୍ମ

ପରୀକ୍ଷାଗାର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପୁସ୍ତକ



ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗ

ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ବୁର୍ଲା

ସମ୍ବଲପୁର, ଓଡ଼ିଶା - ୭୬୮୦୧୮

ସୂଚୀପତ୍ର

କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା	ପରୀକ୍ଷାର ଶୀର୍ଷକ	ପୃଷ୍ଠା ନମ୍ବର
1	ପରୀକ୍ଷଣ - ୧	50
2	ପରୀକ୍ଷଣ - ୨	53
3	ପରୀକ୍ଷଣ - ୩	57
4	ପରୀକ୍ଷଣ - ୪	59
5	ପରୀକ୍ଷଣ - ୫	61
6	ପରୀକ୍ଷଣ - ୬	64
7	ପରୀକ୍ଷଣ - ୭	67
8	ପରୀକ୍ଷଣ - ୮	70
9	ପରୀକ୍ଷଣ - ୯	73
10	ପରୀକ୍ଷଣ - ୧୦	76



ପରୀକ୍ଷା - ୧

ପରୀକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ : ଦିଆଯାଇଥିବା ପାନିଥି କେତେ ସୋଡ଼ିୟମ କାର୍ବୋନେଟ୍ ଆଉ ସୋଡ଼ିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ ଅଛି ବାହାର କରମା ।

ଦରକାରୀ ଜିନିଷ : ବ୍ଲୁରେଟ୍, ପିପେଟ୍ (ଜଳ ନଳିକା), କୋନିକାଲ ଫ୍ଲ୍ୟାସ୍କ, ବରଫ ଜାଗା



ଦରକାରୀ ରାସାୟନିକ ଜିନିଷ: ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ ଅମ୍ଳ (HCl), ମିଥାଇଲ୍ ଅରେଞ୍ଜି, ଫେନୋଲଫଥାଲିନ୍

ସିଦ୍ଧାନ୍ତ : କ୍ଷାର ଆଉ କାର୍ବୋନେଟ୍ ମିଶା ପାନିକେ ମାନକ ଅମ୍ଳ ସାଙ୍ଗେ ଟାଇଟ୍ରେଟ୍ କଲେ, ଦୁଇ ଭାଗଥି ପ୍ରଶମନୀକରଣ (Neutralisation) ହେସି ।

(୧) ପହେଲା ପଦକ୍ଷେପରେ, NaOH ପୁରା ପ୍ରଶମନୀକରଣ (Neutralisation) ହେସି ଆଉ Na₂CO₃ ରେ ଅଧା ହେସି ।

(୨) ତାପରେ, Na₂CO₃ ଜେନ୍ଟାଳି ପହେଲା ଥର NaHCO₃ ହେଇଥିସି, ପୁରା ପ୍ରଶମନୀକରଣ ହେସି ।

ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା :

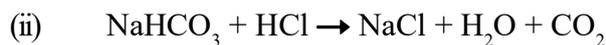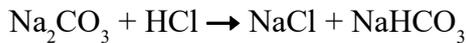

କେନ୍ଦ୍ରା କରମା :

ପାଏନ୍ ନଳୀଥି ୧୦ ମି.ଲି. ପାନି ପିପେଟ୍ କରି କୋନିକାଲ ଫ୍ଲ୍ୟାସ୍କରେ ରଖୁନ୍ । ଫେନୋଲଫଥାଲିନ୍ ଦୁଇ ଥୁପା ଆଉ ବରଫ ଜାଗାନ୍ ଥଣ୍ଡା କରୁନ୍ । ବ୍ଲୁରେଟ୍ନୁ HCl ଅମ୍ଳ କେ ବୁନ୍ଦା ବୁନ୍ଦା ପକ ଯେତେବେଲ ତକ୍ ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗ ପୁରା ଲିଭିନାଯାଇଛେ, ବ୍ଲୁରେଟ୍ ର ଲେଖାକେ ଲେଖ । ତିନ୍ ଥର ସମାନ ସଂଖ୍ୟା ବାହାରବା ତକ୍ ଟାଇଟ୍ରେଟ୍ କର । ପହେଲା ଆଉ ଇତାର ଲେଖାର ତତ୍ପାର୍ଥକ୍ୟ କେତେ (V₁) ବାହାର କର । ତାପରେ ମିଥାଇଲ୍ ଅରେଞ୍ଜି ୨ ଥୁପା ମିଶା । ଫେର୍ HCl ଅମ୍ଳ ସାଙ୍ଗେ ଟାଇଟ୍ରେଟ୍ କର ଯେତେବେଲ ତକ୍ ହଳଦିଆଟା ଲାଲା ନାଇ ହେଇଛେ । ତିନିଥର ସମାନ ସଂଖ୍ୟା ପାଇବାର୍ ତକ୍ ଜାରିରଖ । ପହେଲା ଆଉ ଇଥର ଲେଖାର ପାର୍ଥକ୍ୟ ବାହାର କର V₂ ।



ଗଣାଲେଖା :

ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ସଂଖ୍ୟା	ପାଦି ନମୁନାର ଆୟତନ (ମି.ଲି.)	ବ୍ୟୁରେଟ୍ ପଠନ (ମିଲି)			ପାର୍ଥକ୍ୟ (ମିଲିରେ)		ମନ୍ତବ୍ୟ
		ପହେଲା ବ୍ୟୁରେଟ୍ ପଠନମୂଲ୍ୟ I.B.R. (a)	ଶେଷ ବ୍ୟୁରେଟ୍ ପଠନମୂଲ୍ୟ F.B.R. (1 st) (b)	ଶେଷ ବ୍ୟୁରେଟ୍ ପଠନମୂଲ୍ୟ F.B.R. (2 nd) (c)	(b-a) V ₁	(c-a) V ₂	
1							ପାଖାପାଖି
2							ସଂଗତ
3							
4							


I.B.R. - ପହେଲା ବ୍ୟୁରେଟ୍ ପଠନମୂଲ୍ୟ

F.B.R. - ଶେଷ ବ୍ୟୁରେଟ୍ ପଠନମୂଲ୍ୟ

ଗଣନା / ହିସାବ :





ସମୀକରଣ (୧) ରୁ ସମୀକରଣ (୨) କେ ବିଯୋଗ କରଲେ

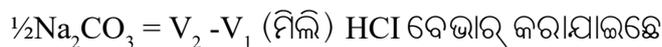

Na₂CO₃ ର ପରିମାଣ :

ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ,

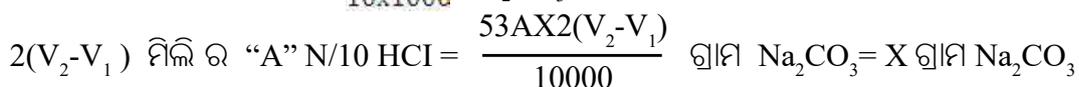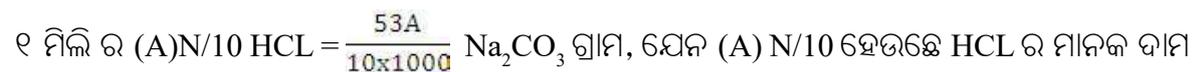

ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ପାଦି ନମୁନାରେ ୧୦ ମିଲିରେ X ଗ୍ରାମ Na₂CO₃ ଅଛି ।

ତାହେଲେ ୧୦୦୦ ମିଲି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ପାଦି ନମୁନାରେ ୧୦୦ X ଗ୍ରାମ /ଲିଟର Na₂CO₃ ଅଛି ।



NaOH ର ପରିମାଣ :

ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ,

୧୦୦୦ ମିଲି ୧N HCl = ୪୦ ଗ୍ରାମ NaOH

୧ ମିଲିର ୧N HCl = ୪୦/୧୦୦୦ ଗ୍ରାମ NaOH

୧ ମିଲି ର (A)N/10 HCL = $\frac{୪୦A}{୧୦ \times ୧୦୦୦}$ NaOH

{ $V_2 - 2(V_2 - V_1)$ } ମିଲି ର “A” N/10 HCl = $\frac{୪୦A \times \{V_2 - 2(V_2 - V_1)\}}{୧୦୦୦}$ ଗ୍ରାମ NaOH = Y ଗ୍ରାମ NaOH

ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ପାନି ନମୁନାରେ ୧୦ ମିଲିରେ X ଗ୍ରାମ NaOH Y ଗ୍ରାମ ଅଛି ।

ତାହେଲେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ପାନି ନମୁନା ୧୦୦୦ ମିଲିରେ ୧୦୦ Y ଗ୍ରାମ /ଲିଟର NaOH ଅଛି ।

ଶେଷକଥା : ଦିଆଯାଇଥିବାର ପାନିଥି ୧୦୦ X ଗ୍ରାମ/ଲିଟର ସୋଡ଼ିୟମ କାର୍ବୋନେଟ (Na_2CO_3) ଆଉ ୧୦୦ Y ଗ୍ରାମ/ଲିଟର ସୋଡ଼ିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ (NaOH) ଅଛି ।



ପରୀକ୍ଷଣ - ୨

ପରୀକ୍ଷଣର ଲକ୍ଷ୍ୟ

ପାନିରେ କେତେ କ୍ଷାର ଅଛି EDTA ଦେଇକରି ବାହାର କରମା ।

ଦରକାରୀ ଜିନିଷ : ରୂପରେଟ୍, ଜଳନଳୀ (ପିପେଟ୍), କୋନିକାଲ୍ ଫ୍ଲୁଇଡ୍, ମାପଳା ଫ୍ଲୁଇଡ୍, ଧୂଳିବାର ବୋତଲ

ଦରକାରୀ ରାସାୟନିକ ଜିନିଷ :

- (i) ମାନକ ତିସୋଡିୟମ EDTA ଦ୍ରବଣ
- (ii) ଏରିଓକ୍ଲୋମ କଳା-T ସୂଚକ (EBT) [ସୋଡିୟମ -1 (1- ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସି - 2 ନାପଥାଇଲ ଆଜୋ) -6- ନାଇଟ୍ରୋ -2- ନାପଥାଇଲ-4- ସଲଫୋନେଟ୍ (II)]
- (iii) ବର୍ଫର ଦ୍ରବଣ ($\text{NH}_4\text{Cl} + \text{NH}_4\text{OH}$)

ସିଦ୍ଧାନ୍ତ / ବିଶ୍ଳେଷଣ : ସାବୁନରେ ଫେଣ କେ କମ୍ କରବାରଟାକେ ପାନିର କ୍ଷାରିୟତା କୁହାଯାଏ। ପାନିଥି Ca^{2+} , Mg^{2+} , Al^{3+} , Fe^{3+} ଆଉ Mn^{2+} ଥିଲେ କ୍ଷାରିୟତା ବଢ଼ିଥିବି । ଯେତେବେଳେ କ୍ଷାର ପାନି ସାଙ୍ଗେ ସାବୁନ୍ (ଓଲିକ୍ ଅମ୍ଳ, ପାମିଟିକ୍ ଅମ୍ଳ କି ଷ୍ଟେରିକ୍ ଅମ୍ଳ ଲେଖେ ବେଶୀ ଫ୍ୟାଟି ଅମ୍ଳର ସୋଡିୟମ୍ କି ପୋଟାସିୟମ୍ ଲୁଣ) ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେବି, ସେତେବେଳେ ଫେଣ ନାହିଁ ବାହାରେ ଆଉ ପାନି ସାଙ୍ଗେ ନାହିଁ ମିଶୁଥିବାର ଧଳା ଅବଶେଷ ବନାସି, ହେତିର କପଡ଼ା ଭଲଭାବେ ସଫା ନାହିଁ ହେଇପାରେ । ଇଟା କ୍ଷାର ପାନିଥି ଥିବା $\text{Ca}^{2+}/\text{Mg}^{2+}$ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଲାଗି ହେଇଥିବି (Ca/Mg - ଓଲିକ୍, Ca/Mg - ପାମିଟିକ୍ ଆଉ Ca/Mg - ଷ୍ଟେରିକ୍ ହେବି) ।

କ୍ଷାରିୟତାର ପ୍ରକାର :

(କ) ଅସ୍ଥାୟୀ କ୍ଷାରିୟତା : ଇଟା କ୍ୟାଲସିୟମ୍, ମାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଆଉ ବାକି ଭାରୀ ଧାତୁର ବାଇକାର୍ବୋନେଟ୍ ଆଉ ଲୁହାର କାର୍ବୋନେଟ୍ ଥିଲେ ହେଇଥିବି । ପାନିକେ ଫୁଟାଲେ ବାଇକାର୍ବୋନେଟ୍ ଅଦ୍ରବଣୀୟ କାର୍ବୋନେଟ୍ କି ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ ହେଇଯାଏ ଆଉ ତଳେ ବସିଯାଏ । ପାନିକେ ଛାନିକରି ତାକେ ବାହାର କରାଯାଇ ପାରବି ।

(ଖ) ସ୍ଥାୟୀ କ୍ଷାରିୟତା : ପାନିଥି କ୍ୟାଲସିୟମ୍, ମାଗ୍ନେସିୟମ୍, ଲୁହା ଆଉ ବାକି ଭାରୀ ଧାତୁର ମିଶିଯାଇଥିବା କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଏବଂ ସଲଫେଟ୍ ଥିଲେ ହେବି । ସ୍ଥାୟୀ କ୍ଷାରିୟତା ଲାଗି ଦାୟା ଲବଣଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛେ CaCl_2 , MgCl_2 , CaSO_4 ମି.ଗ୍ରା. SO_4 , FeSO_4 , $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ ଇତ୍ୟାଦି । ପାନିର କ୍ଷାରିୟତାକେ CaSO_3 ର ସମାନ ପରିମାଣ ଭାବେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ, CaSO_3 କେ ମାନକ ଭାବେ ବାଛବାର କାରଣ ଇଟାର ଆଣବିକ ଓଜନ (Molecular mass) ୧୦୦ ଆଏ ଯେନଟା କି ହିସାବ ଲାଗି ସୁବିଧା ହେବି, CaSO_3 ସବୁଠାରୁ ବେଶି ଅଦ୍ରବଣୀୟ ଆଏ ଯେନଟାକି ପାନିକେ ସଫା କଲାବେଳେ ବାହାର କରାଯାଇପାରବି ।

କ୍ଷାରିୟତାର ଏକକ :

(i) ପ୍ରତି ମିଲିୟନ ଅଂଶ (PPM) : ଇଟାକେ ପ୍ରତି ମିଲିୟନ (10^6) ଅଂଶ ପାନିରେ ଥିବା କ୍ୟାଲସିୟମ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍ ଓଜନ ହିସାବେ ଅଧା ଭାଗ ଭାବେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଛେ, ଅର୍ଥାତ୍ 10^6 ଅଂଶ ପାନିରେ $1 \text{ PPM} = \text{CaCO}_3$ ସମାନ କ୍ଷାରିୟତା ଗୁଡ଼େ ଭାଗ ।






(ii) ପ୍ରତି ମିଲିଗ୍ରାମ ମ (ମି.ଗ୍ରା/L) : ଇଟାକେ ଗୁଟେ ଲିଟର ପାନିରେ ଥିବା ମିଲିଗ୍ରାମ କ୍ୟାଲସିୟମ କାର୍ବୋନେଟର ସଂଖ୍ୟା ଭାବେ ପରିଭାଷିତ କରାଯାଏ ।

ଇଟା ମନେ ରଖିବାର ଉଚିତ୍ ଯେ ପାଏନ୍ ଲାଗି ୧ ମି.ଗ୍ରା/L = 1 PPM

ନୀତି : EDTA ର ଡାଇସୋଡିୟମ ଲୁଣ, ଯେତେବେଳେ କ୍ଷାରୀୟ ପାଏନ୍ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିଗଲେ ଇଟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରନ୍ତି ଆଉ କ୍ଷାରୀୟ ଭାବେ (PH 8-10) ସବୁ କ୍ଷାରୀୟ ଗୁଣ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ଯୁକ୍ତ ଚାର୍ଜକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ । ଅତ୍ୟଧିକ ଏରିଓକ୍ରୋମର କଳା - T (EBT), ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଦ୍ରବଣକେ ଡ୍ରାଇନ୍ ଲାଲରୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ନୀଳିଆ ରଙ୍ଗ ହେଉଥିବି । ଯେନଟା ଟାଇଟ୍ରେସନର ଶେଷ୍ ବିନ୍ଦୁ ଥାଏ ।

ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା :

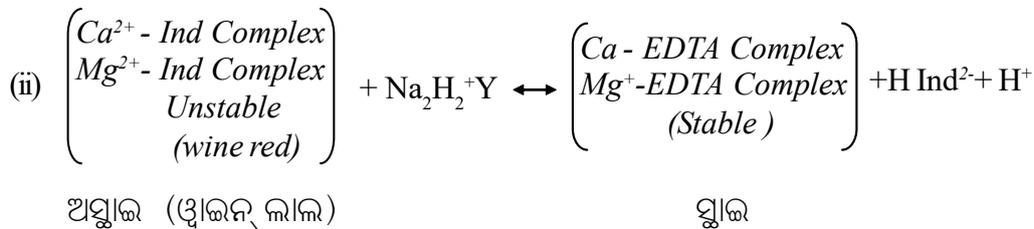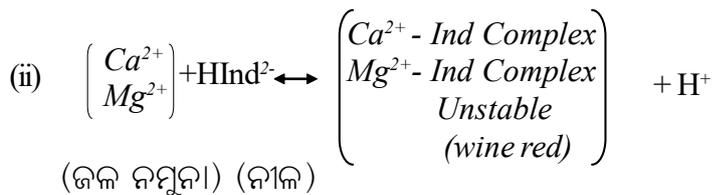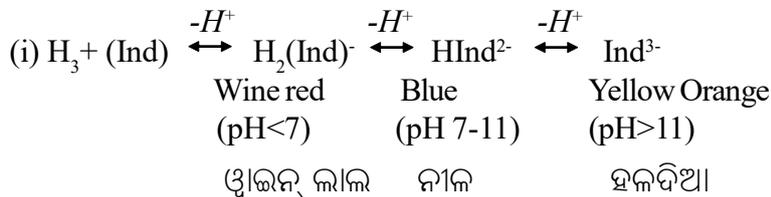

କେନ୍ଦ୍ରା କରମା :

(୧) ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷାରିୟତାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ :

୧୦୦ ମିଲି କୋନିକାଲ୍ ଫ୍ଲ୍ୟାସ୍କ ଥି ୨୦ ମିଲି କ୍ଷାରିୟ ପାଏନ୍ ନମୁନା ଡ୍ରଲନଲାରେ ନିଅ । ୨ ମିଲି ବର୍ଫର ଦ୍ରବଣ ଆଉ ୨-୩ ବୁନ୍ଦା ଏରିକ୍ରୋମ୍ କଳା - T ସୂଚକ ଭାବେ ମିଶାଅ । ତା'ପରେ ବ୍ୟୁରେଟ୍ରେ ଥିବା M/100 EDTA ଦ୍ରବଣ ସାଙ୍ଗେ କୋନିକାଲ୍ ଫ୍ଲ୍ୟାସ୍କର ଦ୍ରବଣକେ ଟାଇଟ୍ରେଟ୍ କର, ଯେତେବେଳେ ତକ୍ ଶେଷ୍ ବିନ୍ଦୁରେ ରଙ୍ଗ ଡ୍ରାଇନ୍ ଲାଲରୁ ନୀଳିଆ ରଙ୍ଗରେ ନୀଳ ବଦଳି, ଇ ମାନକ ରୁ ସମନ୍ୱିତ ପାଠ ପାଇବାର୍ ତକ୍ ଟାଇଟ୍ରେଟ୍ ମୂଲ୍ୟକେ ଧାନ ଦିଅ । ଆୟତନ V_2 ml ହେବାକେ ଦିଅ ।



ଗଣାଲେଖା ୧ :

ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ସଂଖ୍ୟା	ଦିଆ ହେଉଥିବା ଭିନ୍ନ ନମୁନା ପରିମାଣ (ମିଲି)	ବ୍ୟୁରେଟ୍ ପଠନ (ମିଲି)		ତପାତ୍ (ମିଲିରେ)	ମନ୍ତବ୍ୟ
		ପହେଲା ବ୍ୟୁରେଟ୍ ପଠନମୂଲ୍ୟ (IBR)	ଶେଷ ବ୍ୟୁରେଟ୍ ପଠନମୂଲ୍ୟ (FBR)		
୦୧					ପାଖାପାଖି
୦୨					ସଂଗତ
୦୩					
୦୪					

(ii) ଅସ୍ଥାୟୀ ଆଉ ସ୍ଥାୟୀ କ୍ଷାରିୟତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ : ଗୁଟ୍ ବଡ଼ ବିକରରେ ୨୫୦ ମିଲି କ୍ଷାରୀୟ ପାନି ନମୁନା ନିଅ ଆଉ ପ୍ରାୟ ୧ ଘଣ୍ଟା ତଳ ଧାରେ ଫୁଟାଅ (ଯେତେବେଳେ ତଳ ସବୁ ବାଲକାବୋନେଟ୍ ଅଦ୍ରବଣୀୟ $\text{CaCO}_3 + \text{Mg(OH)}_2$ ରେ ନାଲ ହେଇଛେ) । ଅଣ୍ଟା କର ଆଉ ୨୫୦ ମିଲି ମାପକ ଫ୍ଲୁସ୍‌କରେ ଛାଣି ଦିଅ ଆଉ ଆୟତନକେ ଚିହ୍ନ ତଳ ନିଅ । ଇ ଦ୍ରବଣର ୪୦ ମିଲି ନିଅ ଆଉ ଆଗର ଲେଖେ ସମାନ ଭାବେ ଆଗକେ ବଡ଼ । ଦେଭାର୍ ହେଉଥିବା EDTA ର ଆୟତନ ପାନି ନମୁନାରେ ସ୍ଥାୟୀ କ୍ଷାରିୟତା ସାଙ୍ଗେ ସମାନ । ଆୟତନ V_3 ମିଲି ହେବା ।

ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷାରିୟତାରୁ ସ୍ଥାୟୀ କ୍ଷାରିୟତାକେ ବିଯୋଗ କରି ଅସ୍ଥାୟୀ କ୍ଷାରିୟତା ବାହାର କରାଯାଏ ।

ଗଣାଲେଖା ୨ :

ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ସଂଖ୍ୟା	ଦିଆ ହେଉଥିବା ପାନି ନମୁନାର ପରିମାଣ (ମିଲି)	ବ୍ୟୁରେଟ୍ ପଠନ (ମିଲି)		ତପାତ୍ (ମିଲିରେ)	ମନ୍ତବ୍ୟ
		ପହେଲା ବ୍ୟୁରେଟ୍ ପଠନମୂଲ୍ୟ (IBR)	ଶେଷ ବ୍ୟୁରେଟ୍ ପଠନମୂଲ୍ୟ (FBR)		
୦୧					ପାଖାପାଖି
୦୨					ସଂଗତ
୦୩					
୦୪					



ଗଣନା / ହିସାବ :

ମୋଟ କ୍ଷାରିୟତା :

୧୦୦୦ ମିଲି ୧M EDTA = ୧୦୦ ଗ୍ରାମ CaCO_3

୧ ମିଲିର ୧M EDTA = ୧୦୦ ମିଗ୍ରା CaCO_3

୧ ମିଲି ର “a” M/100 EDTA = “a” ମିଗ୍ରା CaCO_3

V_2 ml “a” M/100 EDTA = “a” V_2 ମିଗ୍ରା $\text{CaCO}_3 = \text{CaCO}_3$ ର “A” ମିଗ୍ରା

ଏବେ ୪୦ ମିଲି ଜଳ ନମୁନାରେ = “A” ମିଗ୍ରା CaCO_3 ଅଛି ।

୧୦୦୦ ମିଲି କି ୧ ଲିଟର ପାନି ନମୁନାରେ = $\frac{A}{40} \times 1000 = 98 A$ ମିଗ୍ରା / ଲିଟର 98 “A” ପିପିଏମ୍ ମୋଟ କ୍ଷାରିୟତା ଯାହାକି CaCO_3 ର ସମ କ୍ଷାରିୟତା ହିସାବେ ରହିଛି ।

ସ୍ଥାୟୀ କ୍ଷାରିୟତା :

୧ ମିଲି ର “a” M/100 EDTA = “a” ମିଗ୍ରା CaCO_3

V_3 ml “a” M/100 EDTA = “a” V_3 ମିଗ୍ରା $\text{CaCO}_3 = \text{CaCO}_3$ ର “B” ମିଗ୍ରା

ଏବେ ୪୦ ମିଲି ପୁଢ଼ା ପାନି ନମୁନାରେ = “B” ମିଗ୍ରା CaCO_3

୧୦୦୦ ମିଲି କିମ୍ବା ୧ ଲିଟର ପୁଢ଼ା ପାନି ନମୁନାରେ = $\frac{B}{40} \times 1000 = 98 B$ ମିଗ୍ରା / ଲିଟର

= 98 “B” ପିପିଏମ୍ କ୍ଷାରିୟତା ଯେଉଁଠା କି CaCO_3 ର ସମାନ୍ କ୍ଷାରିୟତା ହିସାବେ ରହିଛି ।

ତେଣୁ ଅସ୍ଥାୟୀ କ୍ଷାରିୟତା (25A-25B) ପିପିଏମ୍ ସାଙ୍ଗେ ସମାନ ଯେଉଁଠା କି CaCO_3 ର ମାନକ କ୍ଷାରିୟତା ହିସାବେ ରହିଛି ।

ଶେଷକଥା : ଦିଆ ହୋଇଥିବା ପାନି ନମୁନାରେ ମୋଟ କ୍ଷାରିୟତା 25A ppm, ସ୍ଥାୟୀ କ୍ଷାରିୟତା 25B ppm ଆଉ (25A-25B) ppm ଅସ୍ଥାୟୀ କ୍ଷାରିୟତା ରହିଛି ଯେଉଁଠାକେ CaCO_3 ର ସମାନ୍ କ୍ଷାରିୟତା ହିସାବେ ରହିଛି ।



ପରୀକ୍ଷଣ - ୩


ପରୀକ୍ଷଣର ଲକ୍ଷ୍ୟ : ଅକ୍ସାଲିକ୍ ଏସିଡ୍ (Acid) ବେତାର କରି ପୋଟାସିୟମ୍ ପର୍ମାଙ୍ଗାନେଟ୍ (KMnO_4) ର ମାନମାନକରଣ (Standardisation) କରାଯିବ ।

ଦରକାରୀ ଜିନିଷ : ବ୍ୟୁରେଟ୍, ପିପେଟ୍, କୋନିକାଲ୍ ଫ୍ଲ୍ୟାସ୍କ

ଦରକାରୀ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ : KMnO_4 ଦ୍ରବଣ, ଅକ୍ସାଲିକ୍ ଏସିଡ୍ (N/10), ଦ୍ରବୀଭୂତ ଗନ୍ଧକାମ୍ଳ (DilH_2SO_4)

ସିଦ୍ଧାନ୍ତ : ପୋଟାସିୟମ୍ ପରମାଙ୍ଗାନେଟ୍ ଗୁଡ଼େ ଦ୍ୱିତୀୟକ ଦ୍ରବଣ (secondary solution) ଆଏ କାଏକରି ଇଥିରେ ମାଙ୍ଗାନିଜ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ର ଅଶୁଦ୍ଧତା ଥିବି, ଯେତ୍ରା ପୋଟାସିୟମ୍ ପରମାଙ୍ଗାନେଟ୍ କେ ଭାଙ୍ଗିଦେସି । ଯାହାରଲାଗି ପୋଟାସିୟମ୍ ପରମାଙ୍ଗାନେଟ୍ ମାନକକ୍ଷମତା (strength)ର ଶକ୍ତି ବେଶି ସମୟ କି କାଳ ଲାଗି ସ୍ଥିର ନାହିଁ ରହେ । ତେଣୁ, ପରମାଙ୍ଗାନେଟ୍ ଦ୍ରବଣର ଶକ୍ତି ଇତାର ବେତାର ଆଗରୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ । ପୋଟାସିୟମ୍ ପରମାଙ୍ଗାନେଟ୍ ଅମ୍ଳୀୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୁଡ଼େ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଜାରକ (oxidising agent) ଭାବେ କାମ୍ କରସି, ସେଥିର ଲାଗି ଇତାକେ ସଲଫ୍ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଉପସ୍ଥିତିଥି ୬୦ - ୭୦°C ରେ ମାନକ ଅକ୍ସାଲିକ୍ ଏସିଡ୍ ବାଗିର ଗୁଡ଼େ ବିଜାରକ (reducing agent) ବିରୁଦ୍ଧରେ ଟାଇଟ୍ରେଟ୍ କରାଯାଇପାରବ । ଟାଇଟ୍ରେସନ୍ ଆଗରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ C-C ସହଭାଜକ ବନ୍ଧନକେ ଭାଙ୍ଗିବାର ଲାଗି ଅକ୍ସାଲିକ୍ ଏସିଡ୍ କେ ଗରମ କରାଯାଏସି । ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସମୟରେ MnO_4^- କେ Mn^{2+} କେ ବିଜାରିତ ହୋଇଥିସି ଆଉ ଅକ୍ସାଲେଟ୍ ଆୟନଗୁଡ଼ିକ CO_2 କେ ଜାରିତ ହେସି । ଇ ଟାଇଟ୍ରେସନ୍ ଥି, ପୋଟାସିୟମ୍ ପରମାଙ୍ଗାନେଟ୍ ଗୁଡ଼େ ସ୍ୱୟଂ-ସୂଚକ (self-indicator) ଭାବେ କାମ୍ କରସି କାରଣ ଇତାର ଅକ୍ଷିତେସନ୍ ମୂଲ୍ୟ ବଦଳାବାର ସଙ୍ଗେ ରଙ୍ଗ କେ ବି ବଦଳାବାର କ୍ଷମତା ଅଛେ (Mn^{+7}) ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗର ଆଉ Mn^{2+} ପାନି ମାଧ୍ୟମରେ ରଙ୍ଗହୀନ) । ଟାଇଟ୍ରେସନ୍ ସମୟଥି ପୋଟାସିୟମ୍ ପରମାଙ୍ଗାନେଟ୍, ଅକ୍ସାଲିକ୍ ଏସିଡ୍ ଦ୍ୱାରା ବିଜାରିତ ହେଇ ରଙ୍ଗହୀନ ମାଙ୍ଗାନାସ୍ ଆୟନଥି ବଦଳସି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପୁରା ବିଜାରକ ବେତାର ହେସି ସେତେବେଳେ KMnO_4 ର ଗୁଡ଼େ ଅତିରିକ୍ତ ବୁଦ୍ଧା ଦ୍ରବଣକେ ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗରେ ବଦଳାଇ ଦେସି, ଯେନ୍ ଟାଇଟ୍ରେସନ୍ ର ଶେଷ ବିନ୍ଦୁ ଆଏ ।

MnO_4^- ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା :

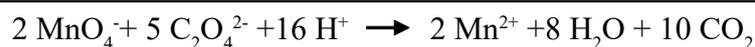

କେନ୍ଦ୍ରା କରମା :

୨୫୦ ମିଲି କୋନିକାଲ୍ ଫ୍ଲ୍ୟାସ୍କଥି ୧୦ ମିଲି N/10 ଅକ୍ସାଲିକ୍ ଏସିଡ୍ ପିପେଟ୍ କର । ଅଧା ଟେଣ୍ଡ୍ର୍ୟୁର୍ ଦ୍ରବୀଭୂତ ସଲଫ୍ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଯୁକ୍ତ ଆଉ ୫୦-୬୦° ସେଲସିୟସ୍ ତକ୍ ଗରମ କର । ତାପରେ, ଦ୍ରବଣକେ ସ୍ତାୟୀ ହାଲୁକା ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗ ପାଇବାର ତକ୍ KMnO_4 ଦ୍ରବଣ ସାଙ୍ଗେ ଟାଇଟ୍ରେଟ୍ କର । ସମାନ ସଂଖ୍ୟା ପାଏବାର ତକ୍ ଟାଇଟ୍ରେସନ୍ ବାର ବାର କର ।



ଗଣାଲେଖା :

ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ସଂଖ୍ୟା	N/10 ଅକ୍ସାଲିକ୍ ଅମ୍ଳର ଆୟତନ	ବ୍ୟୁରେଟ୍ ପଠନ (ମିଲି)		ତପାତ୍ (ମିଲିରେ)	ମନ୍ତବ୍ୟ
		ପହେଲା ବ୍ୟୁରେଟ୍ ପଠନମୂଲ୍ୟ (IBR)	ଶେଷ ବ୍ୟୁରେଟ୍ ପଠନମୂଲ୍ୟ (FBR)		
୦୧					ପାଖାପାଖି
୦୨					ସଂଗତ
୦୩					
୦୪					

ପରିକଳନ :

ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଯେ, $S_1V_1 = S_2V_2$

ଯେଉଁଠି, ଅକ୍ସାଲିକ୍ ସିଦ୍ଧି (N/10) ର ମାନକକ୍ଷମତା ଶକ୍ତି

V_1 = ଅକ୍ସାଲିକ୍ ଅମ୍ଳର, ପରିମାଣ (୧୦ ମିଲି)

S_2 = $KMnO_4$ ର ମାନକକ୍ଷମତା ଶକ୍ତି

V_2 = $KMnO_4$ ର ପରିମାଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି

$$S_2 = \frac{S_1 \times V_1}{V_2}$$

ଶେଷକଥା : ଦିଆଯାଇଥିବା ପୋଟାସିୟମ୍ ପରମାଙ୍ଗାନେଟ୍ ର ମାନକକ୍ଷମତା ଶକ୍ତିN ବାହାରିଲା ।



ପରୀକ୍ଷଣ - ୪


ପରୀକ୍ଷଣର ଲକ୍ଷ୍ୟ : ମାନକିକୃତ ପୋଟାସିୟମ୍ ପରମାଙ୍ଗାନେଟ୍ ବେଭାର୍ କରି ମୋହର ଲୁଣଥି ଫେରସ୍ ଆୟନ୍ (ଲୌହ) $[FeSO_4 (NH_4)_2 SO_4 \cdot 6H_2O]$ କେତେ ଅଛି ବାହାର କରାଯିବ ।

ଦରକାରୀ ଜିନିଷ : ବ୍ୟୁରେଟ୍, ଜଳନଳୀ, କୋନିକାଲ୍ ଫ୍ଲାସ୍କ, ବିକର, ମାପକ ସିଲିଣ୍ଡର, ଧୋଇବା ବୋତଲ, ଟେଷ୍ଟଟ୍ୟୁବ୍ ।

ଦରକାରୀ ରାସାୟନିକ ଜିନିଷ : (i) ମୋହରର ଲୁଣ ଦ୍ରବଣ, (ii) $KMnO_4$ ଦ୍ରବଣ, (iii) ଦ୍ରବୀଭୂତ H_2SO_4

ସିଦ୍ଧାନ୍ତ : ମୋହରର ଲୁଣ ଦ୍ରବଣରେ ଥିବା ଫେରସ୍ ଆୟନର ପରିମାଣ ଅନୁମୟ ମାଧ୍ୟମରେ ପୋଟାସିୟମ୍ ପରମାଙ୍ଗାନେଟ୍ ଦ୍ରବଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଟାଇଟ୍ରେଟିଂ ଦ୍ୱାରା ବାହାର କରାଯାଏ । ଇନ, ପୋଟାସିୟମ୍ ପରମାଙ୍ଗାନେଟ୍ ଗୁଡ଼େ ସ୍ୱୟଂ-ସୂଚକ ଭାବେ କାମ୍ କରନ୍ତି । ସ୍ତାୟୀ ହାଲୁକା ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗ ଦେଖାଗଲେ ଶେଷ ବିନ୍ଦୁ ବାହାର କରାଯାଏ । ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସମୟଥୁ Fe^{2+} ଜାରିତ ହେଇକରି Fe^{3+} କେ ଆଉ MnO_4^- ବିଜରିତ ହେଇକରି Mn^{2+} କେ ବଦଳି ଯାଏ ।

ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା :

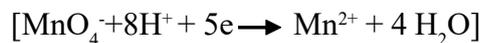

କେନ୍ଦ୍ରା କର୍ମା :

ଦିଆଯାଇଥିବା ମୋହର ଲୁଣ ଦ୍ରବଣର ୧୦ ମିଲି ପିପେଟ୍ କରି ରୁଟେ ୨୫୦ ମିଲି କୋନିକାଲ୍ ଫ୍ଲାସ୍କରେ ରଖ । ଅଧା ଟେଷ୍ଟଟ୍ୟୁବ୍ ଦ୍ରବୀଭୂତ ସଲଫ୍ୟୁରିକ୍ ଅମ୍ଳ ମିଶାଅ ଆଉ ସ୍ତାୟୀ ହାଲୁକା ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗ ପାଇବାର ତକ୍ $KMnO_4$ ଦ୍ରବଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଟାଇଟ୍ରେଟ୍ କର । ସମାନ ସଂଖ୍ୟା ପାଇବାର ତକ୍ ଟାଇଟ୍ରେସନ୍ ବାର୍ଦ୍ଧକ କର ।



ଗଣାଲେଖା :

ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ସଂଖ୍ୟା	ଦିଆଯାଇଥିବା ମୋହର ଲୁଣ ଦ୍ରବଣର ପରିମାଣ	ବ୍ୟୁରେଟ୍ ପଠନ (ମିଲି)		ତପାତ୍ (ମିଲିରେ)	ମନ୍ତବ୍ୟ
		ପହେଲା ବ୍ୟୁରେଟ୍ ପଠନମୂଲ୍ୟ (IBR)	ଶେଷ ବ୍ୟୁରେଟ୍ ପଠନମୂଲ୍ୟ (FBR)		
୦୧					ପାଖାପାଖି
୦୨					ସଂଗତ
୦୩					
୦୪					

ଗଣନା / ହିସାବ :

ମୋହରର ଲୁଣ ଦ୍ରବଣ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ KMnO_4 ଆୟତନ = V ml

୧୦୦୦ ମିଲି ୧ N KMnO_4 = ୫୫.୮୪ ଗ୍ରା.ମ Fe

୧ ମିଲି ୧ = $\text{KMnO}_4 \frac{55.84}{1000}$ Fe ର ଗ୍ରା.ମ

$\frac{X}{100}$ KMnO_4 ର V ml = $\frac{55.84}{1000} \times V \times \frac{X}{100}$ ଗ୍ରା.ମ Fe = "A" ଗ୍ରା.ମ Fe

ତେଣୁ ୧୦ ମିଲି ମୋହର ଲୁଣ ଦ୍ରବଣରେ "A" ଗ୍ରା.ମ Fe ଥିବି ।

୧୦୦୦ ମିଲି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ମୋହର ଲୁଣ ଦ୍ରବଣଥି ୧୦୦ A ଗ୍ରା.ମ./ଲିଟର Fe ଥିବି ।

ଶେଷକଥା: ଦିଆଯାଇଥିବା ମୋହର ଦ୍ରବଣରେ ଗ୍ରା.ମ./ଲିଟର Fe ଅଛି ।



ପରୀକ୍ଷଣ - ୫

ପରୀକ୍ଷଣର ଲକ୍ଷ୍ୟ : ଦିଆଯାଇଥିବା ପାନି ନମୁନାରେ ଦ୍ରବିଭୂତ ଅମ୍ଳଜାନର ପରିମାଣ କେତେ ଅଛି ବାହାର କରାଯିବ ।

ଦରକାରୀ ଜିନିଷ : ବ୍ୟୁରେଟ୍, ଷ୍ଟପର ବୋତଲ (୫୦୦ ମିଲି), ମାପକ ସିଲିଣ୍ଡର (୨୫୦ ମିଲି), ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ୍ ।

ଦରକାରୀ ରାସାୟନିକ ଜିନିଷ : (i) ମାଙ୍ଗାନସ୍ ସଲଫେଟ୍ ଦ୍ରବଣ (୪୮%), (ii) ନିଲକାଲାଇନ୍ ପୋଟାସିୟମ୍ ଆୟୋଡାଇଡ୍ ଦ୍ରବଣ, (iii) ଦ୍ରବୀଭୂତ ସଲଫ୍ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍, (iv) ମାନକ ସୋଡିୟମ୍ ଆୟୋସଲଫେଟ୍ ଦ୍ରବଣ ଆଉ (v) ସଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଷ୍ଟାର୍ଟ୍ ଦ୍ରବଣ ।

ସିଦ୍ଧାନ୍ତ : ଦ୍ରବୀଭୂତ ଅମ୍ଳଜାନ ହେଉଛି ପାନି ଗୁଣବତ୍ତାର ଗୁଡ଼େ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିମାପକ । ଇଟା ପାନିରେ ଥିବା ଜୈବ ପଦାର୍ଥର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାରକ ଲାଗି ଦରକାର ଅମ୍ଳଜାନର ପରିମାଣ । ସାଧାରଣତଃ କୋଠରି ତାପମାତ୍ରାରେ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାନିରେ ପ୍ରାୟ ୮ ମିଲି ଦ୍ରବୀଭୂତ ଅମ୍ଳଜାନ ଥିବି । ଦ୍ରବୀଭୂତ ଅମ୍ଳଜାନର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଉତ୍ତପ୍ତ ଉପକରଣ ଲାଗି ଜରୁରୀ ହେସିକାରଣ ଇଟା ଉପକରଣକେ କ୍ଷୟ ଘଟାଇଥିବି । ପାନିରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ଅମ୍ଳଜାନ ଡିଫିଜିଟେସନ୍ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ବାହାର କରାଯାଏ । ପାନିରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ଅମ୍ଳଜାନ ଦ୍ୱାରା ପୋଟାସିୟମ୍ ଆୟୋଡାଇଡ୍ କାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା (oxidation process) ଉପରେ ଆଧାରିତ୍ ଥାଏ । ଆୟୋଡୋମେଟ୍ରିକ୍ ପଦ୍ଧତି (ଡିଫିଜିଟେସନ୍) ଇ ତଥ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଯେ କ୍ଷାରୀୟ ମାଧ୍ୟମରେ, ଦ୍ରବୀଭୂତ ଅମ୍ଳଜାନ Mn^{2+} ରୁ Mn^{4+} କୁ ଜାରିତ କରାଯିବ, ଯେଉଁଠି ଅମ୍ଳୀୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆୟୋଡାଇଡ୍ କେ ମୁକ୍ତ ଆୟୋଡିନରେ ଜାରଣ କରାଯାଉଥିବା ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ଆୟୋଡିନର ପରିମାଣକେ ମାନକ ସୋଡିୟମ୍ ଆୟୋସଲଫେଟ୍ ଦ୍ରବଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଶୋଧନ କରାଯାଏ ।

ଯେହେତୁ ପାନିରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ଅମ୍ଳଜାନ ଆଣବିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବି ସେଥିପାଇଁ ଇଟା ପୋଟାସିୟମ୍ ଆୟୋଡାଇଡ୍ ଦ୍ରବଣ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବାକୁ ସମାନ ନାହିଁ, ତେଣୁ ପୋଟାସିୟମ୍ ଆୟୋଡାଇଡ୍ (KI) ଆଉ ଅମ୍ଳଜାନ ଭିତରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆନୁବାର ଲାଗି ଅମ୍ଳଜାନ ବାହକ (ଯେଉଁଠି କି ମାଙ୍ଗାନସ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍) ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ।





କେନ୍ଦ୍ରା କରମା :

ଉପରେ ପ୍ରାୟ ୧୦ ମିଲି ଖାଲିସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ୨୫୦ ମିଲି ପାନି ନମୁନା ବନ୍ଦ ବୋତଲରେ ନିଅ । (ଯେତେଦୂର ସମ୍ଭବ ପବନ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବାକୁ ଏଡ଼ାଇବା) । ତୁରନ୍ତ ୫ ମିଲି ମାଙ୍ଗାନସ୍ ସଲଫେଟ୍ ଦ୍ରବଣ ଆଉ ତା'ପରେ ୫ ମିଲି କ୍ଷାରୀୟ ପୋଟାସିୟମ୍ ଆୟୋଡାଇଡ୍ ଦ୍ରବଣକୁ ପିପେଟ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ମିଶାଅ, ଯଦୁ ନିଅ ଯେ ଦ୍ରବଣଟି ପାନିର ପୃଷ୍ଠ ତଳେ ଭଲ ଭାବେ ବିତରଣ ହେସି । (କ୍ଷାରୀୟ ଦ୍ରବଣରେ KI ସୋଡ଼ିୟମ୍ ଆଜାଇଡ୍ ଥିସି, ଯେନ୍ଟା ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଯେକୌଣସି ଜାରକର ଯଦୁ ନିଏ, ଯେନ୍ଟା ପୋଟାସିୟମ୍ ଆୟୋଡାଇଡ୍ (KI) ରୁ ଆୟୋଡିନ୍ ମୁକ୍ତ କରବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିସି) । ତା'ପରେ ମିଶ୍ରଣର ସଠିକ୍ତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରବାର ଲାଗି ବୋତଲକୁ ଅନେକ ଥର ଡଳ-ଉପର କରବାର ଆଉ ଗଠିତ ଅବଶେଷକୁ (precipitate) କିଛି ମିନିଟ୍ ଲାଗି ସ୍ଥିର ହେବାକୁ ଦିଆଯାଏସି । ତା'ପରେ ୩ ମିଲି ଦ୍ରବୀଭୂତ H_2SO_4 ର ଦ୍ରବଣକୁ ବୁନ୍ଦା ବୁନ୍ଦା କରି ମିଶାଯାଏସି ଯେତକିବେଳ ତକ୍ ଅବଶେଷକୁ ଦ୍ରବୀଭୂତ ନାଇ ହେଇ, ଇଟା ଧାରେ ଧାରେ ଗୁଟେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଦ୍ରବଣ ପ୍ରଦାନ କରବା । ଆଲମାରା ଭିତରେ ୫ ମିନିଟ୍ ଲାଗି ଦ୍ରବଣକୁ ଅନ୍ଧାରରେ ରଖ । ତା'ପରେ, ୨୦ ମିଲି ଦ୍ରବଣକୁ ପିପେଟ୍ କର ଆଉ ବ୍ୟୁରେଟ୍‌ରୁ ମାନକ (standard) ସୋଡ଼ିୟମ୍ ଥିଓସଲଫେଟ୍ ଦ୍ରବଣ ସଙ୍ଗେ ଇଟାକୁ ଟାଇଟ୍ରେଟ୍ କର । ଯେତେବେଳେ ଦ୍ରବଣର ରଙ୍ଗ ବହୁତ ହାଲୁକା ହଳଦିଆ (ନଡ଼ା ବାଗିର ରଙ୍ଗ) ହେଇଯିବା, ସେତେବେଳେ ୧ ମିଲି ସଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସ୍କାର୍ଟ ସୂଚକ ମିଶାଅ ଆଉ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ନାଇ ଦିଶ୍ବାର ତକ୍ ଟାଇଟ୍ରେସନ୍ ଜାରି ରଖ ।

ଗଣାଲେଖା :

ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ସଂଖ୍ୟା	ପାନି ନମୁନାର ଆୟତନ (ମିଲି)	ବ୍ୟୁରେଟ୍ ପଠନ (ମିଲି)		ତ୍ୟାଡ୍ (ମିଲିରେ)	ମତ୍ତବ୍ୟ
		ପହେଲା ବ୍ୟୁରେଟ୍ ପଠନମୂଲ୍ୟ (IBR)	ଶେଷ ବ୍ୟୁରେଟ୍ ପଠନମୂଲ୍ୟ (FBR)		
୦୧					ପାଖାପାଖି
୦୨					ସଂଗତ
୦୩					
୦୪					



ଗଣନା / ହିସାବ :

୧୦୦୦ ମିଲି ୧ N $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ ଦ୍ରବଣ = ୮ ଗ୍ରାମ ଅମ୍ଳଜାନ

୧ ମିଲି ୧ N $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ ଦ୍ରବଣ = ୮ ମି.ଗ୍ରାମ ଅମ୍ଳଜାନ

V ମିଲି “a N/10” $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ ଦ୍ରବଣ = $\frac{8aV}{10}$ ଅମ୍ଳଜାନର ମି.ଗ୍ରା.

୨୦ ମିଲି ପାନିରେ $\frac{8aV}{10}$ ଗ୍ରା.ମ ମି.ଗ୍ରାମ ଅମ୍ଳଜାନ ଥିବି ।

୧୦୦୦ ମିଲି ପାନିରେ $\frac{8YZ}{10} \times \frac{୧୦୦୦}{୨୦}$ ମି.ଗ୍ରାମ/ଲିଟର ଅମ୍ଳଜାନ ଥିବି
= “A” ମି.ଗ୍ରାମ/ଲିଟର ଅମ୍ଳଜାନ
= ଅମ୍ଳଜାନର “A” ppm

ଶେଷକଥା : ଦିଆଯାଇଥିବା ପାନି ନମୁନାଥି ଦ୍ରବୀଭୂତ ଅମ୍ଳଜାନର ପରିମାଣ..... ppm ଆଏ ।



ପରୀକ୍ଷଣ - ୭

ପରୀକ୍ଷଣର ଲକ୍ଷ୍ୟ : ଦିଆଯାଇଥିବା ବ୍ଲୁଟିଂ ପାଉଡରରେ କେତେ କ୍ଲୋରିନ୍ ଅଛି ବାହାର କରାଯିବ ।

ଦରକାରୀ ଜିନିଷ : ବ୍ଲୁରେଟ୍, ଜଳନଳୀ, କୋନିକାଲର୍ ପ୍ଲ୍ୟାଷ୍ଟିକ୍, କାଚ ପାତ୍ର, ମାପ ସିଲିଣ୍ଡର, ଧୋଇବା ବୋତଲ ।

ଦରକାରୀ ରାସାୟନିକ ଜିନିଷ : ବ୍ଲୁଟିଂ ପାଉଡର ଦ୍ରବଣ KI (୧୦%) ଦ୍ରବଣ, ଦ୍ରବୀୟ (dilute) ଆସେଟିକ୍ ଏସିଡ୍, N/୧୦ ସୋଡିୟମ୍ ଆସୋଲ୍‌ଫେଟ୍ ଦ୍ରବଣ, ଷ୍ଟାର୍ଚ୍ଚ ସୂଚକ ।

ସିଦ୍ଧାନ୍ତ : ବ୍ଲୁଟିଂ ପାଉଡର ଗୁଡେ ଭଲ ଜୀବାଣୁନାଶକ ଯେନିଂ ପାନିଥି ମିଶି ରୋଗ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ଜୀବାଣୁକେ ମାର୍ଯ୍ୟି । ବ୍ଲୁଟିଂ ପାଉଡରର ଜୀବାଣୁନାଶକ କାର୍ଯ୍ୟ ହାଇପୋକ୍ଲୋରସ୍ ଅମ୍ଳ (HOCL) ଆଉ ବାହାରୁଥିବା ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ (na-scent) ଅମ୍ଳଜାନ ଯୋଗୁଁ ହେଇଥିବି । ଇଟା ଗୁଡେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଜାରକ (oxidizing agent) ଆଉ ହାଇଗ୍ରେଫୋପିକ୍ (ପରିବେଶୁଥି ଥିବା ଆର୍ଦ୍ରତା ଶୋଷଣ କରିବାର କ୍ଷମତା) ପ୍ରକୃତିର ଆଏ ।


ବ୍ଲୁଟିଂ ପାଉଡରର ଗୁଣବତ୍ତା ଇଥିରେ ଥିବା କ୍ଲୋରିନ୍‌ର ପରିମାଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି । ଉପଲକ୍ଷ କ୍ଲୋରିନ୍‌ର ପ୍ରତିଶତକେ ପ୍ରତି ଶହେ ଅଂଶ ବ୍ଲୁଟିଂ ପାଉଡରରେ ଜାରଣ (ଅକ୍ସିଡେସନ୍) ଲାଗି ଉପଲକ୍ଷ କ୍ଲୋରିନ୍‌ର ପରିମାଣ ଭାବେ ପରିଭାଷିତ କରାଯାଇପାରିବି । ସେଥିରୁଲାଗି ଉପଲକ୍ଷ କ୍ଲୋରିନ୍‌ର ପ୍ରତିଶତ ଯେତେ ଅଧିକା, ବ୍ଲୁଟିଂ ପାଉଡରର ଗୁଣବତ୍ତା ସେତେ ଭଲ । ଯଦିବି ବ୍ଲୁଟିଂ ପାଉଡରରେ ପ୍ରାୟ ୫-୭% କ୍ଲୋରିନ୍ ଥିବି ଲେକିନ୍ ଗୁଡେ ଭଲ ଗୁଣବତ୍ତା ବ୍ଲୁଟିଂ ପାଉଡରରେ ଉପଲକ୍ଷ କ୍ଲୋରିନ୍‌ର ମାତ୍ର ୩୫-୩୮% ଥିବି । କାରଣ ରଖା ହୋଇଥିବା ବ୍ଲୁଟିଂ ପାଉଡର ଧାରେ ଧାରେ ବିଘଟନ ହେସିଆଉ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ ଆଉ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ କ୍ଲୋରେଟ୍‌ରେ ବଦଳିଯାଏସି । ସେଥିରୁଲାଗି ସମୟ ସରବାର ସାଙ୍ଗେ ଉପଲକ୍ଷ କ୍ଲୋରିନ୍‌ର ପ୍ରତିଶତ ବି କମିଯାଏସି ।



ନିତି :

ପାନିରେ ମୁକ୍ତ ହେଉଥିବା କ୍ଲୋରିନ୍, KI ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ଆୟୋଡିନ୍ ରୂପରେ ମୁକ୍ତ ହେସି । ଇ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ଆୟୋଡିନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଚ୍ଚକୁ ସୂଚକ ଭାବେ ବେଭାର କରି ସୋଡିୟମ୍ ଆସୋଲ୍‌ଫେଟ୍‌ର ଗୁଡେ ମାନକ (standard) ଦ୍ରବଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଟାଇଟ୍ରେଟ୍ କରାଯାଏସି ।

ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା :

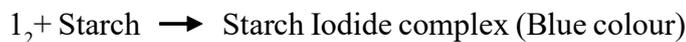



କେନ୍ଦ୍ରା କରମା :

୨୫୦ ମିଲି କୋନିକାଲ୍ ଫ୍ଲାସ୍କରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା କ୍ଲିଫ୍ ପାଉଡର ଦ୍ରବଣର ୧୦ ମିଲି ପିପେଟ୍ କର । ୧୫ ମିଲି ୧୦% KI ଦ୍ରବଣ ଆଉ ୧୦ ମିଲି ଦ୍ରବଣ (diluted) ଆସେଟିକ୍ ଏସିଡ୍ ଦ୍ରବଣ ମିଶାଅ । କୋନିକାଲ୍ ଫ୍ଲାସ୍କକୁ ଡ୍ରାଏ ଗ୍ଲାସ୍ ସହିତ ଘୋଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ଧାରରେ ୫ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ରଖନ୍ତୁ । ୫ ମିନିଟ୍ ପରେ ମୁକ୍ତ ଆୟୋଡିନ୍ କୁ ସ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଟ ହାଇପୋ (hypo) ଦ୍ରବଣ ସହ ଟାଇଟ୍ରେଟ୍ କର ଯେଉଁଥିରେ ଲାଗି ହାଲକା ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ଆସିବ । ୨ ରୁ ୩ ବୁନ୍ଦା ସ୍ଟାର୍ଟ ସୂଚକ ମିଶାଅ ଆଉ ରଙ୍ଗହୀନ ଦ୍ରବଣ ହେବାର୍ ତକ୍ ଟାଇଟ୍ରେସନ୍ କର, ଯାହା ହେଉଛି ଶେଷ ବିନ୍ଦୁ । ଟାଇଟ୍ରେଟ୍ ମୂଲ୍ୟକୁ ଧାନ ଦିଅ । ସମାନ୍ ମୂଲ୍ୟ ପାଇବାର୍ ଲାଗି ଉପରୋକ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତିନିଥର ପୁନରାବୃତ୍ତି କର ।

ଗଣାଲେଖା :

ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ସଂଖ୍ୟା	ଦିଆଯାଇଥିବା CaOCl ₂ ଦ୍ରବଣର ଆୟତନ (ମିଲି)	ବ୍ୟୁରେଟ୍ ପଠନ (ମିଲି)		ତପାଉ (ମିଲିରେ)	ମନ୍ତବ୍ୟ
		ପହେଲା ବ୍ୟୁରେଟ୍ ପଠନମୂଲ୍ୟ (IBR)	ଶେଷ ବ୍ୟୁରେଟ୍ ପଠନମୂଲ୍ୟ (FBR)		
୦୧					ପାଖାପାଖି
୦୨					ସଂଗତ
୦୩					
୦୪					

ଗଣନା / ହିସାବ :

କ୍ଲିଫ୍ ପାଉଡର ଦ୍ରବଣର ସାନ୍ଦ୍ରତା = ୧୦ ଗ୍ରାମ / ଲିଟର

ଟାଇଟ୍ରେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ = X ମିଲି

ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ :

୧୦୦୦ ମିଲି ୧ N Na₂S₂O₃ = ୩୫.୫ ଗ୍ରାମ କ୍ଲୋରିନ୍

୧ ମିଲି ୧ N Na₂S₂O₃ ଦ୍ରବଣ = ୦.୦୩୫ ଗ୍ରାମ କ୍ଲୋରିନ୍

୧ ମିଲି "a N/10" Na₂S₂O₃ = ୦.୦୩୫ a ଗ୍ରାମ କ୍ଲୋରିନ୍

X ମିଲି "a N/10" Na₂S₂O₃ = ୦.୦୩୫ aX ମି.ଗ୍ରାମ କ୍ଲୋରିନ୍



ଏବେ ଦିଆଯାଇଥିବା ୧୦ ମିଲି ବ୍ଲୁଟିଂ ପାଉଡର ହ୍ରାସ ୦.୦୦୩୫ aX ଗ୍ରାମ କ୍ଲୋରିନ୍ ଅଛି ।

ଦିଆଯାଇଥିବା ୧୦୦୦ ମିଲି ବ୍ଲୁଟିଂ ପାଉଡର ହ୍ରାସ $(0.0035 \times aX / 9.8 \times 1000) = A$ ଗ୍ରାମ କ୍ଲୋରିନ୍ ଥିବି ।

ଉପଲବ୍ଧ କ୍ଲୋରିନ୍ % :

୧୦ ଗ୍ରାମ CaOCl_2 ହ୍ରାସ A ଗ୍ରାମ ଉପଲବ୍ଧ କ୍ଲୋରିନ୍ ଅଛି

୧୦୦ ଗ୍ରାମ CaOCl_2 ହ୍ରାସ $10A$ ଗ୍ରାମ ଉପଲବ୍ଧ କ୍ଲୋରିନ୍ ଅଛି

ନିଷ୍ପତ୍ତି : ଦିଆଯାଇଥିବା ବ୍ଲୁଟିଂ ପାଉଡର ହ୍ରାସଉପଲବ୍ଧ କ୍ଲୋରିନ୍ ଅଛି ।



ପରୀକ୍ଷଣ - ୭

ପରୀକ୍ଷଣର ଲକ୍ଷ୍ୟ : ରୂନ ପଥରରେ କେତେ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ବାହାର କରାଯିବ ।

ଦରକାରୀ ଜିନିଷ : ରୂପରେଟ୍, ପିପେଟ୍, କୋନିକାଲର ପ୍ଲ୍ୟାସ୍ଟିକ୍ ।

ଦରକାରୀ ରାସାୟନିକ ଜିନିଷ : KMnO_4 ଦ୍ରବଣ, ମାନକ ଆକ୍ସାଲିକ୍ ଏସିଡ୍ (N/10), ୮% ଆମୋନିୟମ୍ ଅକ୍ସାଲେଟ୍ ଦ୍ରବଣ, NH_4Cl , ଆମୋନିଆ ।



ସିଦ୍ଧାନ୍ତ : ରୂନ ପଥର ମୂଳତଃ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍ ଗଠିତ ଲେକିନ୍ କମ୍ ପରିମାଣର ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍ ଥାଏ । ତେଲୋମାଲଟ୍ ହେଉଛେ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍ ଆଉ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍ ର ଗୁଟେ ସମତୁଲ୍ୟ ଯୌଗିକ । ଇ ଖଣିଜଗୁଡ଼ାକ ସାଧାରଣତଃ ଲୌହ, ଆଲୁମିନିୟମ୍, ସିଲିକନ୍ (ମୁକ୍ତ କିମ୍ବା ମିଶ୍ରିତ) ଆଉ ଜୈବ ପଦାର୍ଥର ଅକ୍ସାଇଡ୍ ସହ ଦୃଷ୍ଟ ହେଇଥାଏ । ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ାକର ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରୟୋଗ ଅଛେ ଆଉ ଖଣିଜର ଗୁଣବତ୍ତା ଆଉ ଗୁଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବାଣିଜ୍ୟିକ ପ୍ରୟୋଗ ଲାଗି ଇତର ଉପଯୁକ୍ତତା CaCO_3 , MgCO_3 ଆଉ ଉପସ୍ଥିତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପାଦାନର ପରିମାଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି । ସେଥିରୁ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରାୟତଃ ଆବଶ୍ୟକ ହେଇଥାଏ । ଇ ପଦ୍ଧତିଥି ରୂନ ପଥର ପାଉଡରକେ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଅମ୍ଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ କରାଯାଏ ଆଉ ଆମୋନିଆ ଥାଇକରି ଅକ୍ସାଲିକ୍ ଏସିଡ୍ କିମ୍ବା ଆମୋନିୟମ୍ ଅକ୍ସାଲେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଦ୍ରବଣରେ ଥିବା କ୍ୟାଲସିୟମ୍ କେ ଅକ୍ସାଲେଟ୍ ଭାବରେ ଅବଶୋଷିତ ହେଇଥାଏ । ଥୋଇଲା ପରେ ଅବଶୋଷିତ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଅକ୍ସାଲେଟ୍ କେ ଦ୍ରବୀୟ ସଲଫ୍ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରାଯାଏ ଆଉ ମୁକ୍ତ ହେଇଥିବାର ଅକ୍ସାଲିକ୍ ଏସିଡ୍ କେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାନକ KMnO_4 ଦ୍ରବଣ ସଙ୍ଗେ ଟାଇଟ୍ରେଟ୍ କରାଯାଏ । ଟାଇଟ୍ରେସନ ଲାଗି ଦରକାର KMnO_4 ଆୟତନରୁ, ଇ ଖଣିଜ ପଥରରେ ଥିବା କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ର ମାତ୍ରା ହିସାବ କରାଯାଇପାରେ ।

$$1 \text{ ml of } 1 \text{ N } \text{KMnO}_4 = 0.020 \text{ gm of Ca}$$

$$1 \text{ ml of } 1 \text{ N } \text{KMnO}_4 = 0.028 \text{ gm CaO}$$

$$1 \text{ ml of } 1 \text{ N } \text{KMnO}_4 = 0.050 \text{ gm of CaCO}_3$$

ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା :

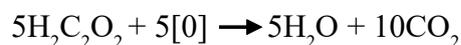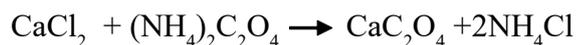



କେନ୍ଦ୍ରା କରମା :

ଗୁଟେ ବିକରରେ ୧ ଗ୍ରାମ ଚୂନ ପଥରକେ ସଠିକ୍ ଭାବେ ଓଜନ କର ଆଉ ଖଣିଜ ପଥରକେ ଦ୍ରବୀଭୂତ କରବାର ଲାଗି ଇଟାକେ ଅଳ୍ପ ଦ୍ରବ୍ୟମ୍ବ HCl ସହ ବିଶୋଧନ କର । ଦେଖିବ ଯେନତା CO_2 ଗ୍ୟାସ୍ ଦୁତଗତିରେ ବାହାରିବା ଲାଗି ଦ୍ରବଣ ନଷ୍ଟ ନାଇ ହୁଏ, ସେଥିରଲାଗି ବିକେ ବୃତ୍ତାକାର କାଚ ଥି ଘୋଡ଼ାଇ ରଖ । ସବୁ ଚୂନ ପଥର ଦ୍ରବୀଭୂତ ହେଲା ପରେ ବୃତ୍ତାକାର କାଚକେ ପାଣିଥି ଧୁଇକରି ସେଇ ବାକର ରେ ମିଶାଅ । ତାପରେ ଆମୋନିଆକେ ମିଶାଇକରି ଦ୍ରବଣକେ କ୍ଷାରୀୟ କର । ତାପରେ ୧ ଗ୍ରାମ ଆମୋନିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ (NH_2Cl) ମିଶାଅ ଆଉ ଦ୍ରବଣଟା ଦ୍ରବିଭୂତ ହେବାର ତକ୍ ମିଶାଅ । ମିଶ୍ରଣ ଜାରିରହୁ ଅଧିକା ପରିମାଣର ୮% ଆମୋନିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଦ୍ରବଣକେ ଆଉ ଦ୍ରବୀଭୂତ କର । ତାହାପରେ ଦ୍ରବଣକେ ଫୁଟାଅ ଆଉ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଅବଶେଷକେ ସ୍ଥିର ହେବାକେ ଦିଅ । ସ୍ପଷ୍ଟ ଦ୍ରବୀୟକେ ଛାଣଣା କାଗଜ ଦ୍ୱାରା ଅଲଗା କର, କ୍ଲୋରାଇ ଆଉ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଆୟନ (କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଲାଗି $AgNO_3$ ଆଉ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଲାଗି ଗରମ ଏସିଟିଲେଟେଡ୍ ଦ୍ରବୀୟ $KMnO_4$ ସହ ପରୀକ୍ଷା କରି) ମୁକ୍ତ ନାଇ ହେବାର ତକ୍ କମ୍ ଆମୋନିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ ଯୁକ୍ତ ଗରମ ପାତନ ପାନି ସହ ଅବଶେଷକେ ଅନେକ ଥର ଧୁଇ ଦିଅ । ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ବାହାର କରବାର ଲାଗି ଇ ଅବଶେଷକେ ସଂରକ୍ଷଣ କର । ଦରକାର ହେଲେ, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ କେ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ପାଇରୋଫସଫେଟ୍ ରୂପେ ବାହାର କର ।

ଫନେଲ ତଲେ ଅବଶେଷ ଥିବା ବିକରକେ ରଖ ଆଉ ଛାଣଣା କାଗଜ ଥିବା କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ କେ ଦ୍ରବୀଭୂତ କରିବାର ଲାଗି ଫିଲ୍ଟର ପେପରଥି ୨୦ ରୁ ୨୫ ମିଲି ୫ NH_2SO_4 କେ ମିଶାଅ । ଇ ଏସିଡ୍ ବିକରଥି ଥିବା କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଅବଶେଷକେ ବି ଦ୍ରବୀଭୂତ କରିଦେସି । ଛାଣଣା କାଗଜ କେ ପାତନ ପାଣିଥି ଧୁଇ ଦିଅ ଆଉ ସେଇ ଧୁଆ ପାଣି ବି ସମାନ ବିକରଥି ସଂଗ୍ରହ କର । ଇ ଦ୍ରବଣକେ ପରିମାଣାତ୍ମକ ଭାବେ ୨୫୦ ମିଲି ମାପ ଫ୍ଲ୍ୟାସ୍ ଥି ସ୍ଥାନାନ୍ତର କର, ଆଉ ଇଥିରେ ଚିହ୍ନ ତକ୍ ପାତନ ପାଣି ଭର ଆଉ ଦ୍ରବଣକେ ଭଲ ଭାବେ ମିଶାଅ । ୨୫ ମିଲି ଦ୍ରବଣକେ ଗୁଟେ କୋନିଜାଲ ଫ୍ଲ୍ୟାସ୍ କେ ନିଅ, ସେଥିରେ ୧୦ ମିଲି ଦ୍ରବୀୟ H_2SO_4 ମିଶ୍ରଣ କରି ଦ୍ରବଣକେ ପ୍ରାୟ ୭୦ °C ଥି ଗରମ କର ଆଉ ମାନକ $KMnO_4$ ଦ୍ରବଣ (ଯାହା ପରେ ପହେଲା ମାନକ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଏସିଡ୍ ଦ୍ରବଣ ସହିତ ମାନକୀକରଣ କରାଯାଇଥିଲା) ସାଙ୍ଗେ ଟାଇଟ୍ରେଟ୍ କର ।

ଗଣାଲେଖା :

ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ସଂଖ୍ୟା	ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଏସିଡ୍ ଦ୍ରବଣର ପରିମାଣ	ବ୍ୟୁରେଟ୍ ପଠନ (ମିଲି)		ତପ୍ତ (ମିଲିରେ)	ମିଶ୍ରଣ
		ପହେଲା ବ୍ୟୁରେଟ୍ ପଠନମୂଲ୍ୟ (IBR)	ଶେଷ ବ୍ୟୁରେଟ୍ ପଠନମୂଲ୍ୟ (FBR)		
୦୧					
୦୨					
୦୩					
୦୪					



ପରିକଳନ :

ନିଆଯାଇଥିବା ପଥରର ଓଜନ = ୧ ଗ୍ରାମ

ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅକ୍ସାଲିକ୍ ଏସିଡ୍ ଦ୍ରବଣର ଆୟତନ = ୨୫୦ ମି.ଲି.

ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟାଇଟ୍ରେସନ୍ ଲାଗି ନିଆଯାଇଥିବା ଅକ୍ସାଲିକ୍ ପରିମାଣ = ୨୫ ମି.ଲି.

KMnO_4 ଦ୍ରବଣର ଆୟତନ = X ml

KMnO_4 ର ମାନକୀରଣ :

୨୫ ମିଲି N/୧୦ ଅକ୍ସାଲିକ୍ ଏସିଡ୍ = ୨୫ ମି.ଲି. N/୧୦ KMnO_4 ଦ୍ରବଣ

ସାଧାରଣତା KMnO_4 ର ମାନକ N/୧୦

ଏବେ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ

୧ ମିଲି ୧ N KMnO_4 = ୦.୦୨ ଗ୍ରାମ Ca

୧୯.୩ ମିଲି N/୧୦ KMnO_4 = ୦.୦୨ x X x ୧/୧୦ ଗ୍ରାମ Ca

ତେଣୁ, ୨୫ ମିଲି ଦ୍ରବଣଥି ୦.୦୨ x X ଗ୍ରାମ Ca ଥିବି

୨୫୦ ମିଲି ଦ୍ରବଣଥି ୦.୦୨ x X ଗ୍ରାମ Ca ଥିବି

ଏବେ, ୧ ଗ୍ରାମ ପଥରଥି ୦.୦୨ x X ଗ୍ରାମ Ca ଅଛି

୧୦୦ ଗ୍ରାମ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥଥି ୦.୦୨ x X x ୧୦୦ ଗ୍ରାମ ଥିବି = x ଗ୍ରାମ Ca

% ଧାତୁଥି ଥିବା Ca = ୩୮.୬% = ୯୬.୫% CaCO_3

ନିଷ୍ପତ୍ତି : ନିଆଯାଇଥିବା ବୃନ ପଥରରେ x% Ca ବାହାରିଲା ।



ପରୀକ୍ଷଣ - ୮

ପରୀକ୍ଷଣର ଲକ୍ଷ୍ୟ : ପେନସିଲ-ମାର୍ଚେନ୍‌ସ୍ ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ପଏଣ୍ଟ୍ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରି ତେଲର ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ପଏଣ୍ଟ୍ ବାହାର କରି ।

ଦରକାରୀ ଜିନିଷ : ପେନସିଲ-ମାର୍ଚେନ୍‌ସ୍ ବନ୍ଦ କପ୍ ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ପଏଣ୍ଟ୍ ଉପକରଣ, ଅର୍ମୋସିଟର, ମାପକ ସିଲିଣ୍ଡର, LV ବିକର) ।

ଦରକାରୀ ରାସାୟନିକ ଜିନିଷ : ଦିଆଯାଇଥିବା ତେଲ ନମୁନା

ସିଦ୍ଧାନ୍ତ : ତେଲର ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ବିନ୍ଦୁକୁ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ତାପମାତ୍ରା ଭାବେ ପରିଭାଷିତ କରାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ତେଲର ଉପର ସ୍ତରରେ ଉପକରଣ ଦେଖି, ଯେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିକରି ଗୁଡେ ଉପକରଣ ମିଶ୍ରଣ ତିଆରି କରାଯାଏ ଆଉ ପାଇଲଟ୍ ଶିଖା ପ୍ରୟୋଗ କରଲେ ଆଲୋକର ଝଲସ ଦେଖି । ଇ ନିଆଁର ବିପଦକୁ ଅଟକାଇବାକୁ ଲାଗି ଦରକାର ତେଲର ଅସ୍ଥିରତା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଖି ।

ଅଗ୍ନିବିନ୍ଦୁ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ କମ୍ ତାପମାତ୍ରା ଯେତେବେଳେ ତେଲ ଦ୍ୱାରା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବାଷ୍ପ ବଢ଼ିଯାଏ, ଆଉ ପବନ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିକରି ଗୁଡେ ମିଶ୍ରଣ ତିଆରି କରାଯାଏ । ଯେତେବେଳେ ପାଇଲଟ୍ ଶିଖା ପାଖକୁ ମିଶ୍ରଣ ପାଖକୁ ଅନାଯାଏ ଇଟା ଅତିକମ୍ରେ ୫ ସେକେଣ୍ଡ ଲାଗି ଜଳିଯାଏ ।

ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ବିନ୍ଦୁ ତେଲର ଅସ୍ଥିରତା ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଗୁଡେ ଆଭାସ ଦେଖି ସେଥିରୁ ଲାଗି ଉପାଦାନ ସମାନତା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଲାଗି ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଉପଯୋଗୀ ତେଲର ଅଗ୍ନି ବିନ୍ଦୁ ଇଡାର ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ବିନ୍ଦୁଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୪୦° ଅଧିକ । ଗୁଡେ ଲୁହ୍ରିକେଣ୍ଡର ବ୍ୟବହାର, ପରିବହନ ଆଉ ସଂରକ୍ଷଣ ସମୟରେ ଅଗ୍ନି ବିପଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ । ପେନସିଲ ମାର୍ଚେନ୍‌ସ୍ ବନ୍ଦ କପ୍ ଉପକରଣ ବେତାର କରି ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ଆଉ ଅଗ୍ନି ବିନ୍ଦୁ ବାହାର କରାଯାଇପାରେ ।


କେନ୍ଦ୍ରା କର୍ମା :

ଉପକରଣରେ ଦିଆଯାଇଥିବା କପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ତେଲ ନମୁନା ନିଅ । ଢାକଣା ସଙ୍ଗେ କପ୍‌କୁ ବନ୍ଦ କର ଆଉ ଅର୍ମୋସିଟରକୁ ଇଡାର ଜାଗାରେ ରଖ । ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଗରମ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଏକା ଭାବେ ସମନ୍ୱୟ କର ଯେ ୭ ମିନିଟରେ ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରାୟ ୧ °C ବଢ଼ିଯିବ । ପାଇଲଟ୍ ଅଗ୍ନିକୁ ଜଳୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ରଖି ଆଉ ଲଗାତର ଘାଣ୍ଟିବା ସହ ତାପନ୍ କରି ରଖ । ପାଇଲଟ୍ ଶିଖା ଜଳାଇ ରଖ । ଆନୁମାନିକ ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ପଏଣ୍ଟ୍ ପାଇବାର ଲାଗି ପ୍ରତି ୫ °C ବ୍ୟବଧାନ ପ୍ରାୟ ୫ ଫଳାଫଳ ନିଅ । ତେଲକୁ ୫ °C ଅଧିକରା ସହ ଅଣ୍ଡା ହେବାକୁ ଦିଅ ଆଉ ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ପଏଣ୍ଟ୍ ପାଇବାର ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ୧ °C ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ମାପନ ଫଳାଫଳ ନିଅ । ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ହେଲା ପରେ, ତାପମାତ୍ରାକୁ ପ୍ରାୟ ୫ °C ଅଧିକ ବଢ଼ିବା କେ ଦିଅ ଆଉ ଗରମ କରବାର ବନ୍ଦ କର । ଲଗାତର ଅଧିକରା ସହ ତେଲକୁ ଅଣ୍ଡା ହେବାକୁ ଦିଅ ଆଉ ପ୍ରତି ୧ °C ତାପମାତ୍ରା କମ୍ ସହ ମାପନ ଫଳାଫଳ ନିଅ ଯେତେବେଳେ ତାପମାତ୍ରା କେନ୍ଦ୍ରୀ ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ନାହିଁ । ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ହେଉଥିବା ସବୁଠାରୁ କମ୍ ତାପମାତ୍ରା ତେଲର ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ବିନ୍ଦୁ ଦେଖି ।



ଗଣାଲେଖା : ୦୧ (ଆନୁମାନିକ ଫ୍ଲୁଇଦ ପଏଣ୍ଟ ଲାଗି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ)

ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ସଂଖ୍ୟା	ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି (ଃ ^୦ ତାପ ବୃଦ୍ଧି)	ମତ୍ତବ୍ୟ
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

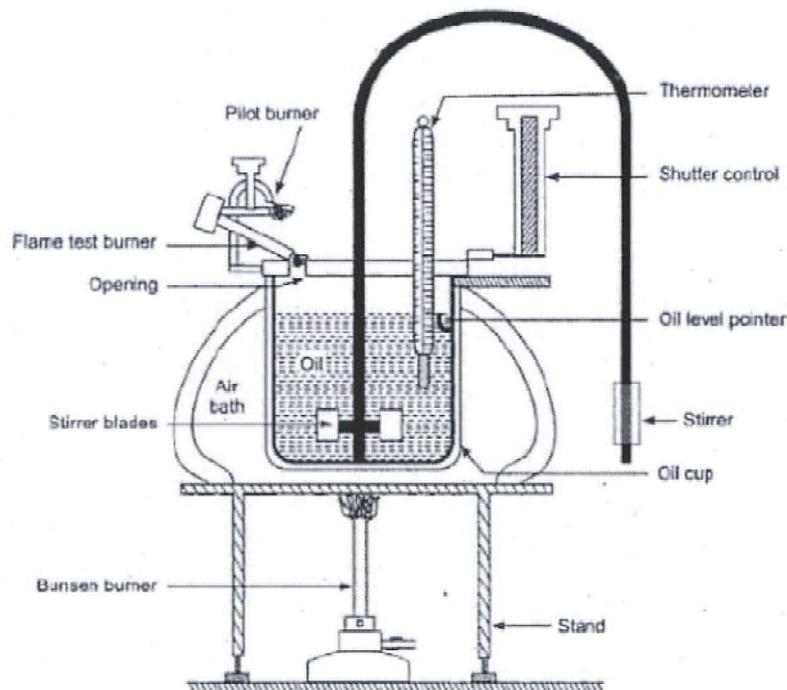

ସାରଣୀ ୦୧ : ପେନସିଲ ମାର୍କିଂ ଫ୍ଲୁଇଦ ପଏଣ୍ଟ ଉପକରଣ



ଗଣାଲେଖା : ୦୨ (ପ୍ଳାସ୍ତ ପଦାର୍ଥ ନିର୍ଣ୍ଣୟ)

ସଂଖ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ	ତାପମାତ୍ରା (୧ °C) ବୃଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା	ମତ୍ତବ୍ୟ	ସଂଖ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ	ତାପମାତ୍ରା (୧ °C) ବୃଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା	ମତ୍ତବ୍ୟ
1			1		
2			2		
3			3		
4			4		
5			5		
6			6		
7			7		
8			8		
9			9		
10			10		

ନିଷ୍ପତ୍ତି :

ଦିଆଯାଇଥିବା ତେଲର ପ୍ଳାସ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ହେଉଛି _____ °C = _____ °F । ଦିଆଯାଇଥିବା ତେଲର ଅଗ୍ନି ବିନ୍ଦୁ
ହେଉଛି _____ °C = _____ °F ।



ପରୀକ୍ଷା - ୯

ପରୀକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ : ରେଡଭର୍ଡ୍ ଭିସକୋମିଟର ବ୍ୟବହାର କରି ଗୁଟ୍ଟେ ଲୁବ୍ରିକେଟିଂ ତେଲ କେତେ ଗାଢ଼ ସାନ୍ଦ୍ରତା ବାହାର କରାଯିବ ।

ଦରକାରୀ ଜିନିଷ : ରେଡଭର୍ଡ୍ ଭିସକୋମିଟର, ତାପମାପୀ, ଷ୍ଟପ୍‌କ୍ଲିପ୍

ଦରକାରୀ ରାସାୟନିକ ଜିନିଷ : ଲୁବ୍ରିକେଟିଂ ତେଲ

ସିଦ୍ଧାନ୍ତ : ଭିସ୍କୋସିଟି ହେଉଛି ଗୁଟ୍ଟେ ତରଳ ପଦାର୍ଥର ଗୁଣ ଯାହାର ଲାଗି ଇଡାର୍ ପ୍ରବର୍ତ୍ତେ ପ୍ରତିରୋଧ କରନ୍ତି । ସେଥିଲାଗି ଇଡା ତରଳ ପଦାର୍ଥର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପ୍ରତିରୋଧର ଗୁଟ୍ଟେ ମାପ ଆଉ ଇଡାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ସାଧାରଣତଃ ଲୁବ୍ରିକେଟିଂ ତେଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ କରାଯାଏ । ଇଡାର ଯେନ୍‌ସି ଲୁବ୍ରିକେଟିଂ ତେଲର ସବୁଠାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁଣ, କାରଣ ଇଡା ମୁଖ୍ୟ କାରକ ଯାହାର ଗୁଟ୍ଟେ ଲୁବ୍ରିକେଟିଂର କାମ୍ କରବାର ଗୁଣଗୁଡ଼ାକ ବାହାର କରନ୍ତି ।

ଯେନ୍ କେନ୍‌ସି ତାପମାତ୍ରା ତେଲର ପରମ ସାନ୍ଦ୍ରତା ଗୁଟ୍ଟେ କୈଶିକ ନଳୀ ମାଧ୍ୟମରେ ତେଲର ପ୍ରବାହ ହାର ମାପି ବାହାର କରାଯାଏ । ସାଧାରଣତଃ ମାନକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗୁଟ୍ଟେ ମାନକ ପରିମାଣର କୈଶିକ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୁଟ୍ଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣର ତେଲ ନିଜର ଓଜନ ତଳେ ପ୍ରବାହିତ ହେବାର ଲାଗି ଲାଗୁଥିବାର ସମୟକେ ମାପି ବାହାର କରାଯାଏ । ତେଲର ସାନ୍ଦ୍ରତା ମାପ ଲାଗି ଭେଦାର୍ ହେଉଥିବା ଉପକରଣକେ ଭିସ୍କୋମିଟର କୁହାଯାଏ । ରେଡଭର୍ଡ୍ ଭିସ୍କୋମିଟର ସାଧାରଣତଃ ଅନୁଭୂତିଶାଳ ଏକକରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଅଭିଜ୍ଞତାମୂଳକ ଏକକରେ ଲୁବ୍ରିକେଟିଂ ତେଲର ସାନ୍ଦ୍ରତା ମାପ ଲାଗି ବେଭାର୍ ହେଇ ।

ସୂତ୍ର ହିସାବେ, ରେଡଭର୍ଡ୍ ଭିସ୍କୋମିଟର ଦ୍ୱାରା ତରଳ ପଦାର୍ଥର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଗତିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା ବାହାର କରାଯାଇପାରିବ । $(\alpha t - \frac{\beta}{t})\rho$

ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାନ୍ଦ୍ରତା =

$$\frac{\text{Absolute Viscosity}}{\rho} = \alpha t - \frac{\beta}{t}$$

ଗତିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା (V) =

କେନ୍‌ଠାନ୍,

V = ସେଣ୍ଟିମିଟରରେ ତେଲର ଗତିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା ।

T = କୈଶିକ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରବାହିତ ତେଲର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣ ଲାଗି ସେକେଣ୍ଡରେ ପ୍ରବାହ ସମୟ

ρ = ତେଲର ଘନତ୍ୱ


α ଏବଂ β ହେଉଛି ଯନ୍ତ୍ର ସ୍ଥିର ।

α ଏବଂ β ର ମୂଲ୍ୟ β ତଳେ ଦିଆଯାଇଛି :



୫୦ ମିଲି ଲାଗି ପ୍ରବାହ ସମୟ ସେକେଣ୍ଡରେ	α	β
୩୪-୧୦୦	0.00260	0.00260
୧୦୦ ରୁ ଅଧିକ	0.00247	0.00247

ମୂଲ୍ୟଗୁଡ଼ାକ ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡ୍ ସ୍କେଲରେ ଗଣନା କରାଯାଏ ।

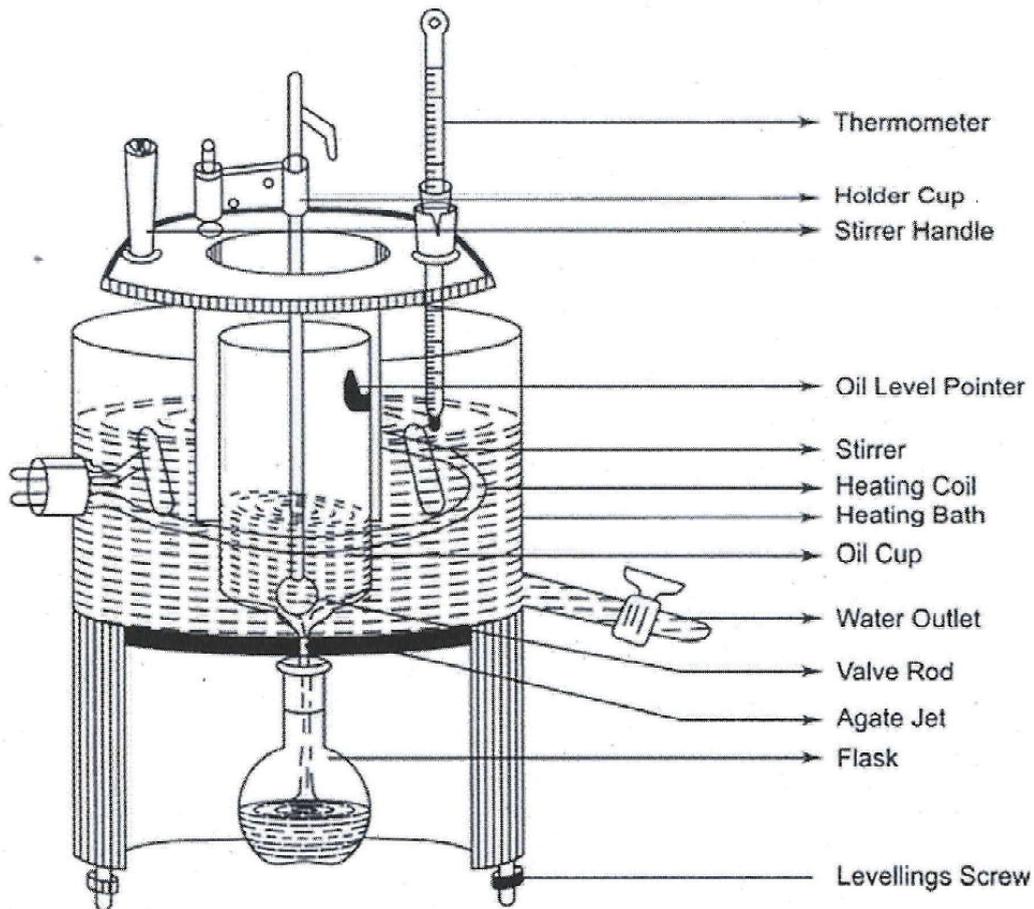

ଚିତ୍ର ୦୧ : ରେଡ଼ଉଡ୍ ଭିସକୋମିଟର ।

କେନ୍ଦ୍ରା କର୍ମା :

ତେଲ କପରେ ତେଲ ନେବା ଆଗରୁ ନିଶ୍ଚିତ କର ଯେ ତେଲ କପଟା ସଫା ଆଉ ଶୁଖା ଅଛେ ଆଉ ତେଲ ପ୍ରବାହ ଲାଗି କୈଶିକାଲିରେ କେନ୍ଦ୍ରୀ ବାଧା ନାହିଁ । କୈଶିକାଲି ବନ୍ଦ କର ଆଉ କପଟାକେ ସ୍ତର ସୂଚକ ତକ୍ ତେଲ ନମୁନାଥି ପୂରଣ କର । ଗରମ ଜ୍ୟାକେଟ୍ରେ ଗରମ ପାନି ଭର, ଯାହାକେ ତେଲର ତାପମାତ୍ରାକେ ଅଲତା ମୂଲ୍ୟ ତକ ବଢ଼ାବାର ଲାଗି ଗରମ କରାଯାଇପାରିବ । ଯେନ୍ତାକେ ମାପ କରିବାକେ ହେବ । ତେଲ କୋଠରୀ ମାଧ୍ୟମ୍ରେ ପ୍ରବାହିତ ହେବା ସମୟରେ ପହେଲା ମାପ କର ଆଉ ତଳେ ରଖାଯାଇଥିବା ମାପକ କୋହଲରାସ୍ ପ୍ୟୁମ୍ପ୍ଥି ଠିକ୍ ୫୦ ମିଲି ତେଲ ସଂଗ୍ରହ ହେବା ସମୟକେ ସେକେଣ୍ଡରେ ରେକର୍ଡ୍ କର । କୈଶିକାଲି ବନ୍ଦ କର, ସମାନ ତେଲ ଦ୍ଵାରା ତେଲ କପକେ ଲେଭଲିଂ ଚିହ୍ନା ତକ୍ ଆଉଥରେ ଭର, ଗରମ କରି ତେଲ୍ ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରାୟ ୧୦-୧୫ °C (୧୦ °C ରୁ



କମ୍ ନୁହେଁ) ବଡ଼ାଅ ଆଉ ମାପକ କୋହଲରାସ୍ ପ୍ଲୁମ୍ବରେ ଠିକ୍ ୫୦ ମିଲି ତେଲ ସଂଗ୍ରହ ହେଲା ପରେ ସେକେଣ୍ଡୁ ତାପମାତ୍ରା ଆଉ ଅନୁରୂପ ସମୟ ରେକର୍ଡ କର । ପାଞ୍ଚଟା ଭିନ୍ନ ତାପମାତ୍ରାରେ ମାପ ବାର୍ ବାର୍ କର । ବିଭିନ୍ନ ତାପମାତ୍ରାରେ ତେଲର ଗତିଗତ ସାଧୁତା ଗଣନା କର ଆଉ ତାପମାତ୍ରା ଆଉ ତେଲର ଗତିଗତ ସାଧୁତା ଭିତ୍ରେ ଗୁଟେ ଗ୍ରାଫ୍ ବନାଅ । ସେକେଣ୍ଡୁ ରେଡ଼ଉଡ଼୍ ସାଧୁତା ଭାବେ ହାରାହାରି ମୂଲ୍ୟ ରିପୋର୍ଟ କର ।

ଗଣାଲେଖା :

ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ସଂଖ୍ୟା	ପହେଲା ତାପମାତ୍ରା (°C)	ଶେଷ ତାପମାତ୍ରା (°C)	ମଝି ତାପମାତ୍ରା (°C)	ସମୟ (ସେକେଣ୍ଡ)	α ର ମୂଲ୍ୟ	β ର ମୂଲ୍ୟ	ଗତିକ ସାଧୁତା (ସେଣ୍ଟିମିଟର)
୧							
୨							
୩							
୪							
୫							

ଗ୍ରାଫ୍ : ତାପମାତ୍ରା ବନାମ କାଲନେମାଟିକ୍ ସାଧୁତା ଗ୍ରାଫ୍ ବନାଅ ।

ଶେଷକଥା :

ତାପମାତ୍ରା ବନାମ ଗତିକ ସାଧୁତାର ଗୁଟେ ଗ୍ରାଫ୍ ପୁଟ ବନାଇ କରି ପାଇଥିବାରୁ ଇ ଶବ୍ ସ୍ଲୋପି ବକ୍ତ୍ର ପ୍ରମାଣ କରସି ଯେ ଉପରୋକ୍ତଗୁଡ଼ାକ ପରସ୍ପର ସହ ବିପରୀତ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ଅର୍ଥାତ୍ ତାପମାତ୍ରା ବଡ଼ବାରୁ ସହ, ସାଧୁତା କମ୍ ସି ଆଉ ବିପରୀତ ଭାବେ ଯୋଗାଣ ହୋଇଥିବା ତେଲର ସାଧୁତା ରେଡ଼ଉଡ଼୍ ସେକେଣ୍ଡ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିସି ।




ପରୀକ୍ଷଣ - ୧୦

ପରୀକ୍ଷଣର ଲକ୍ଷ୍ୟ : ଆସ୍ଟିରିନ୍ (ଏସେଟିଲ୍ ସାଲିସିଲିକ୍ ଏସିଡ୍) ବନାଯିବା ।

ଦରକାରୀ ଜିନିଷ : କନିକାଲ୍ ଫ୍ଲୁକ୍ସ, ବିକର (୧୦୦ ମିଲି), ବୁରନର୍ ଫନେଲ୍

ଦରକାରୀ ରାସାୟନିକ ଜିନିଷ : ସାଲିସିଲିକ୍ ଏସିଡ୍, ଏସେଟିକ୍ ଏନହାଇଡ୍ରାଇଡ୍,

ସିଦ୍ଧାନ୍ତ : ସାଲିସିଲିକ୍ ଏସିଡ୍ ଏସେଟିଲେସନ୍ କରବାର ସଙ୍ଗେ ଏସେଟିଲ୍ ସାଲିସିଲିକ୍ ଏସିଡ୍ କି ଆସ୍ଟିରିନ୍ ତିଆରି ହେବି । ଏସେଟିଲେସନ୍ ଏସେଟିକ୍ ଏନହାଇଡ୍ରାଇଡ୍ ସହ ଜଳଦି ହେସି ଆଉ କିଛି ଗାଢ଼ ଗନ୍ଧକାମ୍ଳ (Con. H₂SO₄) ର ଉପସ୍ଥିତିଥି ଇଟା ଗୁଟେ ପ୍ରରୋଚକ ଭାବେ କାମ୍ କରସି ।

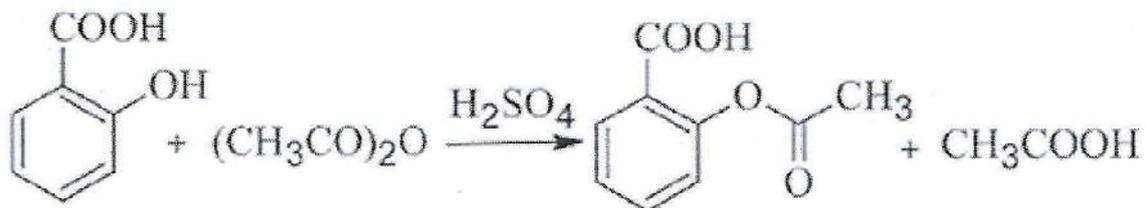

କେନ୍ଦ୍ରା କରମା :

୫ ଗ୍ରାମ ସାଲିସିଲିକ୍ ଏସିଡ୍ ଏବଂ ୭ ମିଲି ଏସିଟିକ୍ ଏନହାଇଡ୍ରାଇଡ୍ କେ ୧୦୦ ମିଲି କନିକାଲ୍ ଫ୍ଲୁକ୍ସରେ ନିଅ । ଇଡାର ୨-୩ ବୁନ୍ଦା ଗାଢ଼ ଗନ୍ଧକାମ୍ଳ (Con. H₂SO₄) ପକାଅ, ଇଡାକେ ଭାଲଭାବେ ମିଶାଅ ଆଉ ତାର ପରେ ଫ୍ଲୁକ୍ସକେ ଗୁଟେ ପାନି ପାତ୍ରଥି ଗରମ କର, ତାପମାତ୍ରା ୬୦-୭୦ °C ଭିତ୍ରେ ରଖିକରି ୨୦ ମିନିଟ୍ ତକ୍ ରଖ । ମିଶ୍ରଣକେ ଗୁଟେ ଥଣ୍ଡା ପାତ୍ରଥି ଅନବରତ ଘୁନର୍ କରି ଥଣ୍ଡା କର, ଇଡାର ପ୍ରାୟ ୨୦ ମିଲି ଅତି ଥଣ୍ଡା ଜଳ ଯୁଡ଼ ଯେନ୍ତା ଅତିରିକ୍ତ ଏସେଟିକ୍ ଏନହାଇଡ୍ରାଇଡ୍ କେ ବିଘଟଣ କରିବାକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା । କନିକାଲ୍ ଫ୍ଲୁକ୍ସଥି ଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟକେ ୨ ୫୦ ମିଲି ବିକରଥି ୫୦ ଗ୍ରାମ ବରଫ୍ ଗୁଣ୍ଡ ରଖିକରି ଘୁନର୍ କର, ଯେନ୍ତାକି, ସେଥି ଥିବା ଧଳା ପଦାର୍ଥ ଦେଖା ନାଇ ଯାଏ, ଫ୍ଲୁକ୍ସର ଭିତରର ସ୍ତରକେ ଗ୍ଲାଇ ରଡ଼୍ କି ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ସ୍ଟିଲ୍ ସ୍ପାରୁଲା ସହ ଘର୍ଷଣ କର । ବୁରନର୍ ଫନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମଥି ଫିଲ୍ଟର କର ଆଉ ଫିଲ୍ଟର କାଗଜର ଫୋଲ୍ଡ ଭିତ୍ରେ ଦବାଇ କରି ଶୁଖା କର । ବାହାରିଥିବା ଏସେଟିଲ୍ ସାଲିସିଲିକ୍ ଏସିଡ୍ କେ ଏସେଟିକ୍ ଏସିଡ୍ ଆଉ ପାଣିର ସମାନ ଭାଗର ମିଶ୍ରଣରୁ ଆଉ ଥରେ crystallize (ଦାନାଦାର ରୂପ) କର ।

ଶେଷକଥା :

ଉତ୍ପାଦନ = ୫ ଗ୍ରାମ ଗଲନସ୍ଥାନ = ୧୩୬-୧୩୭ °C

ଏସେଟିଲ୍ ଏସିଡ୍ ଅମ୍ଳ ଗରମ କରବାର ସମୟଥି ବିଘଟିତ ହୋଇଯାଏସି ଆଉ ଇଟା ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଗଲନାଙ୍କ ନାଇ ରଖେ ।